


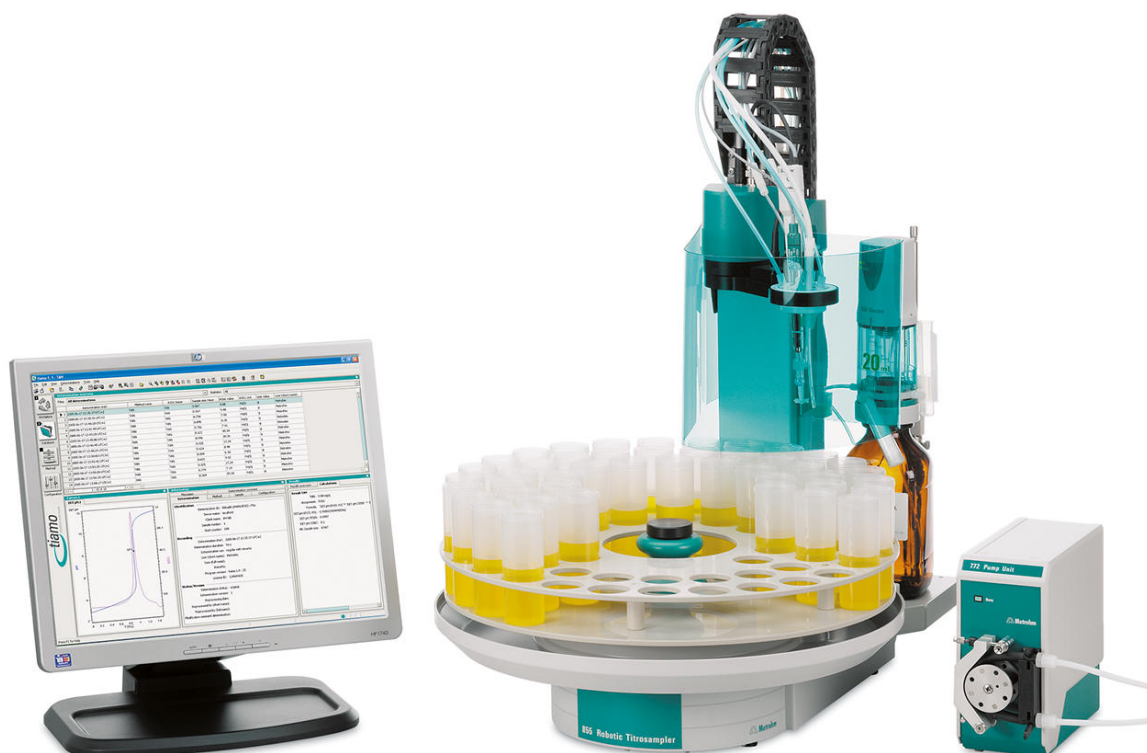

Robotic TAN/TBN Analyzer

2.855.2010

TAN および(または)TBNの測定のためのコンプリートパッケージには、最小スペース、最短時間で実行できる完全自動 TAN/TBN 滴定のための全てのコンポーネントが含まれます。装置、付属品、ソフトウェア、アプリケーション・ノウハウなど、全てが含まれています。

納品範囲 2.855.2010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.772.0110	772 Pump Unit

Peristaltic pump for direct connection to Sample Processors.





個々のお客様の状況に応じた、滴定におけるオートメーションの拡張機能の基本モデル。内蔵式タイタランド、スイングヘッドを含むワークステーション、内蔵式ダイヤフラムポンプが装備された省スペース型のロボテックサンプルプロセッサXL。滴定排液のため、外付けチューブもしくはダイヤフラムポンプをオプションとして接続することができます。メソッドのプログラミングは、ハンディタイプのタッチコントロールまたは滴定ソフトウェア *tiamo*™によって行われます。



あらゆる酸/塩基の非水滴定のための、フレキシブルなeasyCleanダイヤフラムおよび固定式ケーブル (1.2 m) 付き複合pH 電極。ガラスメンブランは導電性の低い溶液のために最適化されており、洗浄の容易なeasyCleanダイヤフラムにより、この電極は汚れの酷いサンプル (たとえば廃油) にも適しています。この電極は、非水系参照内部液 (塩化リチウムまたは臭化テトラエチルアンモニウム) を使用することができます。適切な参照内部液で保管してください。

Solvotrode easyCleanについては、製品番号6.0229.020の固定ケーブル長2.0mも入手可能です。



1 PCS

6.1458.040

Titration Head, 3 x SGJ 14



1 PCS

6.1459.300

プラスチック製 (PP) サンプルビーカー 120 mL、
250 個

プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) サンプルビーカー 120 mL、サ
ンプルラック 6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、
6.2068.020、6.2068.030 および 6.9920.141 に適合、250 個



1 PCS

6.1462.170

Robotic arm with holder for titration head and
sensor for 786 Swing Head, right swinging

1 PCS

6.1543.170

Aspiration tip / M8 thread



1 PCS

6.1546.030

エキストラクターロッド

807 Dosing Units または シリンダーユニット OMNIS のピストン用。



2 PCS

6.1608.023

Amber glass bottle / 1000 mL / GL 45



2 PCS

6.1621.000

Container 10 L



3 PCS

6.1805.060

FEP tubing / M6 / 60 cm



2 PCS 6.1805.120 FEP tubing / M6 / 100 cm



1 PCS 6.1805.510 PTFE tubing / M8 / 60 cm



2 PCS 6.1812.000 PTFE tubing 4 mm / 6 mm / 4 m



2 PCS 6.1820.050 M6 / Olive adapter



1 PCS

6.1826.160

Viton pump tubing



2 PCS

6.1828.000

PVDF connection nipple



1 PCS

6.1909.050

Stirring propeller / 102 mm



1 PCS

6.2001.120

Bottle holder base, right, to 855



1 PCS

6.2041.850

サンプルラック、59 x 120 mL、(ポリプロピレン製)

59 個のサンプルビーカーに適した 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler「Basic」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1459.300、6.1459.307。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



1 PCS

6.2053.000


Cable clip



1 PCS

6.2061.010

Bottle holder for Dosinos

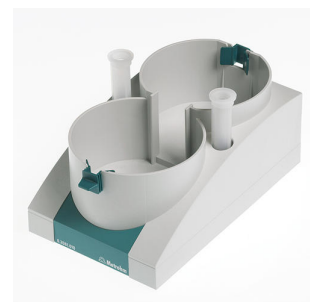

1 PCS

6.2151.000

Cable USB A – mini-DIN 8-pin



1 PCS

6.2320.000

TEABr 0.4 mol/L in ethylene glycol (250 mL)



1 PCS

6.2621.030

Hexagon key 4 mm



1 PCS

6.2621.070

5 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.130

Hexagon key 2 mm



1 PCS

6.2621.140

Hexagon key 2.5 mm



1 PCS

6.2711.070

Drip pan for 789/815/855



3 PCS

6.2740.020

Spray nozzle



1 PCS

6.2751.100

Safety shield



1 PCS

6.3032.220

807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit、20 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



1 PCS

6.3032.250

807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit、50 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



2 PCS

1.800.0030

800 Dosino (ケーブル長 1.5 m)

インテリジェントドージングユニットのための書き込み/読み取りハードウェア付き駆動部。固定取付けされたケーブル付き (長さ1.5 m)。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
2.849.0010	849 Level Control



6.2148.010	Remote Box MSB
------------	----------------



6.2840.000	Water bath for Robotic Sample Processors and Robotic Titrosampler
------------	---



複雑なOMNIS分析システムの制御のための、ライセンスに基づいたPCプログラム

- 多数のテンプレートを有する、サンプルに合わせた作業手順
- 多数のテンプレートを有するグラフィックメソッドエディター
- ひと目で概要が分かるプロフェッショナルなサンプルリスト
- 装置、ワークシステム、センサー、溶液の管理
- ダイアログ言語: ドイツ語、英語、中国語



Windows™コンピュータ上のOMNISソフトウェアをスタンドアローン操作することが可能になります。

特徴:

- ライセンスには、既に1つのOMNISデバイスライセンスが含まれています。
- メトローム・ライセンシングポータルにて、アクティブ化する必要があります。

