



Conductometric Titrator

2.856.1210

IP 400に準じた石油製品中の塩基価の測定などといった電導度滴定のための完全なパッケージ。

856 Conductivity Module、801 マグネチックスターラ、800 Dosino、807 Dosing Unit (20 mL)、電気伝導度測定セルおよびtiamo™ lightを含む。

納品範囲 2.856.1210

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.801.0010	801 Stirrer



既存のタイタランドシステムもしくは900 タッチコントロールと組み合わせた「スタンドアローン」の拡張としての導電率（電気伝導度）測定モジュール。856 導電率モジュールにより、電気伝導度と温度はもちろん、TDSと塩分濃度も測定することができます。これを支えるのが、最新テクノロジーの導電率測定セル、5-リング測定セルです。



絶縁処理した電極インプット口により、pH値および導電率は同じビーカー内で問題無く測定することができます。

導電率モジュールには、プリンター、バーコードリーダーまたはサンプルチェンジャーを接続するUSBインターフェースが2つ、スターラーもしくはドジーノを接続するMSBインターフェースが4つ装備されています。

900 タッチコントロールと接続したスタンドアローンデバイスとして、また *tiamo*™ full (ab 2.0) と接続しても、GLPおよびFDA 21 CFR part 11の要求仕様を満たします。

セル定数 $c = 0.7 \text{ cm}^{-1}$ (指針値) の5リング電気伝導度測定セル、内蔵 Pt1000温度センサーおよび856 Conductivity Moduleとの接続のための固定式ケーブル (1.2 m) 付き。

このセンサーは、以下のような液体などにおける中程度の電気伝導度 ($5 \mu\text{S}/\text{cm}$ から $20 \text{ mS}/\text{cm}$) の測定に適しています：

- 飲料水
- 表面水
- 廃水



807 Dosing Units または シリンダーユニット OMNIS のピストン用。



1 PCS

6.1608.030

Round glass bottle / 1000 mL / GL 45



1 PCS

6.1903.020

Stirring bar / 16 mm



1 PCS

6.1903.030


Stirring bar / 25 mm



1 PCS

6.2001.060

Support stand without support rod

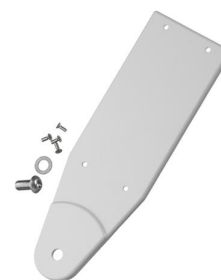

1 PCS

6.2013.010

Clamping ring



1 PCS

6.2016.070

Support rod / 400 mm



1 PCS

6.2021.020

Electrode holder



1 PCS

6.2151.000

Cable USB A – mini-DIN 8-pin



1 PCS

6.2621.070

5 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.130

Hexagon key 2 mm



1 PCS

6.3032.220

807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit、20 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



1 PCS


1.800.0030

800 Dosino (ケーブル長 1.5 m)

インテリジェントドージングユニットのための書き込み/読み取りハードウェア付き駆動部。固定取付けされたケーブル付き (長さ1.5 m)。



オプションアクセサリ

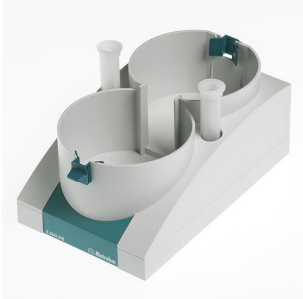Order no.	説明	
6.2061.010	Bottle holder for Dosinos	
6.2065.000	Stacking frame for 846 Dosing Interface, 856 Conductivity Module, 867 pH Module	