



862 Salt Compact Titrosampler

2.862.2010

862 塩分向けコンパクトタイトロサンプラは、様々なサンプルを電位差測定による塩化物分析を自動で行うのに非常に適しています。

最小スペースで当量点自動検出を含むダイナミック滴定 (DET)、等量滴下滴定 (MET)、および終点滴定 (SET) を自動で実行する、滴定装置とサンプルチェンジャーが1つに組み合わされた装置です。

862 塩分向けコンパクトタイトロサンプラ には広範囲にわたる付属品が装備されており、直ちにご使用いただけます。計12のポジションにて異なる滴定を完全自動で行い、電極を洗浄、保管することができます。大きく全体像の掴みやすいライブディスプレイによって滴定曲線をひと目ですぐに確認し、サンプルシリーズの直近のステータスを即座に把握することができます。緊急のサンプルは、いつでも優先的に分析を行うことができます。

納品範囲 2.862.2010

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

862 コンパクトタイトロサンプラ : 自動滴定装置とサンプルチェンジャーが一体化したシステム は、市販の分析天秤のスタンド面の付いた完全自動化された滴定ステーションです。

最小スペースで当量点自動検出を含むダイナミック滴定 (DET) および等量滴下滴定 (MET) および終点設定滴定 (SET) を自動で実行するための、コンパクトかつ経済的な装置。

計12のポジションにて異なる滴定を完全自動で行い、電極を洗浄、保管することができます。

大きく全体像の掴みやすいライブディスプレイによって滴定曲線をひと目ですぐに確認し、サンプルシリーズの直近のステータスを即座に把握することができます。緊急のサンプルは、いつでも優先的に分析を行うことができます。



プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) サンプルビーカー 120 mL、サンプルラック 6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、6.2068.020、6.2068.030 および 6.9920.141 に適合、250 個



1 PCS

6.1546.030

エキストラクターロッド

807 Dosing Units または シリンダーユニット OMNIS のピストン用。



1 PCS

6.1608.023

Amber glass bottle / 1000 mL / GL 45



1 PCS

6.1815.010

Spiral band 0.5 m



1 PCS

6.1909.050

Stirring propeller / 102 mm



1 PCS

6.2104.020

Electrode cable / 1 m / F



1 PCS

6.2147.000

USBテンキーパッド

Titrimo plus、Dosimat plus、862 Compact Titrator、869 Compact Sample Changer、863 Compact Autosampler、および899 Coulometer用のUSBテンキーパッド。コネクタが2つ付いたUSBハブを含む。



1 PCS

6.2151.100

Adapter USB MINI (OTG) - USB A



1 PCS

6.2621.130

Hexagon key 2 mm



1 PCS

6.2621.140

Hexagon key 2.5 mm



1 PCS

6.2723.310

Protective cover for Titrino plus



1 PCS

6.3032.220

807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit、20 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



1 PCS

6.6061.010

Titrino plus methods USB Stick





Antrieb mit Schreib-/Lesehardware für intelligente Dosiereinheiten. Mit fest montiertem Kabel (Länge 0.65 m).



参照電極としての、pHガラスメンブランを含む複合銀リング電極。
このメンテナンスフリーの電極は、例えば以下のような一定したpH値
(滴定試薬硝酸銀) での沈殿滴定に適しています:

- 塩化物、臭化物、ヨウ化物
- 硫化物
- 硫化水素
- メルカプタン
- シアン化物

この電極は蒸留水で保管されます。

用途に応じて、注文可能な、コーティングされた (AgBr、AgClまたは
Ag₂Sコーティング) Ag Titrodeの使用を推奨しています。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2136.010	Remote cable (9p) - Dosimat (2xSt B)



2.843.0130	843 Pump Station (peristaltic) - rinse/aspirate for Compact Sample Changer
------------	--



ラボでの滴定および分注作業用ユニバーサルディスペンサー。手動による分注制御のためのプッシュボタンケーブルおよび交換ユニット20 mL 6.3026.220を含む。ドジマツプラスのUSBインターフェースには多数の機器を、しかもUSBハブだけではなく同時に複数のもの（キーボード、マウス、USBコンパクトプリンタまたはUSB DIN A4プリンタ、メソッドおよびデータのバックアップのためのUSBメモリースティック）を接続することができます。オプションのUSB/RS232 アダプターボックス 6.2148.030により、ラボ天秤との接続やパソコンを使用しての制御が可能です。



その4つのドージングモードにより、ドジマツプラスは様々な用法が可能となります。:

DOS (Dosing) – キーを押してドージング

このモードは特にインジケータによる手動の滴定の実施に適しています。ドージングされた容量から結果が自動的に算出され、結果レポートが印刷されます。

XDOS (Extended dosing) – 制御ドージング

- 容量指定のドージング: 容量と吐出速度を設定します。
- 時間指定のドージング: 容量と時間を設定します。
- 吐出速度によるドージング: 吐出速度と時間を設定します。

中断無しで持続的なドージングが必要な場合、865 ドジマツプラスを 805 ドジマツと一緒にタンデムモードで稼働させることができます。

CNT D (Content dosing) – 標準液およびその他の溶液の生成

原物質のサンプル量（固形物もしくは倍液）および指定された目標濃度に基づき、溶媒のドージング量が自動的に算出されます。

LQT (Liquid transfer) – 液体をピペットで吸い、希釈します。

手動滴定およびドージングのためのユニバーサルディスペンサー。手動のドージング操作のためのプッシュボタンケーブルおよび交換ユニット 20 mLを含みます。ドジマツプラスのUSBインターフェースには多数の機器を、しかもUSBハブだけではなく同時に複数のもの(キーボード、マウス、USBコンパクトプリンタもしくはUSB DIN A4プリンタ、メソッドおよびデータのバックアップのためのUSBメモリースティック)を接続することができます。オプションのUSB/RS232 アダプターボックス 6.2148.030により、ラボ天秤との接続やパソコンを使用しての制御が可能です。



その両方のドージングモードにより、ドジマツプラスは以下のような用法が可能となります。:

DOS (Dosing) – キーを押してドージング

このモードは特にインジケータによる手動の滴定の実施に適しています。ドージングされた容量から結果が自動的に算出され、結果レポートが印刷されます。

XDOS (Extended dosing) – 制御ドージング

- 容量指定のドージング: 容量と吐出速度を設定します。
- 時間指定のドージング: 容量と時間を設定します。
- 吐出速度によるドージング: 吐出速度と時間を設定します。



6.2141.230 Remote cable Compact Sample Changer/Compact Autosampler -
Titrino plus/Pump Station



6.2141.240 Remote cable Dosimat plus - Compact Sample Changer/Titrino
plus



6.3032.150 807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit、5 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型
データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り
付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。




6.3032.210 807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit、10 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型
データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り
付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



807 Dosing Unit、50 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。

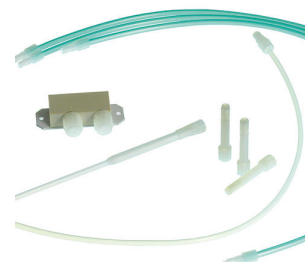

以下の装置のためのUSBインターフェース付きコンパクトプリンター

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (ケーブル6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



用紙幅 60 mm (40 字)。USBケーブル 6.2151.120 付属。

6.2103.130 Adapter red 2 mm plug / 4 mm socket



6.2103.140 Adapter black 2 mm plug / B socket 4 mm

