



867 pH Module、Touch Control付き

2.867.0110

ハイエンドpH/イオンメータは、900 タッチコントロール、854 iコネクト、インテリジェントなpHガラス電極 《iユニットロード》 を含む867 pH モジュールをベースとしています。pH モジュールは、pH、温度、mV、Ipol、Upol、濃度の他に 標準添加 (manual、dos、autodos) およびリキッドハンドリング(add、prep、empty)を実施することができます。このモジュールにより、測定のための従来のセンサーおよびインテリジェントセンサーの使用が可能です。ソフトウェアにはGLP準拠の自動pH電極テストも組み込まれています。pH モジュールには、プリンター、バーコードリーダーまたはサンプルチェンジャーを接続するUSBインターフェースが2つ、スターラーもしくはドジーノを接続するMSBインターフェースが4つ装備されています（予備溶液の添加もしくは標準添加のため）。

タッチコントロールと組み合わせることにより、GLPおよびFDA 21 CFR part 11の要求仕様を満たします。

納品範囲 2.867.0110

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

タイトランドの拡張用だけでなく、900 タッチコントロールと組み合わせて単体としても使えるpH/イオン測定用モジュール


pH モジュールは、pH、温度、mV、Ipol、Upol、濃度の他に 標準添加 (manual、dos、autos) およびリキッドハンドリング(add、prep、empty) を実施することができます。このモジュールにより、測定のための従来のセンサーおよびインテリジェントセンサーの使用が可能です。ソフトウェアにはGLP準拠の自動 pH電極テストも組み込まれています。

pH モジュールには、プリンター、バーコードリーダーまたはサンプルチェンジャーを接続するUSBインターフェースが2つ、スターラーもしくはドジーノを接続するMSBインターフェースが4つ装備されています (予備溶液の添加もしくは標準添加のため)。

タッチコントロールと接続して、また *tiamo*™ full (ab 2.0) と接続しても、GLPおよびFDA 21 CFR part 11の要求仕様を満たしています。



タイトランド用オペレーションユニット、USBサンプルプロセッサ、856導電率モジュール、867 pHモジュール、846 ドージングインターフェース。接触感度が高く、高解像度のカラーディスプレイ、メソッドへ直接アクセスするためのお気に入りメニューによる直管的な操作。インターネットに直接繋げるための内蔵式イーサネットインターフェース、USBプリンターまたはUSBメモリースティックと接続するためのUSBインターフェースを含む。ダイアログ言語: ドイツ語、英語、中国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、ポーランド語、イタリア語。

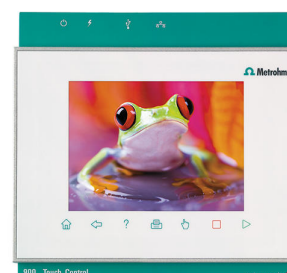

センサーデータのメモリーチップおよびPt1000温度センサーが内蔵されたインテリジェントな複合pH電極。この電極は、特に以下の用途に適しています:

- 困難なサンプル、粘性のあるサンプル、またはアルカリ性のサンプルにおけるpH測定および滴定
- 高温時
- 長期測定




固定グランドジョイントダイアフラムは汚れに対して耐性があります。

参照内部液: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 、保存液で保存。

代替: $T > 80^\circ \text{C}$ での測定用参照内部液: イドロライト、イドロライトで保管。

iTrodeはTitrand、Ti-Touch、またはは913/914 メーターにて使用することが可能です。

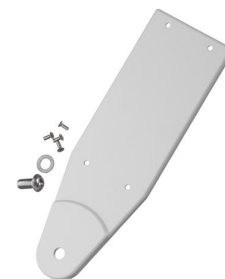

1 PCS

6.2016.070

Support rod / 400 mm



1 PCS

6.2021.020

Electrode holder



1 PCS

6.2307.230

Buffer solutions pH 4, 7 and 9



1 PCS

6.2325.000

pHit kit



1 PCS

6.2621.070

5 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.130

Hexagon key 2 mm



1 PCS

6.6064.010

USB Memory Stick for 900 Touch Control



オプションアクセサリ

Order no.	説明
2.801.0010	801 Stirrer



2.802.0040	804 Ti Stand 用 802 Stirrer プロペラスターラ 6.1909.010 を備えるロッドスターラ。
------------	--



2.804.0010	804 Ti Stand without stand rod
------------	--------------------------------



小検体数から中検体数までのルーチンサンプルの連続自動処理のためのワークステーションおよび内蔵式ダイヤフラムポンプ付きUSBサンプル・プロセッサ。LQH（リキッドハンドリング）作業のため、内蔵式ポンプの他に、ポンプをさらに1つ（ダイヤフラムポンプもしくはペリスタリックポンプ）とドージングデバイスを3つまで接続することができます。

様々な用途に対応するため、サンプルラック、スターラー、滴定ヘッド、Swing Head、サンプル容器はアプリケーションに合わせて別途ご注文ください。

制御はTouch Controlにより「スタンドアローン」で動作します。PC制御には以下のソフトウェア製品を選択することができます：滴定ソフトウェアtiamo™、クロマトグラフィーソフトウェアMagIC Net、ポルトンメトリソフトウェアviva、またはOMNIS。



小検体数から中検体数までのルーチンサンプルの連続自動処理のためのワークステーションおよび内蔵式ダイヤフラムポンプが2つ付いたUSBサンプルプロセッサ。LQH（リキッドハンドリング）作業のため、内蔵式ポンプの他に、ドージングデバイスを更に3つまで接続することができます。

様々な用途に対応するため、サンプルラック、スターラー、滴定ヘッド、Swing Head、サンプル容器はアプリケーションに合わせて別途ご注文ください。

制御はTouch Controlにより「スタンドアローン」で動作します。PC制御には以下のソフトウェア製品を選択することができます：滴定ソフトウェアtiamo™、クロマトグラフィーソフトウェアMagIC Net、ポルトンメトリソフトウェアviva、またはOMNIS。



少検体数から中検体数までのルーチンサンプルの連続自動処理のためのワークステーション付きUSBサンプルプロセッサ。LQH（リキッドハンドリング）作業のため、ポンプを2つまで(ダイヤフラムポンプもしくはペリスタリックポンプ)、ドージングデバイスを3つまで接続することができます。

様々な用途に対応するため、サンプルラック、スターラー、滴定ヘッド、Swing Head、サンプル容器はアプリケーションに合わせて別途ご注文ください。

制御はTouch Controlにより「スタンドアローン」で動作します。PC制御には以下のソフトウェア製品を選択することができます: 滴定ソフトウェアtiamo™、クロマトグラフィーソフトウェアMagIC Net、ポルタンメトリーソフトウェアviva、またはOMNIS。



6.2103.140 Adapter black 2 mm plug / B socket 4 mm



6.2103.130 Adapter red 2 mm plug / 4 mm socket

