


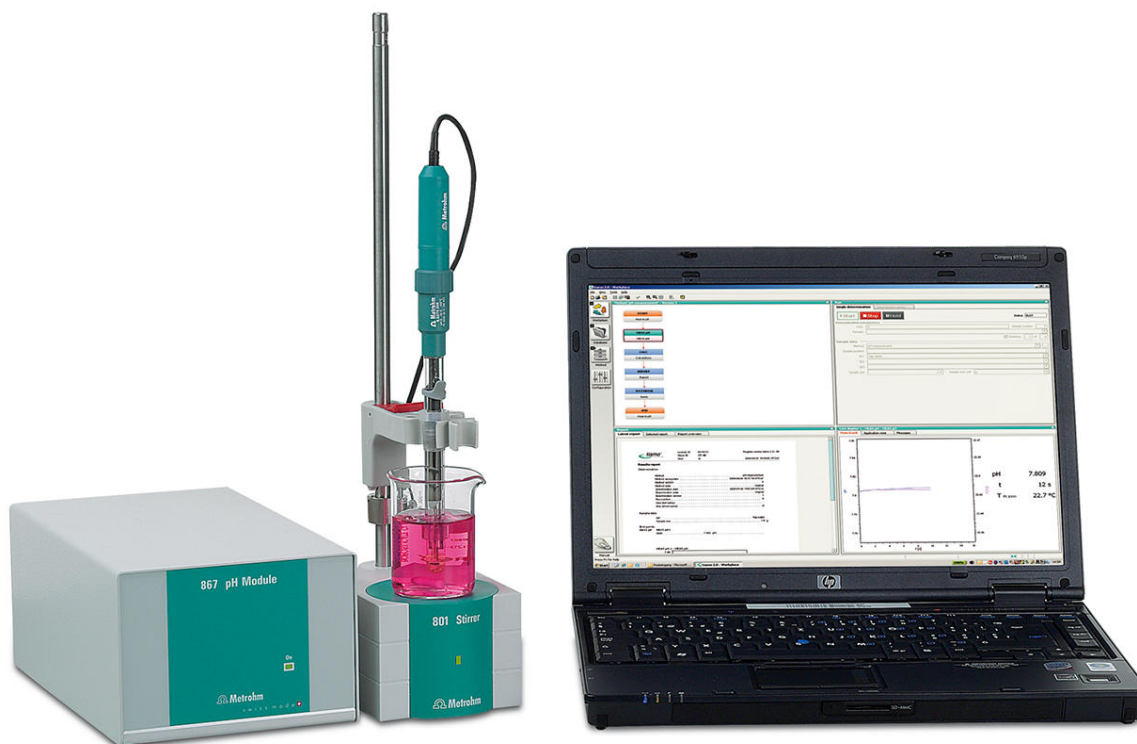

867 pH Module、tiamo™ light付き

2.867.0210

ハイエンドpH/イオン計測器は、*tiamo™ light*、854 iコネクト、インテリジェントなpHガラス電極 《iユニットロード》 を含む867 pH モジュールをベースとしています。pH モジュールは、pH、温度、mV、Ipol、Upol、濃度の他に 標準添加 (manual、dos、autos) およびリキッドハンドリング(add、prep、empty) を実施することができます。このモジュールにより、測定のための従来のセンサーおよびインテリジェントセンサーの使用が可能です。ソフトウェアにはGLP準拠の自動のpH電極テストも組み込まれています。pH モジュールには、プリンター、バーコードリーダーまたはサンプルチェンジャーを接続するUSBインターフェースが2つ、スターラーもしくはドジーノを接続するMSBインターフェースが4つ装備されています（予備溶液の添加もしくは標準添加のため）。

tiamo™ (2.0以降) に組み入れることにより、GLPおよびFDA 21 CFR part 11の要求仕様を満たします。

納品範囲 2.867.0210

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----



タイトロンドの拡張用だけでなく、900 タッチコントロールと組み合わせて単体としても使えるpH/イオン測定用モジュール

pH モジュールは、pH、温度、mV、Ipol、Upol、濃度の他に 標準添加 (manual、dos、autos) およびリキッドハンドリング(add、prep、empty) を実施することができます。このモジュールにより、測定のための従来のセンサーおよびインテリジェントセンサーの使用が可能です。ソフトウェアにはGLP準拠の自動 pH電極テストも組み込まれています。

pH モジュールには、プリンター、バーコードリーダーまたはサンプルチェンジャーを接続するUSBインターフェースが2つ、スターラーもしくはドジーノを接続するMSBインターフェースが4つ装備されています (予備溶液の添加もしくは標準添加のため)。

タッチコントロールと接続して、また *tiamo*™ full (ab 2.0) と接続しても、GLPおよびFDA 21 CFR part 11の要求仕様を満たしています。



センサーデータのメモリーチップおよびPt1000温度センサーが内蔵されたインテリジェントな複合pH電極。この電極は、特に以下の用途に適しています:

- 困難なサンプル、粘性のあるサンプル、またはアルカリ性のサンプルにおけるpH測定および滴定
- 高温時
- 長期測定




固定グランドジョイントダイアフラムは汚れに対して耐性があります。

参照内部液: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 、保存液で保存。

代替: $T > 80^\circ \text{C}$ での測定用参照内部液: イドロライト、イドロライトで保管。

iTrodeはTitrand、Ti-Touch、またはは913/914 メーターにて使用することが可能です。

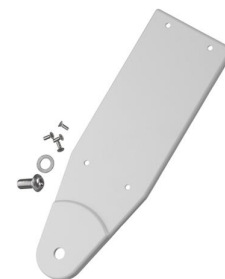

1 PCS

6.2016.070

Support rod / 400 mm



1 PCS

6.2021.020

Electrode holder



1 PCS

6.2151.000

Cable USB A – mini-DIN 8-pin



1 PCS

6.2307.230

Buffer solutions pH 4, 7 and 9



1 PCS

6.2325.000

pHit kit



1 PCS

6.2621.070

5 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.130

Hexagon key 2 mm



オプションアクセサリ

Order no.	説明
2.801.0010	801 Stirrer



2.802.0040	804 Ti Stand 用 802 Stirrer プロペラスターラ 6.1909.010 を備えるロッドスターラ。
------------	--



2.804.0010	804 Ti Stand without stand rod
------------	--------------------------------



小検体数から中検体数までのルーチンサンプルの連続自動処理のためのワークステーションおよび内蔵式ダイヤフラムポンプ付きUSBサンプル・プロセッサ。LQH（リキッドハンドリング）作業のため、内蔵式ポンプの他に、ポンプをさらに1つ（ダイヤフラムポンプもしくはペリスタリックポンプ）とドージングデバイスを3つまで接続することができます。



様々な用途に対応するため、サンプルラック、スターラー、滴定ヘッド、Swing Head、サンプル容器はアプリケーションに合わせて別途ご注文ください。

制御はTouch Controlにより「スタンドアローン」で動作します。PC制御には以下のソフトウェア製品を選択することができます：滴定ソフトウェアtiamo™、クロマトグラフィーソフトウェアMagIC Net、ポルタンメトリーソフトウェアviva、またはOMNIS。

小検体数から中検体数までのルーチンサンプルの連続自動処理のためのワークステーションおよび内蔵式ダイヤフラムポンプが2つ付いたUSBサンプルプロセッサ。LQH（リキッドハンドリング）作業のため、内蔵式ポンプの他に、ドージングデバイスを更に3つまで接続することができます。



様々な用途に対応するため、サンプルラック、スターラー、滴定ヘッド、Swing Head、サンプル容器はアプリケーションに合わせて別途ご注文ください。

制御はTouch Controlにより「スタンドアローン」で動作します。PC制御には以下のソフトウェア製品を選択することができます：滴定ソフトウェアtiamo™、クロマトグラフィーソフトウェアMagIC Net、ポルタンメトリーソフトウェアviva、またはOMNIS。

少検体数から中検体数までのルーチンサンプルの連続自動処理のためのワークステーション付きUSBサンプルプロセッサ。LQH（リキッドハンドリング）作業のため、ポンプを2つまで(ダイヤフラムポンプもしくはペリスタリックポンプ)、ドージングデバイスを3つまで接続することができます。

様々な用途に対応するため、サンプルラック、スターラー、滴定ヘッド、Swing Head、サンプル容器はアプリケーションに合わせて別途ご注文ください。

制御はTouch Controlにより「スタンドアローン」で動作します。PC制御には以下のソフトウェア製品を選択することができます: 滴定ソフトウェアtiamo™、クロマトグラフィーソフトウェアMagIC Net、ポルタンメトリーソフトウェアviva、またはOMNIS。



6.2103.130

Adapter red 2 mm plug / 4 mm socket

