



874 Oven Sample Processor

2.874.0120

874 Oven Sample Processor はカール フィッシャー 滴定のサンプルの加熱自動前処理に使用されます。気化法は特に、高温下においてはじめて水分が気化するサンプルや、難溶性のサンプル、カールフィッシャー試薬に反応するサンプルに適しています。

納品範囲 2.874.0120

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.874.0010	874 Oven Sample Processor

874 オープンサンプルプロセッサはカールフィッシャー水分測定 of サンプルの加熱自動前処理に使用されます。水分気化法は特に、高温下においてはじめて水分が気化するサンプルや、難溶性のサンプル、カールフィッシャー試薬に反応するサンプルに適しています。



1 PCS

6.1446.170


Heating tube stopper



3 PCS

6.1448.057

Aluminum septum caps / 100 pieces

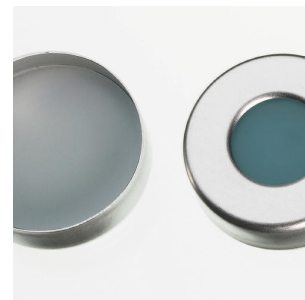

2 PCS

6.1602.145

Drying flask cap



2 PCS

6.1608.050

Drying bottle / 100 mL / GL 45



2 PCS 6.1805.010 FEP tubing / M6 / 13 cm



1 PCS 6.1805.050 FEP tubing / M6 / 18 cm



1 PCS 6.1805.470 FEP tubing / M6 / 44 cm



1 PCS 6.1808.040 Thread adapter M6 outer / M8 inner



1 PCS

6.1808.050

Tubing adapter olive / M8 outer



2 PCS

6.1821.040

Filter tube



1 PCS

6.1830.030

加熱チューブ

860 KF Thermoprep、885 Compact Oven Sample Processor、874 USB Oven Sample Processor に連結するスレッド M6 を有する加熱チューブ。



1 PCS

6.2013.010

Clamping ring




1 PCS

6.2041.720

サンプルラック 36 x 6 mL、(アルミニウム製)

36個のサンプル容器に適した 874 Oven Sample Processor のためのサンプルラック。以下のサンプル容器を使用することができます:
6.2419.000。

材質: アルミニウム (Al)

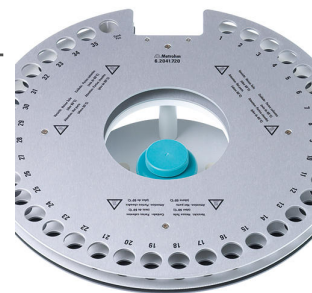

1 PCS

6.2049.040

Needle holder with Luer lock



1 PCS

6.2049.050

Needle holder with Luer lock



1 PCS

6.2053.000

Cable clip



1 PCS

6.2063.020

Sample holder



1 PCS

6.2151.000

Cable USB A – mini-DIN 8-pin



3 PCS

6.2419.007

バイアル 6 mL、100 個

バイアル、6 mL までのサンプル用、セプタム 6.1448.057 に適合、
100 個



1 PCS

6.2621.100

3 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.110

Crimping tongs



1 PCS

6.2621.130

Hexagon key 2 mm



1 PCS

6.2621.140

Hexagon key 2.5 mm



1 PCS

6.2627.010

Oven insert



1 PCS

6.2724.010

Dust filter



1 PCS

6.2739.000


Wrench



1 PCS

6.2751.140

Safety shield

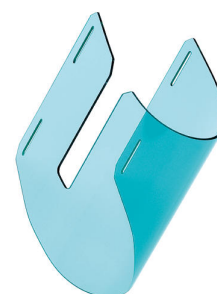

1 PCS

6.2816.070

穿刺針

カールフィッシャーオープンと共に使用。





オプションアクセサリ

Order no.	説明
2.851.0110	851 Titrando (1液型電極付き) クーロメーター(1液型電極付き)。 トレースレベル (水の絶対量10 µg~10 mg) の水分測定において、クーロメトリーは液体、固体、気体中での水分測定に理想的なメソッドです。更にクーロメトリーは絶対メソッドなので、試薬ファクター測定の必要がありません。 851 Titrandoにより、電量滴定を容易かつ迅速に行うことができます。 推奨測定範囲: 水の絶対量10 µg~200 mg。 OMNISソフトウェア、tiamoソフトウェアもしくはTouch Controlを適用。GMP/GLP基準およびFDA 基準21 CFR Part 11の要件を満たしています (必要な場合)。
2.852.0150	852 Titrando(1液型電極付き) クーロメーター(1液型電極付き、完全な容量滴定セルなし) トレースレベル (水の絶対量10 µg~10 mg) の水分測定において、クーロメトリーは液体、固体、気体中での水分測定に理想的なメソッドです。更にクーロメトリーは絶対メソッドなので、試薬ファクター測定の必要がありません。 クーロメトリーで推奨される測定範囲: 水の絶対量10 µg~200 mg。 852 Titrandoでは電量滴定の他に容量滴定によるカール フィッシャー滴定も可能です。 OMNISソフトウェア、tiamoソフトウェアもしくはTouch Controlを適用。GMP/GLP基準およびFDA 基準21 CFR Part 11の要件を満たしています (必要な場合)。



最新の滴定ラボのためのカール フィッシャー-Titrando

ハイエンド滴定装置には、カールフィッシャーモード(KFT)の他にもSETモードがあるので、事前に定義した終点へと滴定を行うことができます。

「iTrode ready」： 高解像度かつ絶縁処理の施された測定インターフェース（現在は新たにインテリジェント電極«iTrodes»のために追加されたデジタル電極インポート口も含む）により、pH測定を最高精度で実施することが可能です。


MSBコネクタが4つあるので、Dosinoを4つまで901 Titrandoに接続することができます。これらは滴定の他、サンプル、標準サンプル、可溶化剤などといった補助溶液の自動添加にも使用することができます。更にあらゆるLQHコマンドが使用できるので、使用済み試薬の吸引と新しい溶媒の添加も自動化させることが可能です。

OMNISソフトウェア、*tiamo*ソフトウェアもしくはTouch Controlを適用。GMP/GLP基準およびFDA 基準21 CFR Part 11の要件を満たしています（必要な場合）



800 Dosino 高機能電動ビュレットのドージングユニット用書き込み・読み取り用ハードウェア付き駆動部。固定されたケーブル付き（長さ150 cm）。



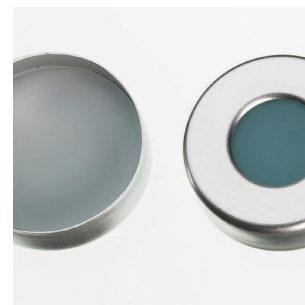

6.2419.000 バイアル 6 mL、1000 個

バイアル、6 mL までのサンプル用、セプタム 6.1448.050 に適合、
1000 個



6.3032.120 807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit、2 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型
データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り
付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.3032.150 807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit、5 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型
データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り
付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.3032.210 807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit、10 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.3032.220 807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit、20 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。




6.3032.250 807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit、50 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.5618.000 Measuring equipment for checking the temperature

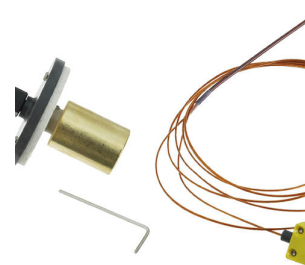

6.2811.000

Molecular sieve



6.2811.010

モレキュラーシープ (US)

モレキュラーシープ。ボトル à 250 g、気孔径: 0.3 nm。湿度インジケーターなし。Rancimat およびカルフィッシャー装置向け。

この製品は、米国に居住するすべてのユーザー向けです。この物質は、米国安全労働局（OSHA）の危険有害性周知基準（HCS）（29 CFR 1910.1200）により、危険物質に分類されています。

