



876 Manual Titrator plus

2.876.0110

手動滴定およびドージングのための結果算出機能を含む手動滴定装置 手動のドージング操作のためのマグネチックスターラー、プッシュボタンケーブルおよび交換ユニット20 mLを含みます。ドジマットプラスのUSBインターフェースには多数の機器を、しかもUSBハブだけではなく同時に複数なもの（キーボード、マウス、USBコンパクトプリンタもしくはUSB DIN A4プリンタ、メソッドおよびデータのバックアップのためのUSBメモリースティック）を接続することができます。オプションのUSB/RS232 アダプターボックス 6.2148.030により、ラボ天秤との接続やパソコンを使用しての制御が可能です。その両方のドージングモードにより、ドジマットプラスは以下のような用法が可能となります：

DOS (Dosing) – キーを押してドージング

このモードは特にインジケータによる手動の滴定の実施に適しています。ドージングされた容量から結果が自動的に算出され、結果レポートが印刷されます。

XDOS (Extended dosing) – 制御ドージング

- 容量指定のドージング: 容量と吐出速度を設定します。
- 時間指定のドージング: 容量と時間を設定します。
- 吐出速度によるドージング: 吐出速度と時間を設定します。

納品範囲 2.876.0110

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.876.0010	876 Dosimat plus

手動滴定およびドージングのためのユニバーサルディスペンサー。手動のドージング操作のためのプッシュボタンケーブルおよび交換ユニット 20 mLを含みます。ドジマツプラスのUSBインターフェースには多数の機器を、しかもUSBハブだけではなく同時に複数のもの(キーボード、マウス、USBコンパクトプリンタもしくはUSB DIN A4プリンタ、メソッドおよびデータのバックアップのためのUSBメモリースティック)を接続することができます。オプションのUSB/RS232 アダプターボックス 6.2148.030により、ラボ天秤との接続やパソコンを使用しての制御が可能です。



その両方のドージングモードにより、ドジマツプラスは以下のような用法が可能です。:

DOS (Dosing) – キーを押してドージング

このモードは特にインジケータによる手動の滴定の実施に適しています。ドージングされた容量から結果が自動的に算出され、結果レポートが印刷されます。

XDOS (Extended dosing) – 制御ドージング

- 容量指定のドージング: 容量と吐出速度を設定します。
- 時間指定のドージング: 容量と時間を設定します。
- 吐出速度によるドージング: 吐出速度と時間を設定します。

1 PCS	1.801.0010	801 Stirrer
-------	------------	-------------



1 PCS

6.1903.020

Stirring bar / 16 mm



1 PCS

6.1903.030


Stirring bar / 25 mm



1 PCS

6.2001.060

Support stand without support rod

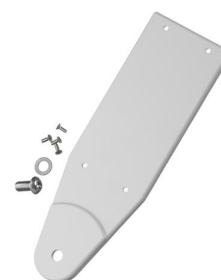

1 PCS

6.2013.010

Clamping ring



1 PCS

6.2016.070

Support rod / 400 mm



1 PCS

6.2021.020

Electrode holder



1 PCS

6.2107.100

ドージングハンドル

Eco Dosimat または Dosimat plus を用いた手動ドージングと手動滴定のためのハンドル



1 PCS

6.2151.100

Adapter USB MINI (OTG) - USB A



1 PCS

6.2621.070

5 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.130

Hexagon key 2 mm



1 PCS

6.2739.010

Wrench



1 PCS

6.3026.220

Exchange Unit 20 mL



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
2.805.0010	805 Dosimat	
6.2134.120	Cable RS-232 to Mettler AX	
6.2147.000	USBテンキーパッド Titrino plus、Dosimat plus、862 Compact Titrosampler、869 Compact Sample Changer、863 Compact Autosampler、および 899 Coulometer用のUSBテンキーパッド。コネクタが2つ付いたUSBハブを含む。	
6.2148.030	RS-232/USB Box 計量器、パソコン (tiBase ソフトウェア)、LIMS などの接続のため、Titrino plus を 2 つのRS-232インターフェースに拡張。ケーブル 6.2151.030 が必要です。	

6.2151.120 Cable USB MINI (OTG) - USB B, 1.8 m



6.2723.310 Protective cover for Titrino plus



6.3026.110 Exchange Unit 1 mL



6.3026.150 Exchange Unit 5 mL



6.3026.210

Exchange Unit 10 mL



6.3026.250

Exchange unit 50 mL



2.142.0100

感熱式プリンタ Custom Q3X

以下の装置のためのUSBインターフェース付きコンパクトプリンター

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (ケーブル6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



用紙幅 60 mm (40 字)。USBケーブル 6.2151.120 付属。
