



890 Titrando

2.890.0010

ハイエンド滴定装置（内蔵式ドージングデバイス付き）、容量滴定方式のカールフィッシャー滴定用。

4つのMSBコネクタ、絶縁処理の施された測定インターフェース、USBコネクタ。

900 Touch Control または OMNIS Software による操作

KF 滴定容器および KFT 用ダブルポイントリング電極、803 Ti Stand および交換ユニットなし。

納品範囲 2.890.0010

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

1.890.0010

890 Titrando



1 PCS

6.00346.100

容量滴定用ダブルPtリング電極

2つの溶融プラチナリングによって従来のプラチナピン電極 (6.0338.100) よりも頑丈で、かつ洗浄しやすくなったカール フィッシャー滴定用の指示電極。



1 PCS

6.1244.040

Set of seals



1 PCS

6.1403.040

KF Adsorber tube



1 PCS 6.1414.030 KF滴定容器上部 開口部5つ
カールフィッシャー容量滴定向け。



1 PCS 6.1415.220 Titration vessel / 20-90 mL



1 PCS 6.1415.250 Titration vessel / 50-150 mL



2 PCS 6.1448.010 Septum 12 mm, 5 pieces



2 PCS

6.1903.020

Stirring bar / 16 mm



2 PCS

6.1903.030

Stirring bar / 25 mm



1 PCS

6.2104.020

Electrode cable / 1 m / F



1 PCS

6.2412.000

Weighing boats



2 PCS

6.2730.010

Screw nipple



1 PCS

6.2730.020

Septum stopper



3 PCS

6.2730.030

Stopper



1 PCS

6.2739.010


Wrench



オプションアクセサリ

Order no.	説明
2.860.0010	860 KF Thermoprep 860 KFサーモプレップはカール フィッシャー水分測定におけるサンプルの加熱による前処理に使用します。多くの物質は、不溶性であったり、カールフィッシャー試薬に反応したり、物質そのものに含まれる水がごくゆっくりと、または高温下ではじめて気化したりするために、直接のカール フィッシャー滴定には適していません。ぴったりと気密されたサンプルバイアルびんを使用してサンプルをオープンに入れ、その後それぞれの容量または電量法カールフィッシャー水分計によって測定します。
6.2148.020	RS-232/USB box 
2.136.0100	Polytron PT 1300 D Polytron PT 1300 D - Metrohm バージョン OMNIS Software、tiamo™ または Touch Control による直接操作が可能なホモゲナイザー。 Polytron PT1300 D は制御装置と駆動システムから構成されています。駆動システムのカップリングシステムにより、余計なツールを使用することなくユニットを容易かつ迅速に交換することが可能です。固体のサンプルを難なくすり潰すことができます。この装置は粘性を有するサンプルを均一に混ぜ合わせるのにも大変適しています。

タイトランド用オペレーションユニット、USBサンプルプロセッサ、856導電率モジュール、867 pHモジュール、846 ドージングインターフェース。接触感度が高く、高解像度のカラーディスプレイ、メソッドへ直接アクセスするためのお気に入りメニューによる直管的な操作。インターネットに直接繋げるための内蔵式イーサネットインターフェース、USBプリンターまたはUSBメモリースティックと接続するためのUSBインターフェースを含む。ダイアログ言語: ドイツ語、英語、中国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、ポーランド語、イタリア語。

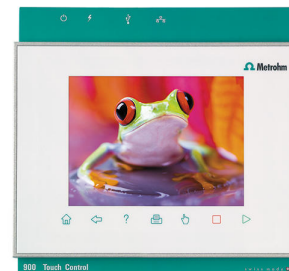

800 Dosino 高機能電動ビュレットのドージングユニット用書き込み・読み取り用ハードウェア付き駆動部。固定されたケーブル付き（長さ150 cm）。



Windows™コンピュータ上のOMNISソフトウェアをスタンドアローン操作することが可能になります。

特徴:

- ライセンスには、既に1つのOMNISデバイスライセンスが含まれています。
- メトローム・ライセンシングポータルにて、アクティブ化する必要があります。



6.3026.110

Exchange Unit 1 mL



6.3026.150

Exchange Unit 5 mL



6.3026.210

Exchange Unit 10 mL



6.3026.220 Exchange Unit 20 mL



6.3026.250 Exchange unit 50 mL



6.2811.000 Molecular sieve



6.2811.010 モレキュラーシーブ (US)

モレキュラーシーブ。ボトル à 250 g、気孔径: 0.3 nm。湿度インジケーターなし。Rancimat およびカルフィッシャー装置向け。

この製品は、米国に居住するすべてのユーザー向けです。この物質は、米国安全労働局（OSHA）の危険有害性周知基準（HCS）（29 CFR 1910.1200）により、危険物質に分類されています。

