



899 Coulometer（2液型電極付き）および USB 感熱式プリンター Neo's

2.899.1110

スターラーが組み込まれているので、899 Coulometer がラボの卓上で必要とするのはDIN A4の書類以下のスペースだけです。そのコンパクトなサイズに関わらず、クーロメーターの能力は変わりません。水分が少ない場合でも、トレースレベルまで精密に測定することができます。1液型の指示電極、発生電極、ならびに USB 感熱式プリンター Q3X が同梱されています。

推奨測定範囲: 水の絶対量10 µg～200 mg

クーロメトリーは液体、固体、気体のトレースレベルにおける水分測定に理想的なメソッドです。更にクーロメトリーは完全なメソッドなので、試薬ファクター測定の必要がありません。

納品範囲 2.899.1110

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

1.899.0010

899 Coulometer



1 PCS

6.0341.100

クーロメトリー用ダブルPtワイヤ電極

カール フィッシャー電量滴定に用いられる指示電極。



1 PCS

6.0345.100

発生電極（1液型電極付き）

カール フィッシャー電量滴定用の発生電極（1液型電極付き）、すり合わせ 29/22。この発生電極は、サンプルがアルコールによく溶解するアプリケーションのほとんどに適しています。



1 PCS

6.1403.030

KF adsorber tube for coulometer cell



1 PCS

6.1437.000

SGJ stopper SGJ 14



2 PCS

6.1448.020

Septum 16 mm, 5 pieces



1 PCS

6.1464.320

KF titration vessel / 80-250 mL / coulometric



1 PCS

6.1903.030

Stirring bar / 25 mm



1 PCS

6.2104.020

Electrode cable / 1 m / F



1 PCS

6.2104.120

Electrode cable / 1 m / H



1 PCS

6.2151.100

Adapter USB MINI (OTG) - USB A



1 PCS

6.2151.120

Cable USB MINI (OTG) - USB B, 1.8 m



1 PCS

6.2164.010

卓上電源アダプタ 100 - 240 V/24 V DC

卓上電源アダプタ 915 KF Ti-Touch、916 Ti-Touch、917 Coulometer
および全てのEco Titratoren / Eco Dosimat向け。



1 PCS

6.2701.040

GL 18 screw cap with hole



3 PCS

6.2713.000

PTFE スリーブ NS14

すり合わせ規格 14 による脂肪フリーのすり合わせ用。



1 PCS

6.2713.010

PTFE スリーブ NS29

すり合わせ規格 29 による脂肪フリーのすり合わせ用スリーブ。



1 PCS

6.2713.020

PTFE スリーブ NS19

すり合わせ規格 19 による脂肪フリーのすり合わせ用。



1 PCS

6.2723.310

Protective cover for Titrino plus



1 PCS

6.2738.000

Funnel



1 PCS

6.2811.000

Molecular sieve



2 PCS

6.2816.030

Needle with Luer connector



2 PCS

6.2816.090

Syringe 5 mL



4 PCS

6.9001.050

Custom Neos-N / Q3X 用の感熱紙

Custom Neos-N / Q3X 用の感熱紙 60 mm / 25 m。
新性能: 適切に保存した場合、25年の可読性。

1 ロール



1 PCS

6.2147.000

USBテンキーパッド

Titrimo plus、Dosimat plus、862 Compact Titrator、869 Compact Sample Changer、863 Compact Autosampler、および 899 Coulometer用のUSBテンキーパッド。コネクタが2つ付いたUSBハブを含む。



899 Coulometer および 917 Ti-Touch の電量測定セルのための滴定容器ホルダー



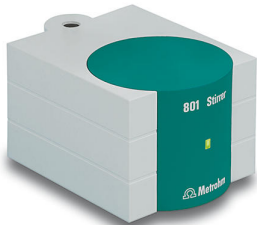
以下の装置のためのUSBインターフェース付きコンパクトプリンター

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter
- Eco Dosimat / Titrator



用紙幅 60 mm (40 字)。USBケーブル 6.2151.120 付属。

オプションアクセサリ

Order no.	説明	
2.860.0010	860 KF Thermoprep	
	860 KFサーモプレップはカール フィッシャー水分測定におけるサンプルの加熱による前処理に使用します。多くの物質は、不溶性であったり、カールフィッシャー試薬に反応したり、物質そのものに含まれる水がごくゆっくりと、またはは高温下ではじめて気化したりするために、直接のカール フィッシャー滴定には適していません。ぴったりと気密されたサンプルバイアルびんを使用してサンプルをオープンに入れ、その後それぞれの容量または電量法カールフィッシャー水分計によって測定します。	
2.885.0010	885 Compact Oven Sample Changer	
	885 コンパクトオープンサンプルチェンジャーはカールフィッシャー水分測定の加熱前処理に使用します。オープン内でサンプルは最高250℃まで加熱されます。その際に水が蒸発し、水は乾燥したキャリアガスによって分析の行われる滴定セルに運ばれます。	
2.801.0010	801 Stirrer	
2.803.0010	803 TI Stand with stirrer and pump	

6.2148.030 RS-232/USB Box

計量器、パソコン (tiBase ソフトウェア)、LIMS などの接続のため、Titrino plus を 2 つのRS-232インターフェースに拡張。ケーブル 6.2151.030 が必要です。



6.5406.000 Coulometric KF equipment, including generator electrode with diaphragm



6.5406.010 Coulometric KF equipment, including generator electrode without diaphragm



6.2164.500 Power Box for 899



6.2141.390

Remote cable 885 - 899



6.2103.140

Adapter black 2 mm plug / B socket 4 mm



6.2103.130

Adapter red 2 mm plug / 4 mm socket

