



Pharm Titrando

2.907.1020

907 タイトランドをベースとする Pharm Titrando は、一般的な医薬品の分析のための完璧なパッケージを提供します。内容は、タイトランドソフトウェア *tiamo*™ full の他、細部にまで説明がついたの測定メソッドおよび滴定のための付属品一式となっています。

納品範囲 2.907.1020

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.802.0010	802 Rod Stirrer for 727 Ti Stand



1 PCS

1.804.0010

804 Ti Stand without stand rod



2 PCS

1.854.0010

854 iConnect



1 PCS

1.907.0020

907 Titrand

以下のものを装備したインテリジェント電極iトロードの使用における
ハイエンド自動滴定装置

- 800 ドジーノ電動ビュレとを最大4つまで
- ダイナミック滴定 (DET)、等量滴下滴定 (MET)、終点設定滴定 (SET)、酵素滴定およびpH STAT滴定 (STAT)、カールフィッシャー水分測定 (KFT)
- イオン選択性電極による測定 (MEAS CONC)
- 監視およびリキッドハンドリングを含むドージング機能
- MSBコネクタ4つ
- 絶縁処理の施された測定インターフェース2つ
- USBコネクタ



低濃度イオンの水性溶媒（例えば飲料水、プロセス水など）におけるpH測定/滴定のためのセンサーデータのメモリーチップおよびPt1000温度センサーが内蔵されたインテリジェントな複合pH電極。この電極は、これらのサンプルにおいて非常に速い応答時間を有します。

固定グラウンドジョイントダイアフラムは汚れに対して耐性があります。ブリッジ内部液として $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol / L}$ を使用する場合、保存液中での保存が推奨されます。

ブリッジ内部液は、塩化物フリーの内部液（例えば、硝酸カリウム $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ (6.2310.010)) と交換することができます。使用される内部液にて保管します。

iTrodeはTitrand、Ti-Touch、または913/914 メーターにて使用することが可能です。



あらゆる酸/塩基の非水滴定のためのセンサーデータのメモリーチップが内蔵されたインテリジェントな複合pH電極。

ガラスメンブランは導電性の低い溶液のために最適化されており、フレキシブルなグラウンドジョイントダイアフラムにより、この電極は汚れの酷いサンプルにも適しています。電極は、非水性参照内部液（塩化リチウムまたはTEABr）と共に用いることができます。適切な参照内部液にて保管します。

iTrodeはTitrand、Ti-Touch、または913/914 メーターにて使用することが可能です。



参照電極として pH ガラスメンブランを備え、センサーデータ用のメモリーチップが内蔵された、インテリジェントな複合白金リング電極。このメンテナンスフリーの電極は、例えば以下のような、一定した pH 値での酸化還元滴定に適しています：

- ヨウ素滴定
- クロム酸滴定
- セリウム滴定
- 過マンガン酸塩滴定

この電極は蒸留水で保管されます。

iTrode は、Titrand か Ti-Touch、または 913/914 メーターにて使用できます。



1 PCS

6.1546.030

エキストラクターロッド

807 Dosing Units または シリンダーユニット OMNIS のピストン用。



2 PCS

6.1608.023

Amber glass bottle / 1000 mL / GL 45



1 PCS

6.1909.010

Stirring propeller / 87 mm


Propeller stirrer, length from lower edge of SGJ: 96 mm. For use with beakers with 722, 802 Rod Stirrer



1 PCS

6.2001.060

Support stand without support rod

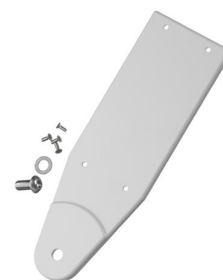

1 PCS

6.2013.010

Clamping ring



1 PCS

6.2016.070

Support rod / 400 mm



1 PCS

6.2021.020

Electrode holder



2 PCS

6.2043.005

Holding clip for bottles



1 PCS

6.2104.020

Electrode cable / 1 m / F



1 PCS

6.2151.000

Cable USB A – mini-DIN 8-pin



1 PCS

6.2307.230

Buffer solutions pH 4, 7 and 9



1 PCS

6.2308.050

Electrolyte 3 mol/L KCl (50 mL)



1 PCS

6.2320.000

TEABr 0.4 mol/L in ethylene glycol (250 mL)



1 PCS

6.2323.000

Storage solution



1 PCS

6.2621.070

5 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.130

Hexagon key 2 mm



807 Dosing Unit、20 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



インテリジェントドージングユニットのための書き込み/読み取りハードウェア付き駆動部。固定取付けされたケーブル付き (長さ1.5 m)。



参照電極としての pH ガラスメンブランを備え、センサーデータ用のメモリーチップが内蔵された、インテリジェントな複合銀リング電極。このメンテナンスフリーの電極は、例えば以下のような、一定した pH 値 (滴定試薬硝酸銀) での沈殿滴定に適しています:

- 塩化物、臭化物、ヨウ化物
- 硫化物
- 硫化水素
- メルカプタン
- シアン化物



この電極は蒸留水で保管されます。

用途に応じて適宜注文可能な、 Ag_2S でコーティングコーティングされた Ag Titrode の使用が推奨されます。

iTodes は、Titrand、Ti-Touch、または 913/914 メーターにて使用できます。

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2103.130	Adapter red 2 mm plug / 4 mm socket



6.2103.140	Adapter black 2 mm plug / B socket 4 mm
------------	---

