



916 Ti-Touch マグネチックスターラ付き

2.916.0020

「Reduce to the max」 – これが 916 Ti-Touchのコンセプトです。メトロームのコンパクトな滴定装置は、ルーチン分析のためのスタンドアローンシステムクラスにおける最高のものを提供します。

マグネチックスターラを内蔵した916 Ti-Touchは、全ての電位差滴定、すなわち滴定モード DET（変動滴下量当量点滴定）、MET（当量点滴定）、SET（指定された1つまたは2つの終点における滴定）、およびSTAT（酵素滴定およびpH-STAT滴定）、MAT（手動滴定）をサポートしています。

916 Ti-Touchは新たにFDA規制 21 CFRのPart 11を満たしています。これにより、監査の際もいつでも安心です。

810 Sample Processorにより916 Ti-Touchをオートメーションで拡張 - スループットを向上させ、精度と再現性を改善します。

納品範囲 2.916.0020

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

1.916.0020

916 Ti-Touch マグネチックスターラ付き

「Reduce to the max」 – これが 916 Ti-Touch のコンセプトです。メトロームのコンパクト滴定装置は、ルーチン分析のためのスタンドアローンシステムのクラスにおいて最高のものを提供します。

マグネチックスターラ内蔵の 916 Ti-Touch は全ての電位差滴定、すなわち滴定モード DET（変動滴下量当量点滴定）、MET（当量点滴定）、SET（指定された1つまたは2つの終点における滴定）、および STAT（酵素および pH-STAT 滴定）、MAT（手動滴定）をサポートしています。

916 Ti-Touch は、新たに FDA 規制 21 CFR の Part 11 を満たしています。これにより、監査の際もいつでも安心です。



1 PCS

6.1903.020

Stirring bar / 16 mm



1 PCS

6.1903.030

Stirring bar / 25 mm



1 PCS

6.2013.010

Clamping ring



1 PCS

6.2016.070

Support rod / 400 mm



1 PCS

6.2021.020

Electrode holder



2 PCS

6.2043.005

Holding clip for bottles



1 PCS

6.2164.010

卓上電源アダプタ 100 - 240 V/24 V DC

卓上電源アダプタ 915 KF Ti-Touch、916 Ti-Touch、917 Coulometer
および全てのEco Titratoren / Eco Dosimat向け。



1 PCS

6.2621.030

Hexagon key 4 mm



1 PCS

6.6066.000

USB flash drive for Ti-Touch



1 PCS

6.2723.300

Protective cover for 900 Touch Control



オプションアクセサリ

Order no.	説明
2.800.0020	800 Dosino 高機能電動ビュレットのドージングユニット用書き込み・読み取り用ハードウェア付き駆動部。固定されたケーブル付き（長さ 0.65 m）。 
6.3032.120	807 Dosing Unit 2 mL 807 Dosing Unit、2 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。 
6.3032.150	807 Dosing Unit 5 mL 807 Dosing Unit、5 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。 
6.3032.210	807 Dosing Unit 10 mL 807 Dosing Unit、10 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。 

6.3032.220 807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit、20 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.3032.250 807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit、50 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



2.810.0010 810 Sample Processor

916 Ti-Touch または 915 KF Ti-Touch を用いたルーチンサンプルの自動分析のためのサンプルプロセッサ。

少量から中量までの、連続した、カール フィッシャー滴定などの電位差滴定の自動処理のための、ワークステーションおよび内蔵式ダイヤフラムポンプ付きサンプルプロセッサ。内蔵式ポンプの他に、もう一つのポンプ（ダイヤフラムポンプもしくはペリスタリックポンプ）とリキッドハンドリングの作業のためのドージングデバイスを3つまで接続することができます。


様々な用途に対応するため、ラック、スターラー、滴定ヘッド、スイングヘッド、サンプル容器などはアプリケーションに合わせて別途ご注文ください。



2.801.0040 801 Stirrer with stand



6.2061.010 Bottle holder for Dosinos

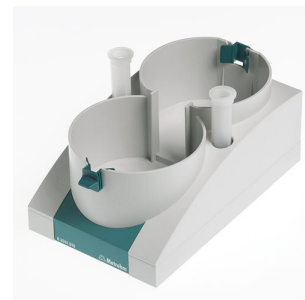

2.804.0040 804 Ti Stand with stand



2.802.0040 804 Ti Stand 用 802 Stirrer

プロペラスターラ 6.1909.010 を備えるロッドスターラ。



854 iConnect - インテリジェント電極 «iTrodes» 用の電極ケーブルと測定アンプ (ケーブル長さ 150 cm)。



あらゆる酸/塩基の非水滴定のためのセンサーデータのメモリーチップが内蔵されたインテリジェントな複合pH電極。ガラスメンブランは導電性の低い溶液のために最適化されており、フレキシブルなグラウンドジョイントダイアフラムにより、この電極は汚れの酷いサンプルにも適しています。電極は、非水性参照内部液（塩化リチウムまたはTEABr）と共に用いることができます。適切な参照内部液にて保管します。

iTrodeはTitrand、Ti-Touch、または913/914 メーターにて使用することが可能です。



センサーデータのメモリーチップが内蔵されたインテリジェントな複合pH電極。この電極は、水性酸/塩基滴定に適しています。

固定グラウンドジョイントダイアフラムは汚れに対して耐性があります。参照内部液: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol / L}$ 、保存溶液にて保管します。iTrodeはTitrand、Ti-Touch、または913/914 メーターにて使用することが可能です。



参照電極として pH ガラスメンブランを備え、センサーデータ用のメモリーチップが内蔵された、インテリジェントな複合白金リング電極。このメンテナンスフリーの電極は、例えば以下のような、一定した pH 値での酸化還元滴定に適しています:

- ヨウ素滴定
- クロム酸滴定
- セリウム滴定
- 過マンガン酸塩滴定

この電極は蒸留水で保管されます。

iTrode は、Titrande か Ti-Touch、または 913/914 メーターにて使用できます。



センサーデータのメモリーチップおよびPt1000温度センサーが内蔵されたインテリジェントな複合pH電極。この電極は、特に以下の用途に適しています:

- 困難なサンプル、粘性のあるサンプル、またはアルカリ性のサンプルにおけるpH測定および滴定
- 高温時
- 長期測定

固定グラウンドジョイントダイアフラムは汚れに対して耐性があります。

参照内部液: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 、保存液で保存。

代替: $T > 80^\circ \text{C}$ での測定用参照内部液: イドロライト、イドロライトで保管。

iTrodeはTitrande、Ti-Touch、またはは913/914 メーターにて使用することが可能です。



6.3026.110 Exchange Unit 1 mL



6.3026.150 Exchange Unit 5 mL



6.3026.210 Exchange Unit 10 mL



6.3026.220 Exchange Unit 20 mL





2.142.0100 感熱式プリンタ Custom Q3X

以下の装置のためのUSBインターフェース付きコンパクトプリンター

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (ケーブル6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



用紙幅 60 mm (40 字)。USBケーブル 6.2151.120 付属。

6.2168.000 ミニUSBアダプタケーブル、25 cm

854 iConnect を 867 pH Module、901～907 Titrande および 916 Ti-Touchに接続するためのミニUSBアダプタケーブル、25 cm。アダプタケーブルはストレーンリリーフとして装置に挿入された状態が保たれ、854 iConnect はアダプタケーブルにのみ着脱されます。



6.2103.130 Adapter red 2 mm plug / 4 mm socket



6.2103.140 Adapter black 2 mm plug / B socket 4 mm



6.2107.120 Manual Dosing Controller - Ti-Touch



2.143.0200 ドットインパクトプリンター TX-900MH

