



917 Coulometer（1液型電極付き）および 860 KF Thermoprep

2.917.1110

917 Coulometer は、カールフィッシャー電量滴定による水分測定のためのコンパクトな滴定装置です。「Reduced to the max (最大限に節減)」 - 917 Coulometer には試薬を迅速に取り換えるための操作モジュール、スターラー、ポンプが組み込まれています。この装置によりラボの卓上スペースを大きく節約できます。

917 Coulometer は、新たに FDA 規制 21 CFR の Part 11 も満たしています。これにより、監査の際もいつでも安心です。

860 KF Thermoprep は加熱によるサンプル前処理に使用します。多くの物質は、不溶性であったり、カールフィッシャー試薬に反応したり、物質そのものに含まれる水がごくゆっくりと、または高温下ではじめて気化したりするために、直接のカール フィッシャー滴定には適していません。サンプルは、密閉されたサンプル容器に入ってオープンに入れられ、917 Coulometer によってその水分量が測定されます。

納品範囲 2.917.1110

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

917 Coulometerは、カールフィッシャー電量滴定による水分測定のためのコンパクトな滴定装置です。「Reduced to the max (最大限に節減)」 - 917 Coulometerには試薬を迅速に取り換えるための操作モジュール、スターラー、ポンプが組み込まれています。この装置によりラボの卓上スペースを大きく節約できます。



推奨される測定範囲は、水分の絶対量が 10 µg~200 mg です。クーロメトリーは、液体、固体、気体での微量範囲の水分測定に理想的なメソッドです。更にクーロメトリーは完全なメソッドなので、試薬ファクター測定の必要がありません。

860 KFサーモプレップはカール フィッシャー水分測定におけるサンプルの加熱による前処理に使用します。多くの物質は、不溶性であったり、カールフィッシャー試薬に反応したり、物質そのものに含まれる水がごくゆっくりと、またはは高温下ではじめて気化したりするために、直接のカール フィッシャー滴定には適していません。ぴったりと気密されたサンプルバイアルびんを使用してサンプルをオープンに入れ、その後それぞれの容量または電量法カールフィッシャー水分計によって測定します。



カール フィッシャー電量滴定に用いられる指示電極。



カール フィッシャー電量滴定用の発生電極 (1液型電極付き)、すり合わせ 29/22。この発生電極は、サンプルがアルコールによく溶解するアプリケーションのほとんどに適しています。



1 PCS

6.1403.030

KF adsorber tube for coulometer cell



1 PCS

6.1437.000

SGJ stopper SGJ 14



1 PCS

6.1439.010

KF- 給液/排液チューブ

クーロメーターセル用の KF 給液/排液チューブ、ねじ接合 M8
6.1811.010 付き。



2 PCS

6.1446.040

Threaded stopper / M6



1 PCS

6.1446.090

Stopper / B-14/15 / M8



2 PCS

6.1448.020


Septum 16 mm, 5 pieces



1 PCS

6.1448.057

Aluminum septum caps / 100 pieces

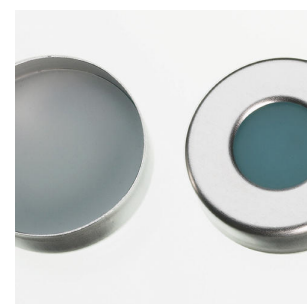

1 PCS

6.1465.320

KF titration vessel with 2 lateral openings / 80-250 mL / coulometric



2 PCS

6.1602.105

Bottle attachment / GL 45 / green



2 PCS

6.1602.145

Drying flask cap



1 PCS

6.1608.023

Amber glass bottle / 1000 mL / GL 45



1 PCS

6.1608.030

Round glass bottle / 1000 mL / GL 45



2 PCS

6.1608.050

Drying bottle / 100 mL / GL 45



1 PCS

6.1609.010

Adsorber tube with tubing nipple



1 PCS

6.1623.000

ボトルキャップのオーバーフロー防止

廃棄物ボトル用ボトルキャップのオーバーフロー防止、吸引ポンプ使用時、廃棄物ボトルのオーバーフローを防ぎます



1 PCS

6.1801.120

PVC tubing / 4 mm / 6 mm / 2 m



1 PCS

6.1805.010

FEP tubing / M6 / 13 cm



2 PCS

6.1805.080

FEP tubing / M6 / 25 cm



1 PCS

6.1805.100

FEP tubing / M6 / 40 cm



2 PCS

6.1805.200

PTFE tubing / M8 / 0.5 m



2 PCS

6.1808.050

Tubing adapter olive / M8 outer



1 PCS

6.1819.030

Tube



1 PCS

6.1819.050

Tube



2 PCS

6.1821.040

Filter tube



1 PCS

6.1830.030

加熱チューブ

860 KF Thermoprep、885 Compact Oven Sample Processor、874 USB Oven Sample Processor に連結するスレッド M6 を有する加熱チューブ。



1 PCS

6.1903.030

Stirring bar / 25 mm



1 PCS

6.2023.020

Clip for SGJ 14/15



1 PCS

6.2047.040

滴定容器ホルダー 899/917

899 Coulometer および 917 Ti-Touch の電量測定セルのための滴定容器ホルダー



1 PCS

6.2048.030

Guidance rod



1 PCS

6.2049.040

Needle holder with Luer lock



1 PCS

6.2060.010

Cable holder



1 PCS

6.2063.010

Sample holder for 6.2419.007 Sample vials (6 mL)



1 PCS 6.2104.020 Electrode cable / 1 m / F



1 PCS 6.2104.120 Electrode cable / 1 m / H



1 PCS 6.2164.010 卓上電源アダプタ 100 - 240 V/24 V DC

卓上電源アダプタ 915 KF Ti-Touch、916 Ti-Touch、917 Coulometer
および全てのEco Titratoren / Eco Dosimat向け。



1 PCS 6.2419.007 バイアル 6 mL、100 個

バイアル、6 mL までのサンプル用、セプタム 6.1448.057 に適合、
100 個



1 PCS

6.2621.110

Crimping tongs



1 PCS

6.2621.120

Hexagon key 1.5 mm



1 PCS

6.2627.000

Oven insert



2 PCS

6.2701.040

GL 18 screw cap with hole



3 PCS 6.2713.000 PTFE スリーブ NS14

すり合わせ規格 14 による脂肪フリーのすり合わせ用。



1 PCS 6.2713.010 PTFE スリーブ NS29

すり合わせ規格 29 による脂肪フリーのすり合わせ用スリーブ。



1 PCS 6.2713.020 PTFE スリーブ NS19

すり合わせ規格 19 による脂肪フリーのすり合わせ用。



1 PCS 6.2724.010 Dust filter



1 PCS

6.2738.000

Funnel



1 PCS

6.2739.000

Wrench



2 PCS

6.2816.030

Needle with Luer connector



1 PCS

6.2816.070

穿刺針

カールフィッシャーオープンと共に使用。



1 PCS

6.2816.080

Outlet needle



2 PCS

6.2816.090

Syringe 5 mL



1 PCS

6.6066.000

USB flash drive for Ti-Touch



1 PCS

6.1808.040

Thread adapter M6 outer / M8 inner





オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2723.300	Protective cover for 900 Touch Control



2.142.0100 感熱式プリンタ Custom Q3X

以下の装置のためのUSBインターフェース付きコンパクトプリンター

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (ケーブル6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



用紙幅 60 mm (40 字)。USBケーブル 6.2151.120 付属。

2.143.0200 ドットインパクトプリンター TX-900MH



6.2811.000

Molecular sieve



6.2811.010

モレキュラーシープ (US)

モレキュラーシープ。ボトル à 250 g、気孔径: 0.3 nm。湿度インジケーターなし。Rancimat およびカルフィッシャー装置向け。

この製品は、米国に居住するすべてのユーザー向けです。この物質は、米国安全労働局（OSHA）の危険有害性周知基準（HCS）（29 CFR 1910.1200）により、危険物質に分類されています。

