



MIRA DS Advanced (米国のみ)

2.926.0025

Metrohm Instant Raman Analyzer (MIRA) DS は、薬物、爆発物 出発物質、有害物質などの違法物質の迅速な非破壊測定に使用される、頑丈かつ高性能なハンドヘルドラマンスペクトロメーターです。MIRA DS は、小型な装置ながら極めて堅牢で、弊社独自の軌道走査スキャン (ORS) 技術を搭載した高効率分光器を特長としています。

Basic package には、校正標準、ボトルまたはバッグにおける分析または直接分析のためのユニバーサルアタッチメント、直角アタッチメントが含まれ、表面および（または）バッグ内のサンプルの処理に最適です。クラス 3B 操作。MIRA DS は、Metrohm のハンドヘルドラマンライブラリに対応しています。

納品範囲 2.926.0025

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

6.021.08010

ケーブルUSB mini - USB A、1.5 m



1 PCS

6.02707.020

Mira DSのための頑丈なキャリーケース

Mira DSおよび付属品のための頑丈なキャリーケース



1 PCS

6.06071.020

Mira Cal DS USBスティック

操作の単純なこのソフトウェアは、レポートをダウンロードしてプリントアウトし、データを分析し、スペクトルライブラリを作成し、データを把握し、そしてユーザーを管理することを主な目的として開発されました。



1 PCS

6.07501.010

ASTM 校正規格

MIRA/MISA システムの軸の波数をキャリブレーションするための 50:50 (v:v) トルエン/アセトニトリル ASTM 標準。クラス3 B 操作。



1 PCS

6.07506.000 直角アタッチメント

ライトアングルアタッチメントは、ユーザーが物質を表面に置き、Miraをその横に置いて、ライトアングルチップでその物質をカバーすることによって、データを収集できるように設計されています。パトリールカーのボンネット上の小袋に最適です。テスト中に多くの変数を削除します。クラス3B操作。



1 PCS

6.07506.010 ユニバーサルアタッチメント


ユニバーサルアタッチメントは、3つの異なるポジションでユニバーサルに使用できる先端部です。ポジション3は直接的な接触に用いられます。ポジション2は薄いビニール袋に用いられ、フォーカスポイントはアダプターの端から約 1.0 mm 離れています。ポジション1はボトルによる合焦に用いられ、フォーカスポイントは金属先端部から約 8 mm 離れています。クラス 3B での稼働。



1 PCS

6.07507.000 Miraサンプリングブラックアウト布

日光条件でサンプリングするための光学式ブラックアウト布。

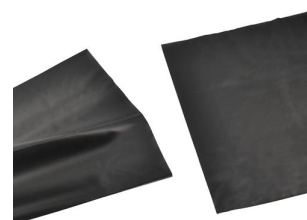

1 PCS

6.2133.020 リチウムバッテリーAA 1.5V/ 2900 mAh

1.5 V リチウム単三電池、4個





モニターおよびレンズ用クリーニングクロス。



Mira製品を使用する際、要求されるレーザー安全対策を遵守しなければなりません。レーザーの励起波長 785 nm 用のこの保護メガネにより、EN 207 に準ずる保護を提供します (メガネ着用者にも適しています)。軽量設計ならびに心地良いデザインのおかげで、このレーザー保護メガネを使用して長時間問題なく作業に取り組むことができます。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.02707.400	Mira Pおよび付属品のためのキャリーケース Mira Pおよび全ての付属品のための保護ケース。
	
6.07502.000	バイアルホルダー Mira M-3/P/DS 用バイアルホルダーアタッチメント。15 x 26 mmのサイズのガラスバイアルに対応。
	
	錠剤ホルダー Mira M-3/P/DS用錠剤ホルダーアタッチメントは、様々なサイズおよび形の錠剤の分析に使用されます。
	
6.07505.000	アタッチメントレンズ (LWD) Mira M-3/P/DS Advanced Packageには、焦点距離が7.6 mmの遠距離用アタッチメントレンズ (LWD) が付属しています。クラス3B操作。
	

6.07505.010 アタッチメントレンズ (SWD)

Mira M-3/P/DS Advanced Packageには、焦点距離が1.0 mmの近距離用アタッチメントレンズ (SWD) が付属しています。クラス3B操作。



6.07505.020 アタッチメントレンズ(XLWD)

焦点距離18 mmのMira M-3/P/DS Advanced Packageのための超遠距離用アタッチメントレンズ (XLWD)。クラス3Bで稼働。



6.07506.020 間隔アタッチメント

間隔アタッチメントを用いることにより、ユーザーは、0.25～1.5メートル離れた場所から物質のスペクトルを算出することができます。このアタッチメントは、およそ 200 リットルの容積を有する大型容器または樽の内容物の測定、あるいは室内の逆の端にある容器を入口から検査するのに最適です。



6.07506.030 プローブ

コンタクトボールプローブアタッチメントは、ユーザーが適切な焦点合わせの心配をしなくてもサンプルからデータを収集できるように設計されています。ただサンプルに接触するか、プローブを浸してデータを取得してください。 ステンレススチール構造なので簡単に清掃できます。クラス3B操作。



6.07506.040 SERS アタッチメント

SERS アタッチメントにより、ユーザーは、P-SERS テストストリップに塗布された布地の SERS スペクトルを非常に簡単に測定できます。P-SERS テストストリップにサンプルを塗布した後、ユーザーはこれを分析のために SERS アタッチメントのスリットに差し込むだけです。



6.07506.050 プローブ用の保護カバー

使い捨ての保護カバーは非常に薄いLDPE製で、プローブが複数の容器で用いられる際の交差汚染を防ぎます。数量: 250個。



6.07506.060 Intelligent Universal Attachment (iUA)

iUA は、インテリジェントな 3 ポジションによる MIRA 用集光光学系付属品です。iUA ではユニバーサルアタッチメントの柔軟性と MIRA SmartTip アタッチメントのインテリジェント機能が組み合わされています。どのポジションでも各ポジションの理想的な目的が表示されます(表面、バッグ、ボトル)。



6.07506.100 P-SERS銀基板 (Ag)、50個

P-SERS銀基板 (印刷SERS基板)。基板は、直接SERSアタッチメントにはめ込み、最適な信号検出が可能となるよう成形されています。P-SERS銀基板で傑出した結果を示す、可能な対象検体には、違法ドラッグ、医薬品、染料、アミンなどが含まれます。50個のパッケージでご購入いただけます。



P-SERS金基板 (印刷SERS基板)。基板は、直接SERSアタッチメントにはめ込み、最適な信号検出が可能となるよう成形されています。P-SERS金基板で検出しやすい、可能な対象検体には、殺虫剤、医薬品、チオールなどが含まれます。50個ごとのパッケージでご購入いただけます。



P-SERS銀基板 (印刷SERS基板)。基板は、直接SERSアタッチメントにはめ込み、最適な信号検出が可能となるよう成形されています。P-SERS銀基板で検出した結果を示す、可能な対象検体には、違法ドラッグ、医薬品、染料、アミンなどが含まれます。25個のパッケージでご購入いただけます。



P-SERS金基板 (印刷SERS基板)。基板は、直接SERSアタッチメントにはめ込み、最適な信号検出が可能となるよう成形されています。P-SERS金基板で検出しやすい、可能な対象検体には、殺虫剤、医薬品、チオールなどが含まれます。25個ごとのパッケージでご購入いただけます。



IDキット、違法物質

この違法物質のためのIDキットには、Mira/Misa ユーザーが、シンプルな路上サンプルにオピオイドや他の違法ドラッグが含まれているかを分析し、判定するのに必要な全てのコンポーネントが含まれています。このキットには、使い捨てのへら、ピペット、溶媒入りの小さなボトル、およびP-SERS 銀ストリップが2個含まれています。ユーザーは、溶媒の入ったボトルに不明のサンプルを少量入れ、ボトルにP-SERS ストリップを浸すか、または同梱のピペットを用いてサンプルをストリップに塗布するだけです。強い蛍光性を有する路上サンプルでも、IDキットで、微量範囲でのオピオイドの検出および同定が可能です。



MIRA DS Field Carry Pouch は、現場での MIRA の持ち運びに使用できる、側面にパッドが付いた便利なポーチです。内部には MIRA、AA 電池 4 個、直角アタッチメント、iUA、校正標準、数個の ID キットを収納できるスペースが備わっています。

Field Carry Pouch は、最近使用されているミリタリーポーチやバックパックシステムのいずれにも取り付けすることができます。



MIRA PowerPack 充電可能外部バッテリーは MIRA 装置用に設計されています。使用可能時間を8時間以上に延長することができます。



Mira PowerPack 用の USB Type-C タイプソケット付きの充電装置。



MIRA (Metrohm Instant Raman Analyzer) 違法物質ライブラリには、薬物、TIC、TIM、前駆物質、一般化学薬品が含まれています。



6.6071.640

HazMasterG3 ソフトウェア HazMasterG3®

HazMasterG3®は、167000以上の化学物質 (有毒産業用化学物質 (TIC)、有毒産業用物質 (TIM)、化学兵器 (CWA)、出発原料、ブランド名など) に関する不可欠な洞察と重要な指針を提供します。



6.7502.010

MIRA 用ガラスバイアルびん、144 個

MIRA システム用ガラスバイアルびん。15 mm x 26 mm。

納品範囲にはガラスバイアルびん 144 個が含まれています。



6.7560.200

MIRA PowerPack Kit

MIRA PowerPack Kit には、MIRA PowerPack 充電可能外部バッテリー、USB-C ソケット付き充電器、USB-C プラグ付き充電ケーブルが含まれています。MIRA システム用に設計されており、使用可能時間を8時間以上に延長することができます。

