



NIRS DS2500 Petro Analyzer

2.929.2000

ラボおよび直接的な生産環境における燃料の品質管理用の堅牢な近赤外分光法。

NIRS DS2500 Petro Analyzerは、燃料の品質管理およびルーチン分析に実績のあるフレキシブルなソリューションであり、規格ASTM D6122に適合しています。NIRS DS2500 Polymer Analyzerは粉塵、湿気、振動の影響を受けず、ラボ環境でも、直接的な生産環境でも使用することができます。

NIRS DS2500 Petro Analyzerは400 ~ 2500 nmのスペクトル範囲全体をカバーし、1分以内で正確な結果を提供します。NIRS DS2500 Petro Analyzerは、ガソリン、ディーゼル、灯油のプリキャリブレーションにより直ちに稼働可能状態となり、簡単な操作により日常的な作業においてユーザーをサポートします。サンプル量が多い場合、Metrohmサンプルロボットと組み合わせられたフローセルの導入によって、生産性を著しく向上させることができます。

納品範囲 2.929.2000

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----



直径8 mmのガラス製使い捨てバイアル用インテリジェントホルダー




透過した液体を分析するための光学的距離 8 mm のガラス製 (ホウケイ酸塩) 使い捨てバイアル 100 個。使い捨てバイアルには閉じ蓋 (個数 = 100) が付属されています。

次の製品と互換性があります:

- ホルダー OMNIS NIR、バイアル、8 mm (6.07401.070)
- 使い捨てバイアル 8 mm 用の DS2500 ホルダー (6.7492.020)



プリキャリブレーションのためのパウチャー。石油プリキャリブレーションのご注文にお使いいただけます (ディーゼル、ガソリン、灯油)

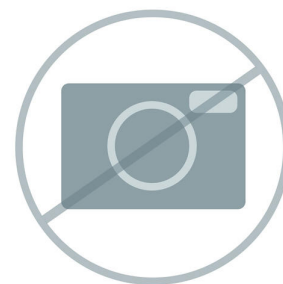

高温時の分析向けオプションとしての保護を提供するDS2500 Liquid Analyzer ヒートプロテクション。



Vision Air - 汎用性に優れた分光法ソフトウェア。

Vision Air Complete は、規制環境下での使用のための、操作の容易な最新のソフトウェアソリューションです。

Vision Air の利点の概要:

- 調整済みのユーザーインターフェースを伴う個別のソフトウェアアプリケーションにより、直観的かつ容易な操作が保証されます。
- 作業手順の容易な作成およびメンテナンス
- 安全かつ容易なデータ管理のための SQL データベース

バージョン Vision Air Complete (66072208) には、可視近赤外分光法を用いた品質管理のための全てのアプリケーションが含まれています:

- 装置管理およびデータ管理のためのアプリケーション
- メソッド開発のためのアプリケーション
- ルーチン分析のためのアプリケーション

その他の Vision Air Complete ソリューション:

- 66072207 (Vision Air Network Complete)
- 66072209 (Vision Air Pharma Complete)
- 66072210 (Vision Air Pharma Network Complete)



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.7430.050	NIRS DS2500 のためのスペアランプ NIRS DS2500 Analyzer のためのスペアランプ (12.0 V および 35 W)	
6.7494.000	DS2500 Liquid 波長基準 DS2500 Liquid Analyzerのための透過波長基準	