


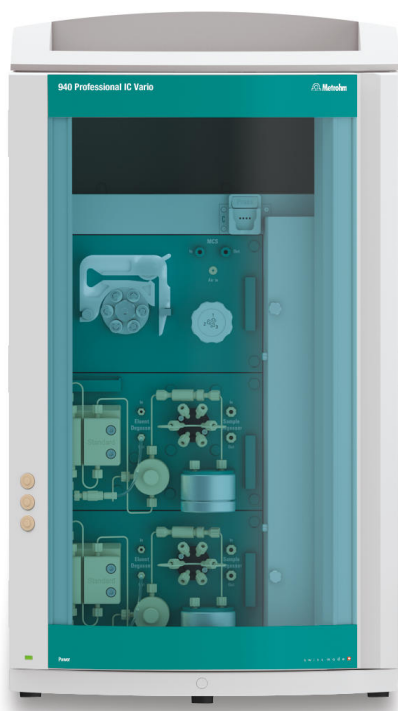

940 Professional IC Vario TWO/SeS/PP/MB

2.940.2580

940 Professional IC Vario TWO/SeS/PP は連続サプレッション(1チャンネル)とサプレッサー再生のためのペリスタリックポンプを備えた2チャンネルタイプのIC 装置です。この装置は任意の分離メソッドおよび検出メソッドによって使用することができます。

典型的な使用領域:

- 陰イオンおよび陽イオンの並行測定のための標準装置
- 陰イオンおよび陽イオンのための微量分析
- 陰イオンおよび陽イオンのためのオンラインモニタリング
- マイクロボア (2mm) アプリケーション向けに最適化、カップリング技術 (IC-MS または IC-ICP/MS)に最適


MagIC Net 4.1 以上に対応

納品範囲 2.940.2580

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

6.1826.420

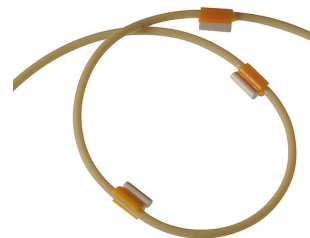PharMed® pump tubing (orange/yellow), 3-
stopper

1 PCS

6.2744.034

カップリング チューブニップル/UNF 10/32、2個

圧力調整ネジとポンプチューブを接続。2個。ペリスタリックポンプ付
きIC装置用。



1 PCS

6.2744.180

Pump tubing connector with security lock and
filter

1 PCS

6.5000.000

Accessory kit: Vario/Flex Basic



2 PCS

6.5000.010

Accessory kit: Vario/Flex ONE





1 PCS

6.5000.020

Accessory kit: Vario/Flex SeS



オプションアクセサリ

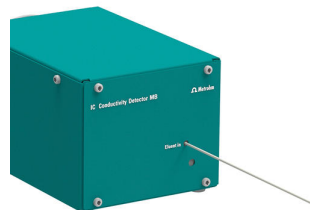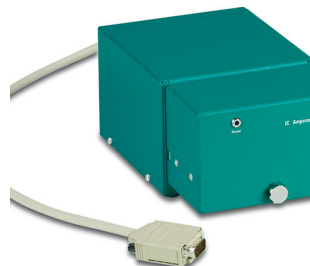Order no.	説明	
2.850.9020	IC Conductivity Detector MB	
2.850.9110	IC Amperometric Detector インテリジェントIC装置のためのコンパクトかつインテリジェントなアンペロメトリック検出器。4つの測定モード（DC、PAD、flexIPAD、CV）による優れた選択性、卓越した信号・騒音比、非常に高速の測定待機機能が高精度の測定できます。	
2.800.0010	800 Dosino 800 Dosino 高機能電動ビュレットのドージングユニット用書き込み・読み取り用ハードウェア付き駆動部。固定されたケーブル付き（長さ150 cm）。	
2.858.0010	858 Professional Sample Processor 858 プロフェッショナルサンプルプロセッサは、500 μ Lから500 mLまでのサンプルを処理します。サンプルは850 プロフェッショナル IC システム のペリスタリックポンプまたは800 ドジーノ電動ビュレットを使用することによって転送されます。	

2.858.0020 858 Professional Sample Processor – Pump

858 プロフェッショナルサンプルプロセッサ - ポンプは、500 µLから500 mLまでのサンプルを処理します。サンプルは内蔵式双方向性の2チャンネルのペリスタリックポンプまたは800 ドジーノ電動ビュレットによって転送されます。



2.863.0010 863 Compact IC Autosampler

863 コンパクトICオートサンプラ はルーチン分析における理想的なアシスタントです。本製品によってメトローム製品の様々なイオンクロマトグラフを自動化することができます。



2.889.0010 889 IC Sample Center

889 IC サンプルセンタは多くのサンプルを扱うことのできる丈夫なオートサンプラーであり、最新分析ラボの難度の高い作業に最適です。このサンプラーは高精度のサンプル注入のために、xyz式で分解能の高い注入制御により作業を行います。二本針システムにより、容器のキャップと隔壁を貫通させることが可能です。PEEK注入バルブが889 IC サンプルセンタのオートメーションシステムを補完します。使用できるサンプルがごく少量である場合に最適なソリューションです。



2.889.0020 889 IC Sample Center – cool

889 IC サンプルセンタ – cool は、使用できるサンプルがごく少量である場合の適切なオートメーションのソリューションです。889 IC サンプルセンタに対して本製品は更に冷却機能を有しているので、生化学的に重要な、または熱化学的に不安定なサンプルに最適なサンプルチェンジャーです。



889 IC Sample Center Basic は、多くのサンプルを扱うことのできる頑丈なオートサンプラーであり、最新分析ラボの難度の高い作業に最適です。x-y-z原則にもとづいて作動します。二本針システムにより、容器のキャップと隔壁に貫通させることが可能です。

メトロームのインテリジェント可変注入テクニックなどを使用して、IC システム内のペリスタリックポンプまたは 800 Dosino でサンプルの搬送を行ないます。

MagIC Net 4.1 以上に対応。



889 IC Sample Center Basic – cool は、使用できるサンプルがごく少量である場合の適切なオートメーションのソリューションです。889 IC Sample Center Basic に対して本製品は更に冷却機能を有しているので、生化学的に重要な、または熱化学的に不安定なサンプルに理想的なサンプルチェンジャーです。

メトロームのインテリジェント可変注入テクニックなどを使用して、IC システム内のペリスタリックポンプまたは 800 Dosino でサンプルの搬送を行ないます。

MagIC Net 4.1 以上に対応。



919 ICオートサンプラプラスは、中程度のサンプル量におけるラボの要求を満たします。本製品によってメトローム製品の様々なイオンクロマトグラフを自動化することができます。



941 溶離液生成モジュールにより、溶離液の自動製造が可能となります。このモジュールは、手動で介入しなくても連続して処理することを可能にし、安定した保持時間を保証します。このモジュールはあらゆるメトロームのICデバイスと接続させることができ、MagIC Netによって制御されます。



2.943.0110 943 Professional Reactor Vario

943 プロフェッショナル Reactor Varioは、特にプレカラム誘導体化およびポストカラム誘導体化のために開発された加熱できるリアクターです。この製品は、頑丈さ、高速度加熱、150℃までの反応を実行できることを特長としています。



2.943.0210 943 Professional Thermostat Vario

943 プロフェッショナル Thermostat Varioは、最長150 mmまでの2つ以下のカラムのためのスタンドアローンカラムオープンです。この製品は、高速度加熱、80℃までの温度下において2つの分離カラムを一緒に稼働できることを特長としています。



2.945.0020 945 Professional Detector Vario – Amperometry

ICアンペロメトリック検出器が装備されたインテリジェントスタンドアローン検出器です。4つの測定モードによる優れた選択性が特長です：DC、PAD、flexIPAD、CV。抜群の信号対雑音比および非常に高速の測定可能準備状態により高精度の測定が保証されます。インテリジェントIC装置と、または独立した検出器として使用できます。




2.947.0010 947 Professional UV/VIS Detector Vario SW

インテリジェントな単一波長検出器 947 Professional UV/VIS Detector Vario SW は、紫外線や可視光線範囲でアクティブな物質を安全かつ確実に検出することができます。波長を一つ選択することができます。



2.947.0020 947 Professional UV/VIS Detector Vario MW

インテリジェントな複数波長検出器 947 Professional UV/VIS Detector Vario MW は、紫外線や可視光線範囲でアクティブな物質を安全かつ確実に検出することができます。最高8つまでの波長を自由に選択することができます。検出はダイオードアレイによって行われます。

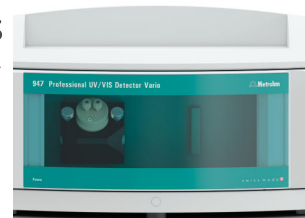

6.2061.130 安全ボトルホルダー Professional IC 装置

Professional IC 装置のための追加のボトルホルダー。



6.2755.000 Tubing cartridge



6.2832.000 MSM Rotor A



6.2842.000 MSM-HC Rotor A



6.2842.200 MSM-HC Rotor C



6.2844.000 MSM-LC Rotor A




6.2842.020 アダプタスリーブ、MSM

アダプタスリーブを用いれば、MSM Rotor A と MSM-LC Rotor A のいずれも、ローターハウジングに取り付けることができます。



メトロームサプレッサーモジュール (MSM) の自動再生のためのドジーノ設置のための付属品セット。

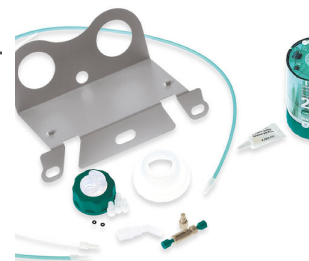

2.858.0030 858 Professional Sample Processor – Pump – Injector

858 プロフェッショナルサンプルプロセッサ：ポンプ – インジェクター は、500 μ Lから500 mLまでのサンプルを処理します。サンプルは内蔵式双方向性の2チャンネルのペリスタリックポンプもしくは800 ドジーノ電動ビュレットによって転送されます。更にサンプル前処理では、六方向注入バルブの使用が可能です。



6.6059.422 MagIC Net 4.2 Professional: 1ライセンス



6.6059.423 MagIC Net 4.2 Multi: 3 ライセンス



2.948.0010

948 Continuous IC Module, CEP

948 Continuous IC Module を使って水酸化溶離液を自動で生成できます。グラジエントだけでなく、アイソクラティック溶離液の製造も可能です。

948 Continuous IC Module, CEP は以下のコンポーネントで構成されています:

- 948 Continuous IC Module
- Eluent Producer Cartridge (EPC、6.02850.200)
- 連続陰イオントラップ (CT、6.02850.100)
- 高圧デガッサー (H-DEG、6.02850.000)

メソッド例ハンドブック 948 Continuous IC Module に従う。



6.2842.100

MSM-HC Rotor A、水酸化物

