



Ag Titrode

6.00430.100

参照電極としての、pHガラスメンブランを含む複合銀リング電極。

このメンテナンスフリーの電極は、例えば以下のような一定したpH値（滴定試薬硝酸銀）での沈殿滴定に適しています：

- 塩化物、臭化物、ヨウ化物
- 硫化物
- 硫化水素
- メルカプタン
- シアン化物

この電極は蒸留水で保管されます。

用途に応じて、注文可能な、コーティングされた（AgBr、AgClまたはAg₂Sコーティング）Ag Titrodeの使用を推奨しています。

納品範囲 6.00430.100

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

100 Stk

6.1236.050

Sleeve with SGJ 14/12 mm



100 Stk

6.2008.040

保存容器

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。




オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2104.020	Electrode cable / 1 m / F



6.02104.000 電極ケーブル プラグヘッド G / プラグ P、0.55 m

アナログ電極 (プラグヘッド G) を OMNIS のアナログ測定モジュールに接続するケーブル

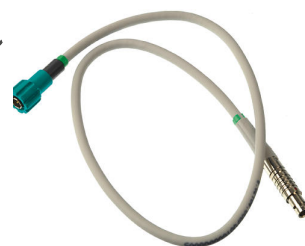

6.02104.010 電極ケーブル プラグヘッド G / プラグ P、1.5 m

アナログ電極 (プラグヘッド G) を OMNIS のアナログ測定モジュールに接続するケーブル

