



Ag₂Sコーティング付きAg Titrode

6.00430.100S

参照電極としての、pHガラスメンブランを含む複合銀リング電極。

シルバーリングは、感度を高めるため、またより優れた検出限界のために硫化物（Ag₂S）でコーティングされています。

このメンテナンスフリーの電極は、例えば以下のような一定したpH値（滴定試薬硝酸銀）での沈殿滴定に適しています：

- 塩化物、臭化物、ヨウ化物
- 硫化物
- 硫化水素
- メルカプタン
- シアン化物

この電極は蒸留水で保管されます。

納品範囲 6.00430.100S

Qt.	Order no.	説明
100 Stk	6.1236.050	Sleeve with SGJ 14/12 mm



100 Stk	6.2008.040	保存容器
---------	------------	------

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。




オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2104.020	Electrode cable / 1 m / F



6.02104.000 電極ケーブル プラグヘッド G / プラグ P、0.55 m

アナログ電極 (プラグヘッド G) を OMNIS のアナログ測定モジュールに接続するケーブル

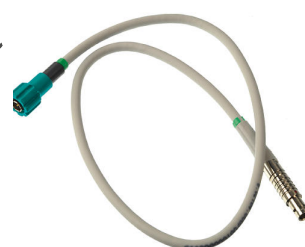

6.02104.010 電極ケーブル プラグヘッド G / プラグ P、1.5 m

アナログ電極 (プラグヘッド G) を OMNIS のアナログ測定モジュールに接続するケーブル

