



複合Agリング電極

6.00450.100

固定グラウンドジョイントダイアフラム付き複合銀リング電極。

この電極は、例えば以下のような様々なpH値 (滴定試薬硝酸銀) での沈殿滴定に適しています:

- 塩化物、臭化物、ヨウ化物
- 硫化物
- 硫化水素
- メルカプタン
- シアン化物

固定グラウンドジョイントダイアフラムは汚れに強く、固く溶解した銀リングは、濃度の比較的高い酸および食塩水に耐性があります。

参照電解質として、および保管用に $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ が使用されます。

用途に応じて、注文可能な、コーティングされた (AgBr、AgClまたはAg₂Sコーティング) Agリング電極の使用を推奨しています。

納品範囲 6.00450.100

Qt.	Order no.	説明
100 Stk	6.1236.050	Sleeve with SGJ 14/12 mm

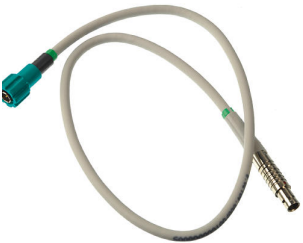


100 Stk	6.2008.040	保存容器
---------	------------	------

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.2104.020	Electrode cable / 1 m / F	
6.2310.010	Electrolyte KNO3-1mol/L 250 mL	
6.02104.000	電極ケーブル プラグヘッド G / プラグ P、0.55 m アナログ電極 (プラグヘッド G) を OMNIS のアナログ測定モジュールに接続するケーブル	
6.02104.010	電極ケーブル プラグヘッド G / プラグ P、1.5 m アナログ電極 (プラグヘッド G) を OMNIS のアナログ測定モジュールに接続するケーブル	