



# AgBrコーティング複合Agリング電極

6.00450.100BR

固定グラウンドジョイントダイアフラム付き複合銀リング電極。

固く溶解した銀リングは、濃度の比較的高い酸と食塩水に耐性があり、感度を高めるため、またより優れた検出限界のために臭化物 (AgBr) でコーティングされています。

この電極は、例えば以下のような様々なpH値 (滴定試薬硝酸銀) での沈殿滴定に適しています:

- 塩化物、臭化物、ヨウ化物
- 硫化物
- 硫化水素
- メルカプタン
- シアン化物

固定グラウンドジョイントダイアフラムは汚れに対して耐性があります。

参照電解質として、および保管用に  $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$  が使用されます。

納品範囲 6.00450.100BR

| Qt.     | Order no.  | 説明                       |
|---------|------------|--------------------------|
| 100 Stk | 6.1236.050 | Sleeve with SGJ 14/12 mm |



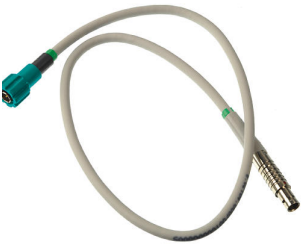

---

|         |            |      |
|---------|------------|------|
| 100 Stk | 6.2008.040 | 保存容器 |
|---------|------------|------|

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。



## オプションアクセサリ

| Order no.   | 説明                                                                                    |                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2104.020  | Electrode cable / 1 m / F                                                             |    |
| 6.02104.000 | 電極ケーブル プラグヘッド G / プラグ P、0.55 m<br><br>アナログ電極 (プラグヘッド G) を OMNIS のアナログ測定モジュールに接続するケーブル |    |
| 6.2310.010  | Electrolyte KNO3-1mol/L 250 mL                                                        |  |