



## Metrosep Carb 2 - 100/2.0

6.01090.210

IC カラム Metrosep Carb 2 - 100/2.0 は、Metrosep Carb 2 カラムの短いマイクロボアバージョンであり、アルカリ性溶離液およびパルスアンペロメトリー検出を用いた炭水化物の測定に特に適しています。大容量の陰イオン交換カラムは、スチロール/ジビニルベンゼン共重合体をベースとしています。これは pH = 0~14 の範囲で安定しており、ぶどう糖、果糖、ショ糖を分離します。さらに、数種の糖アルコールやオリゴ糖類の分析にも適しています。Metrosep Carb 2分離カラムの100mmのバージョンでは、短い分析時間実現できます。

溶離液の流量がごく少ないため、このカラムは特に IC-MSカップリングに適しています。

### 納品範囲 6.01090.210

| Qt. | Order no. | 説明 |
|-----|-----------|----|
|-----|-----------|----|

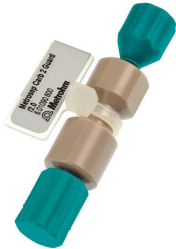
2 PCS

6.2744.060

Threaded stopper



## オプションアクセサリ

| Order no.   | 説明                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.01090.600 | <p>Metrosep Carb 2 Guard/2.0</p> <p>マイクロボア保護カラム Metrosep Carb 2 Guard/2.0 は汚れを効果的に取り除き、分析用の分離カラムを保護します。保護カラムのデザインは、クロマトグラフィーによる分離への影響が出ないように選定されています。</p>  |
| 6.01806.000 | <p>PEEK製キャピラリー 0.18 mm 内径 / 2 m</p> <p>例えば2 mm 仕様のMetrosep Carb 2 カラム (6.01090.2x0) 用の予熱キャピラリーとしてなど、高圧流路での使用向け。</p>                                        |
| 6.1015.200  | <p>Metrosep BO3 Trap 1 - 100/4.0</p> <p>溶離液からホウ酸塩の汚れを取り除くためのトラップカラム。<br/>Metrosep BO<sub>3</sub> Trap 1 - 100/4.0は主に水酸化物系溶離液による炭水化物分析において使用されます。</p>     |
| 6.1015.300  | <p>Metrosep CO3- Trap 1 - 100/4.0</p> <p>水酸化物系溶離液中の微量の炭酸塩を除去するためのトラップカラム。</p>                                                                            |