



Metrosep Carb 2 - 150/2.0

6.01090.220

ICカラムMetrosep Carb 2 - 150/2.0のマイクロボア・バージョンは、アルカリ性溶離液およびパルスアンペロメトリー検出を用いた炭水化物の測定に特に適しています。陰イオン交換カラムは、スチロール/ジビニルベンゼン共重合体をベースとしています。これはpH = 0からpH = 14までの範囲で安定しており、単糖類および二糖類を分離します。さらに、数種の糖アルコール、無水糖、オリゴ糖類などの分析にも適しています。カラム容量の最適化により、迅速な分離と優良な分離特性が組み合わされています。

溶離液の消費量がごく少ないため、このカラムは特にIC-MSカップリングに適しています。

納品範囲 6.01090.220

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

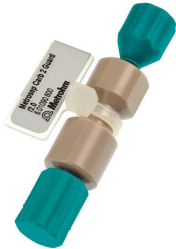
2 PCS

6.2744.060

Threaded stopper



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.01090.600	Metrosep Carb 2 Guard/2.0 マイクロボア保護カラム Metrosep Carb 2 Guard/2.0 は汚れを効果的に取り除き、分析用の分離カラムを保護します。保護カラムのデザインは、クロマトグラフィーによる分離への影響が出ないように選定されています。 
6.01806.000	PEEK製キャピラリー 0.18 mm 内径 / 2 m 例えば2 mm 仕様のMetrosep Carb 2 カラム (6.01090.2x0) 用の予熱キャピラリーとしてなど、高圧流路での使用向け。 
6.1015.200	Metrosep BO3 Trap 1 - 100/4.0 溶離液からホウ酸塩の汚れを取り除くためのトラップカラム。 Metrosep BO₃ Trap 1 - 100/4.0は主に水酸化物系溶離液による炭水化物分析において使用されます。 
6.1015.300	Metrosep CO3- Trap 1 - 100/4.0 水酸化物系溶離液中の微量の炭酸塩を除去するためのトラップカラム。 