



Metrosep A Supp 7 - 250/4.0

6.1006.630

水処理における副産物（消毒副産物）は、健康を害するだけではなく発がん性も疑われています。そのため、オキシハライドは、多くの調査や規格の対象となっています（例えば EPA 300.1 Part B、EPA 317.0、EPA 326.0 など）。その際、何よりも問題となっているのは、飲料水をオゾン処理する際に臭化物から生成される臭素酸塩です。Metrosep A Supp 7 - 250/4.0 は、標準陰イオン、オキシハライドおよびジクロロ酢酸の並行測定に高性能を発揮する分離カラムです。このカラムを用いることで、これらのイオンを $\mu\text{g/L}$ の低い範囲まで、確実かつ精密に測定できます。5- μm ポリビニルアルコール・ポリマーを使用することで、検出感度が高まり、極端に高い理論段数を示し、その結果傑出した分離特性および検出特性を実現することができます。さらに、温度変化によって、アプリケーション特有の条件に分離を順応させることができます。

オプションアクセサリ

Order no.

説明

6.1006.500 Metrosep A Supp 5 Guard/4.0

Metrosep A Supp 5 Guard/4.0は、IC陰イオンカラムMetrosep A Supp 5 および 7をサンプルや溶離液による汚れからしっかりと守ります。

これはMetrosep A Supp 5と同じ分離材料を有し、また同様にPEEK製であり、それぞれの分離カラムにほぼデッドボリュームなしで直接取り付けすることができます（「On Column Guard System」）。ガードカラムは、クロマトグラフィーにおける分離性能に影響を与えることなく、分析用カラムの寿命を延ばします。安価で取扱いが容易であるため、A Supp 5 Guard/4.0の使用が大変推奨されています。



6.1006.540 Metrosep A Supp 5 S-Guard/4.0

Metrosep A Supp 5 S-Guard/4.0は、IC陰イオンカラムMetrosep A Supp 5 および 7をサンプルや溶離液による汚れからしっかりと守ります。



6.1011.030 Metrosep RP 2 Guard/3.5

Metrosep RP 2 Guard/3.5 は、分析用分離カラムを汚れからしっかりと保護する、汎用性のある保護カラムです。微粒子、微量の酸化鉄または細菌を確実に取り除きます。Metrosep RP 2 Guard/3.5は、僅かな操作でフィルターディスクを交換できるため、費用節約の助けとなります。




6.1011.120 RP Guard用交換用フィルター、10個

6.1011.030には使用しないでください。



6.1011.130 Spare filter for RP 2 Guard/3.5, 10 pieces

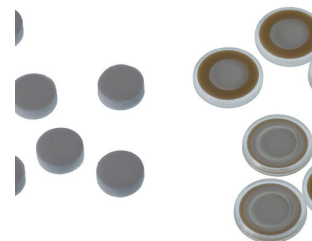

6.1031.500 Metrosep A Supp 16 Guard/4.0

Metrosep A Supp 16 Guard/4.0は分析用分離カラムMetrosep A Supp 16を効果的に汚れから守ります。この保護カラムは「On Column Guard System」によって取り扱いが大変容易な点においてすぐれています。保護カラムは簡単に分析用カラムに回して取り付けられます。工具は必要ありません。



6.1031.510 Metrosep A Supp 16 S-Guard/4.0

Metrosep A Supp 16 S-Guard/4.0は分析用分離カラムMetrosep A Supp 16を効果的に汚れから守ります。保護カラムは、キャピラリー接続部を用いて簡単に分離カラムと接続できます。工具は必要ありません。

