


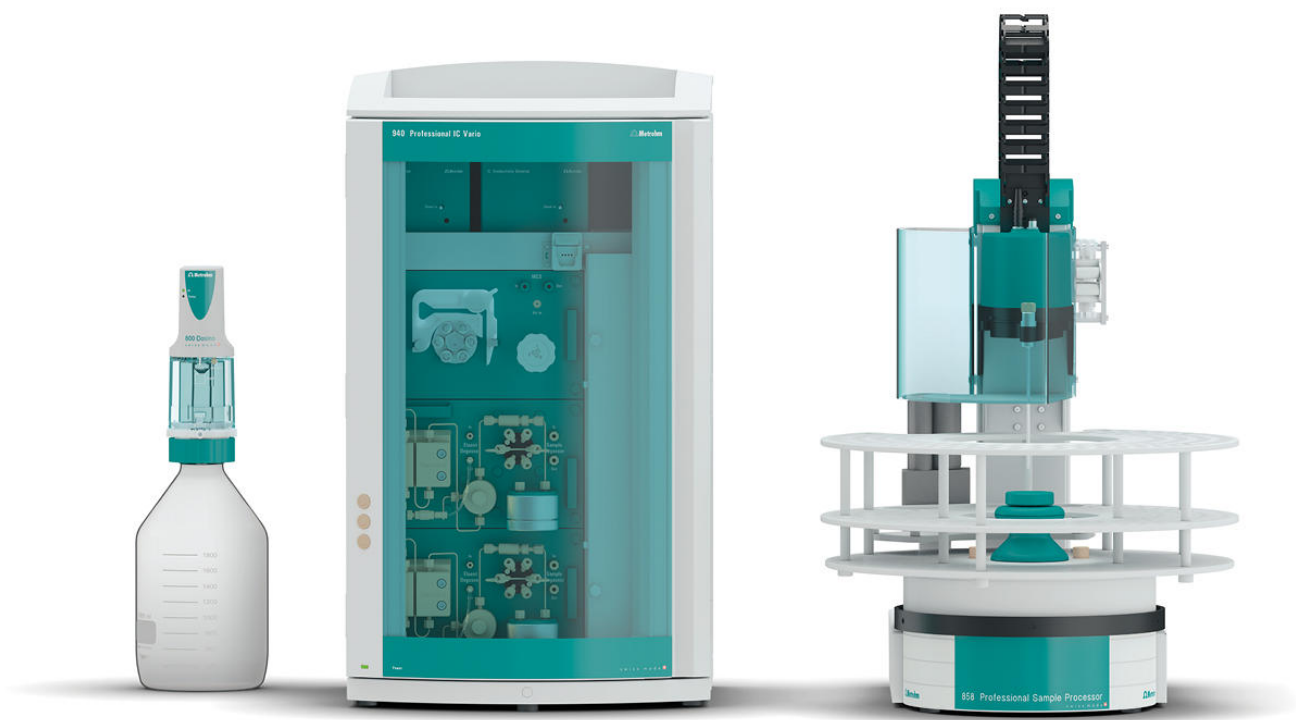

「ProfIC Vario 6 AnCat」 – インライン希釈とインライン限外ろ過を備えた Professional IC Vario システム

ProfIC-Vario-06-AnCat

メトロームのインライン希釈、メトロームのインライン限外ろ過、連続サプレッション、電気伝導度検出を備えたProfessional IC Varioシステムは、非常に高い濃度中にあり、マトリックスに粒子を含む陰イオンと陽イオンの両方を完全自動測定することができます。


典型的な使用領域:

- 洗浄水、プロセス水および排水
- 抽出液および消化液
- 食品サンプル

概略図

納品範囲 ProfIC-Vario-06-AnCat

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	2.940.2500	940 Professional IC Vario TWO/SeS/PP
940 プロフェッショナル IC Vario TWO/SeS/PP は連続サプレッション（1チャンネル）とサプレッサー再生のためのペリスタリックポンプを備えた2チャンネルタイプの-IC装置です。この装置は任意の分離メソッドおよび検出メソッドによって使用することができます。 典型的な使用領域: - 陰イオンおよび陽イオンの並行測定のための標準装置 - 陰イオンおよび陽イオンのためのトレース分析 - 陰イオンおよび陽イオンのオンラインモニタリング		
2 PCS	2.850.9010	IC Conductivity Detector
インテリジェントIC装置のためのコンパクトかつインテリジェントな高出力電気伝導度検出器。優れた温度安定性、保護された検出器ブロック内の総合的な信号処理、最新版のDSP (Digital Signal Processing) が高精度の測定を保証します。稼動範囲がダイナミックなので測定範囲の変更は（自動のものも含めて）必要ありません。		
1 PCS	2.858.0020	858 Professional Sample Processor – Pump
858 プロフェッショナルサンプルプロセッサ - ポンプは、500 µLから500 mLまでのサンプルを処理します。サンプルは内蔵式双方向性の2チャンネルのペリスタリックポンプまたは800 ドジーノ電動ビュレットによって転送されます。		
1 PCS	2.741.0010	741 Magnetic Stirrer

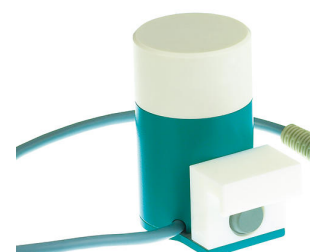

1 PCS

2.800.0010

800 Dosino

800 Dosino 高機能電動ビュレットのドージングユニット用書き込み・読み取り用ハードウェア付き駆動部。固定されたケーブル付き（長さ150 cm）。



1 PCS

6.5330.120

ICアクセサリ: インライン希釈

インライン希釈のための付属品セット。858プロフェッショナルサンプルプロセッサ、800 ドジーノ電動ビュレット、741 マグネチックスターラとの併用に。




1 PCS

6.05330.110

IC機器: インライン限外ろ過2 - push mode

インライン限外ろ過2 - push modeのための付属品セット。858 Professional Sample Processor / 919 IC Autosampler plusを伴う使用に。

インライン希釈 (MIDT) との組み合わせに推奨されるセット。

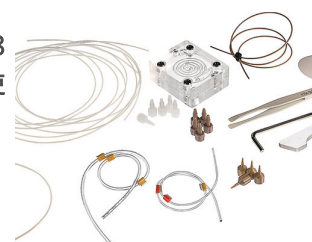

オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.2041.760	Sample rack 54 x 11 mL + 1 x 300 mL	
6.2041.440	サンプルラック、148 x 11 mL および 3 x 300 mL、(ポリ塩化ビニル製) 148 個のサンプル容器および3個のリンスポットに適した 858 Professional Sample Processor、815 Robotic USB Sample Processor XLのためのサンプルラック。以下のサンプル容器およびリンスポットを使用することができます: 6.2743.050、6.1608.080、6.1627.000、6.2743.040。 合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)	
6.2743.050	サンプル容器 11 mL 2000 個。IC Sample Processors および VA Autosampler 用。 IC サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン (PP) 樹脂製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム (DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7) の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。	
6.2743.070	Stopper with perforation	

6.1050.420 Metrosep C 4 - 150/4.0

Metrosep C 4 - 150/4.0は、短時間で高い分離性能を示す、マイクロボア分離カラムの陽イオン分析における汎用的な標準カラムです。Metrosep C 4 - 150/4.0は、水性溶媒中のアルカリ金属およびアルカリ土類金属の分析に理想的な分離カラムです。



6.1050.500 Metrosep C 4 Guard/4.0

Metrosep C 4 Guard/4.0 は C 4 カラム素材を含み、シリカゲルを基材とする全ての Metrosep 陽イオンカラムを保護します。粒子状物質や汚れを確実に抑え、その結果分析用分離カラムの耐用期間が格段に長くなります。手頃な値段もさらなるプラスポイントの1つです。Metrosep C 4 Guard/4.0 は «On Column Guard System» に則して機能し、それぞれの分離カラムにほぼデッドボリュームなしで直接取り付けすることができます。



6.2842.000 MSM-HC Rotor A



6.2844.000 MSM-LC Rotor A





アダプタスリーブを用いれば、MSM Rotor A と MSM-LC Rotor A のいずれも、ローターハウジングに取り付けることができます。



941 溶離液生成モジュールにより、溶離液の自動製造が可能となります。このモジュールは、手動で介入しなくても連続して処理することを可能にし、安定した保持時間を保証します。このモジュールはあらゆるメトロームのICデバイスと接続させることができ、MagIC Netによって制御されます。



溶離液生成モジュールの付属品セット 溶離剤拡張のための全てのパーツを含みます。レベルセンサーは用途に応じてご注文ください。



2.800.0010 800 Dosino

800 Dosino 高機能電動ビュレットのドージングユニット用書き込み・読み取り用ハードウェア付き駆動部。固定されたケーブル付き（長さ 150 cm）。



6.2769.110 EMPTY sensor for level sensor for 2 L bottles



6.3032.150 807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit、5 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.2744.080 M6 thread / UNF 10/32 adapter



6.6059.422 MagIC Net 4.2 Professional: 1ライセンス



6.6059.423 MagIC Net 4.2 Multi: 3ライセンス

