


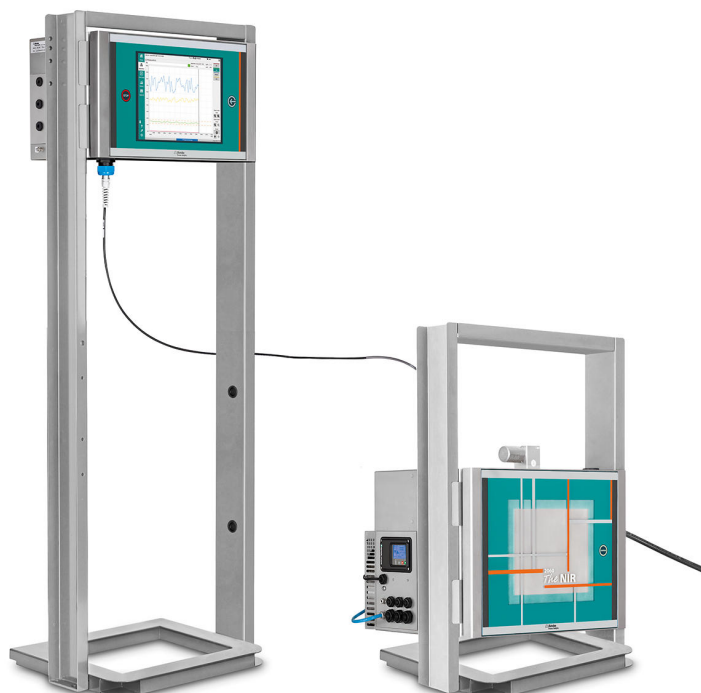

2060 The NIR-REx Analyzer

A472060040C

2060 *The NIR-REx* は、Metrohm Process Analytics 製の次世代プロセス分光分析計です。その独自で定評のある完全な設計により、10 秒ごとに正確な結果を出します。この装置は、光ファイバーまたは接触式プローブを用いた、プロセスラインまたは反応容器における直接液体または固形物の非破壊分析を提供します。五 (5) つまでのプローブおよび/またはフローセルを接続できるように設計されています。弊社独自開発の多機能な組込ソフトウェアを使用して、5つのチャンネルをすべて互いに独立して設定することができます。


2060 プラットフォームの一部として 2060 *The NIR-REx Analyzer* は、光ファイバーを用いてヒューマンインターフェース (HI) と NIR キャビネットの独自の分離を可能にします。このリモートコンフィギュレーションにより、顧客嗜好とエリア区分によって異なる、工場周辺の異なる場所に二つのキャビネットを配置することができます。

加えて、このアナライザーは IECEx 認証を取得し、ATEX EU 指令を満たしています。本装置は、あらゆる潜在的な爆発性ヒュームまたはガスが周囲の空気からアナライザーのカバーに入り込むのを防ぐ、本質的な電子装置とともに、検定済みパージ/加圧システムで設計されています。さらに、他の三つのバージョンで使用可能です: 2060 *The NIR Analyzer*、2060 *The NIR-R Analyzer*、および 2060 *The NIR-Ex Analyzer*。

Order no.	説明
A472060020C	2060 The NIR Analyzer 2060 <i>The NIR Analyzer</i> は、Metrohm Process Analytics 製の次世代プロセス分光分析計です。その独自で定評のある完全な設計により、10 秒ごとに正確な結果を出します。この装置は、光ファイバーまたは接触式プローブを用いた、プロセスラインまたは反応容器における直接液体または固形物の非破壊分析を提供します。五 (5) つまでのプローブおよび/またはフローセルを接続できるように設計されています。弊社独自開発の多機能な組込ソフトウェアを使用して、5 つのチャンネルをすべて互いに独立して設定することができます。 2060 プラットフォームの一部として、2060 <i>The NIR Analyzer</i> はモジュール式コンセプトを有し、他の三つのバージョンで使用可能です: 2060 <i>The NIR-R Analyzer</i>、2060 <i>The NIR-Ex Analyzer</i>、および 2060 <i>The NIR-REx Analyzer</i>です。
A472060030C	2060 The NIR-Ex Analyzer 2060 <i>The NIR-Ex Analyzer</i> は、Metrohm Process Analytics 製の次世代プロセス分光分析計です。その独自で定評のある完全な設計により、10 秒ごとに正確な結果を出します。この装置は、光ファイバーまたは接触式プローブを用いた、プロセスラインまたは反応容器における直接液体または固形物の非破壊分析を提供します。五 (5) つまでのプローブおよび/またはフローセルを接続できるように設計されています。弊社独自開発の多機能な組込ソフトウェアを使用して、5 つのチャンネルをすべて互いに独立して設定することができます。 加えて、このアナライザーは IECEx 認証を取得し、ATEX EU 指令を満たしています。本装置は、あらゆる潜在的な爆発性ヒュームまたはガスが周囲の空気からアナライザーのカバーに入り込むのを防ぐ、本質的な電子装置とともに、検定済みパージ/加圧システムで設計されています。さらに、他の三つのバージョンで使用可能です: 2060 <i>The NIR Analyzer</i>、2060 <i>The NIR-R Analyzer</i>、および 2060 <i>The NIR-REx Analyzer</i>。



2060 *The* NIR-R Analyzer は、Metrohm Process Analytics 製の次世代プロセス分光分析計です。その独自で定評のある完全な設計により、10 秒ごとに正確な結果を出します。この装置は、光ファイバーまたは接触式プローブを用いた、プロセスラインまたは反応容器における直接液体または固形物の非破壊分析を提供します。五 (5) つまでのプローブおよび/またはフローセルを接続できるように設計されています。弊社独自開発の多機能な組込ソフトウェアを使用して、5 つのチャンネルをすべて互いに独立して設定することができます。

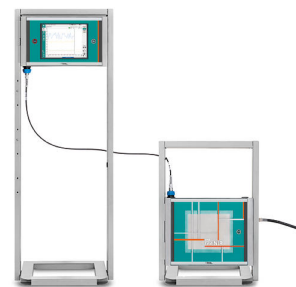

2060 プラットフォームの一部として 2060 *The* NIR-R Analyzer は、光ファイバーを用いてヒューマンインターフェース (HI) と NIR キャビネットの独自の分離を可能にします。このリモートコンフィギュレーションにより、顧客嗜好とエリア区分によって異なる、工場周辺の異なる場所に二つのキャビネットを配置することができます。その上、他の三つのバージョンで使用可能です: 2060 *The* NIR Analyzer、2060 *The* NIR-Ex Analyzer および 2060 *The* NIR-REx Analyzer です。

6.07410.000 OMNIS NIR ランプ

2060 *The* NIR Analyzer および OMNIS NIR Analyzer のためのスペアランプ、内蔵時間カウンタ付き。

