



TacticID-1064 ST

BWT-840001134

TacticID®-1064 ST は、爆発物、麻薬、ならびにその他の疑わしい物質を現場にて迅速に識別するための 1064nm のハンドヘルドラマンアナライザーです。TacticID-1064 ST の透視機能により、不透明および透明な梱包を通してサンプルを非破壊で分析でき、ファーストレスポンス、セキュリティスタッフ、捜査当局、爆弾処理班、税関や国境警備局、ならびに危険物処理班がサンプルとの接触を最小限に抑えて機敏に対応できるように、サンプルの脅威レベルがはっきりと表示されます。

TacticID-1064 ST は、特許を取得した STRaman® テクノロジーと組み合わせた、実績のあるラマン分光法を使用しており、ユーザーは不明な化学薬品、麻薬、医薬品、爆発物、および他の多くの物質を、不透明な遮断物の上からでもリアルタイムで識別を実行し、作業の不確実性と反応時間を大幅に低減することができます。

1064nm レーザー励起および透視用途のための ST アダプター付き TacticID-1064 ST は、広いサンプルエリアをスキャンし、サンプルを燃焼することなく蛍光フリーのスペクトルを生成し、ユーザーは色付きおよび色の濃い物質、困難なストリートサンプル、不均一な混合物、ならびに直接梱包を通しての物質を識別できるようになります。

この IP68 規格準拠のシステムの特徴は、保護具越しでも扱いやすいタッチスクリーンおよび/またはハードウェアボタンインターフェースを備えた高輝度ディスプレイにあります。

納品範囲 BWT-840001134


Qt.	Order no.	説明
1 PCS	BWT-840000295	直径15 mmの液体用バイアル
		ホウケイ酸ガラス製バイアル (直径15 mm) 6個を含むパッケージ、専用バッグを含む。 
1 PCS	BWT-840000344	バイアルホルダー用アダプター
		バイアルホルダー用アダプター、直径 15 mm のバイアルと互換性あり。 
1 PCS	BWT-840000345	ハンドヘルドラマン・ボトルアダプター
		ハンドヘルドラマン付属品:ボトルアダプター NR2-BSA 
1 PCS	BWT-840000348	ポリスチレン製検証キャップ
		ASTM規格に準じたポリスチレン内蔵のポリスチレン製検証キャップ。 

1 PCS

BWT-
840000353

シャフト用保護キャップ

ラマンハンドヘルド装置のためのシャフト用保護キャップ、10個入りパッケージ。

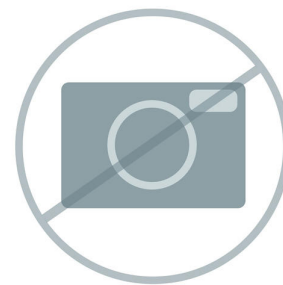

1 PCS

BWT-
840000329

15 mmバイアル用バッグ

15 mmバイアル用バッグ。



1 PCS

BWT-
840000419

TacticID 用のスタイラス/ボールペン

タッチスクリーン用スタイラス/ボールペンの組み合わせ (5個入りパッケージ)。

TID-STY



1 PCS

BWT-
840000858

USBケーブル

Type A USB 2.0までのマイクロUSBポートに適合するUSBケーブル。



1 PCS

BWT-
840000948

USB OTG ホストケーブル

USBスティックおよびハンドシステム間のデータ転送のための USB
OTG ホストケーブル。



1 PCS

BWT-
840000949

ラージスポットアダプター

ラージスポットサンプリングアダプターは、Metrohm のハンドヘルド
ラマンシステム用に設計されており、スポットサイズを大きくし、サン
プリング深度を深くすることで、特に敏感なサンプルや色の濃いサンプ
ルのサンプル燃焼のリスクを最小限に押さえます。さらにこのアダプ
ターは、シースルーソフトウェアと互換性のある装置で使用する場合、
シースルー機能をサポートします。



TID-STA

オプションアクセサリ

Order no.	説明	
BWT- 840000294	充電ステーション リチウムイオン電池の充電ステーション (NR-BAT および TID-BAT の充電専用)。	
BWT- 840000361	レーザー出力用ハンドヘルド測定装置 レーザー出力測定装置、ロッド仕様、校正済み。範囲: 5マイクロワット~1ワット。レーザー出力測定装置のOQ/PQならびに年次認証の際の使用。	
BWT- 840000428	WLAN ルーター バッテリー稼働の携帯型 WLAN ルーター、3G/4G接続。	

BWT-
840000969

ハンドヘルドラマン 1064 液浸プローブ

ハンドヘルドラマンスペクトロメーター 1064 付属品: 接触式液浸プローブ、長さ 6"、作動距離約 1 mm、環境温度における作動圧力 2 bar まで。

NRX-CTP-IMP



BWT-
840000970

大きいボトル用ハンドヘルドラマン・アダプター (1064)

携帯型ラマンスペクトロメーター1064付属品:作動距離10 mmの大きいボトル用アダプター。

NRX-BSA



BWT-
840000498

使い捨て電池のカートリッジ

タイプ 123A (Surefire など) の使い捨て電池6個との使用のための TacticID 電池カートリッジ。電池なし。



BWT-
840001154

HHラマンシリーズのためのショルダーバッグ

TacticIDシリーズのためのショルダーバッグ。頑丈な使用と耐摩耗性を想定してデザインされた1000Dのヘビーデューティーな生地、複数のタクティカルポーチと仕切りで構成されています。全てのTacticID製品ならびにNanoRam製品に対応しています。運搬目的のみにご使用いただけます。

TID-SBG



BWT-
840000414

18 V 電源アダプター

18 VDC、1.67 Aの電源アダプター。アメリカ合衆国、EU、イギリス、およびオーストラリア向けのプラグは納品内容に含まれています。

TID-PWA

