



TacticID Mobile

BWT-840001195

TacticID Mobile は、麻薬、有害化学薬品、ならびにその他の疑わしい物質の迅速かつ非破壊的な識別に対象を絞ったライブラリを含む、経済的でエルゴノミックな 1064nm ハンドヘルドラマンスペクトロメーターです。安全作業者が現場で容易に操作できるよう設計されており、サンプルを透明な容器を通して直接かつ迅速にスキャンでき、識別結果は大型の高輝度・高解像度タッチスクリーンに鮮明に表示されます。

TacticID Mobile は、サンプルの分子指紋を測定するためにラマン分光法を使用し、分子指紋は麻薬、前駆物質、有毒化学物質、一般的化学薬品、医薬品、爆発物やその他の組み込みスペクトルライブラリによって識別されます。ポイントオブニード (point-of-need) 識別により、ファーストレスポンスは、サンプル識別を 1 分未満で実行することができ、安全情報 (GHS および NFPA704) を伴い、確実性の高い迅速なレスポンスを得ることができます。

TacticID Mobile 1064 nm 励起レーザーにより、ユーザーは扱いにくい路上サンプル、色付きのサンプル、ならびに不純物のサンプルを、蛍光による妨害の影響を最低限に抑えて識別できます。システムは、保護具を着用した状態でも使用可能なタッチスクリーンとハードボタンのインターフェースで操作することができます。このシステムは、頑丈な IP68 ゴム製の保護を伴うコンパクトな設計で、MIL-STD-810H 落下試験に合格しています。

詳細情報は、画像、位置情報タグ付け、メモ、ならびにその他の識別情報を含むスキャンごとに追加することができ、1 つの文書に関連する全ての情報をまとめた包括的なレポートが作成されます。ユーザーによって作成されたライブラリおよびカスタマイズも使用可能です。

納品範囲 BWT-840001195

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	BWT-840000342	ライトアングルアダプター
ハンドヘルド型ラマン装置を使ったハンズフリー測定のためのライトアングルアダプター。NanoRam-1064 および TacticID Mobile に対応しています。		
		
1 PCS	BWT-840000343	ポイントアンドシュートアダプター
ハンドヘルドラマン装置用のアタッチメントレンズ。NanoRam-1064 および TacticID Mobile と互換性があります。		
		
1 PCS	BWT-840000344	バイアルホルダー用アダプター
バイアルホルダー用アダプター、直径 15 mm のバイアルと互換性あり。		
		
1 PCS	BWT-840000345	ハンドヘルドラマン・ボトルアダプター
ハンドヘルドラマン付属品:ボトルアダプター		




1 PCS BWT- ポリスチレン製検証キャップ
840000348

ASTM規格に準じたポリスチレン内蔵のポリスチレン製検証キャップ。



1 PCS BWT- シャフト用保護キャップ
840000353

ラマンハンドヘルド装置のためのシャフト用保護キャップ、10個入りパッケージ。

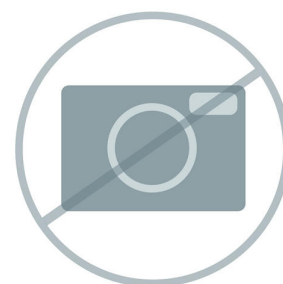

1 PCS BWT- アダプター用ポーチ (NR2-PCH-ADPT)
840000354

NanoRam-1064、TacticID-N Plus、TacticID Mobile 対応のハンドヘルドラマンアダプター用ポーチ。

NR2-PCH-ADPT



1 PCS BWT- TacticID 用のスタイラス/ボールペン
840000419

タッチスクリーン用スタイラス/ボールペンの組み合わせ (5個入りパッケージ)。



1 PCS BWT- ハンドヘルドラマン装置用の O リング交換キット
840000912

ハンドヘルドラマン O リング交換キット - (シャフトのみ)。

キットに含まれるもの: O リング#1 ID 9.00 mm x15、O リング#2 ID 10.00 mm x15 (TacticID-N Plus、TacticID Mobile、NanoRam-1064)。


TID-ORK



1 PCS BWT- Type-C to Type-AのUSBケーブル
840001191

Type-C to Type-AのUSBケーブル。TacticID Mobileと互換性があります


HHX-USB

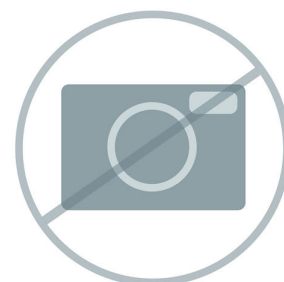

1 PCS BWT- 国際規格プラグを備えたTacticID Mobile電源プラグ
840001192 グ


電源アダプター 15V 3.6A DC。米国、欧州、英国、オーストラリア用のプラグを含む。TacticID Mobileと互換性があります

HHX-PWA

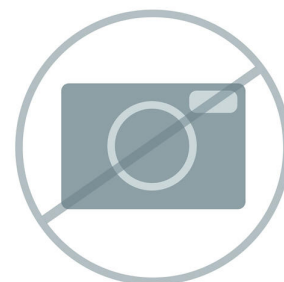

1 PCS BWT- TacticID Mobile Illicit and General Chemicals
840001252 Library

TacticID Mobile 違法物質ライブラリには、薬物、TIC、TIM、前駆物質、一般化学薬品が含まれています。

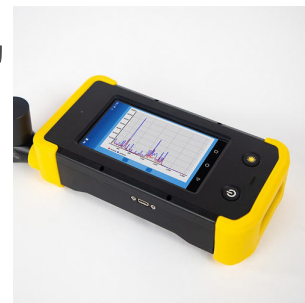


1 PCS

BWT-
840001193


TacticID Mobile製品ハンドブックを含むUSBドライブ

TacticID Mobile製品ハンドブックを含むUSBドライブ; USB Type-AコネクタおよびUSB Type-Cコネクタの両方を含んでおり、OTG 機能にも使用できます。

HHX-USB-OTG

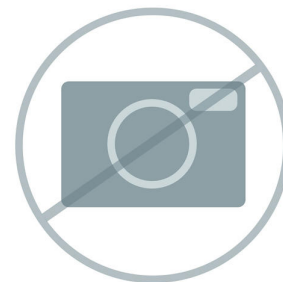

オプションアクセサリ

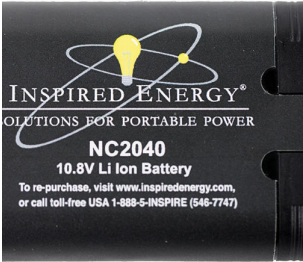Order no.	説明	
BWT-840000403	再充電可能なリチウムイオンバッテリー 10.8 V	
	再充電可能なリチウムイオンバッテリー: TacticID-N Plus、TacticID Mobile、NanoRam-1064 に対応。	
	TID-BAT	
BWT-840000428	WLAN ルーター	
	バッテリー稼働の携帯型 WLAN ルーター、3G/4G接続。	
BWT-840000949	ラージスポットアダプター	
	ラージスポットサンプリングアダプターは、Metrohm のハンドヘルド ラマンシステム用に設計されており、スポットサイズを大きくし、サンプリング深度を深くすることで、特に敏感なサンプルや色の濃いサンプルのサンプル燃焼のリスクを最小限に押さえます。さらにこのアダプターは、シースルーソフトウェアと互換性のある装置で使用する場合、シースルー機能をサポートします。	
	TID-STA	
BWT-840000969	ハンドヘルドラマン 1064 液浸プローブ	
	ハンドヘルドラマン分光ロメーター 1064 付属品: 接触式液浸プローブ、長さ 6"、作動距離約 1 mm、環境温度における作動圧力 2 bar まで。	
	NRX-CTP-IMP	



BWT-
840000970

大きいボトル用ハンドヘルドラマン・アダプター (1064)

携帯型ラマンスペクトロメーター1064付属品:作動距離10 mmの大きいボトル用アダプター。

NRX-BSA



BWT-
840001154

HHラマンシリーズのためのショルダーバッグ

TacticIDシリーズのためのショルダーバッグ。頑丈な使用と耐摩耗性を想定してデザインされた1000Dのヘビーデューティーな生地、複数のタクティカルポーチと仕切りで構成されています。全てのTacticID製品ならびにNanoRam製品に対応しています。運搬目的のみにご使用いただけます。

TID-SBG



BWT-
840001184

TacticID Mobileのための1000を超える化合物を含むラマンスペクトルライブラリ

一般的な化学薬品、麻薬、溶媒、およびプラスチックの1000を超えるスペクトルを含むラマンスペクトルライブラリ。NFPA704ならびにGHS安全情報を含みます。TacticID Mobileを伴う使用向け。

TDL-XM-CNSP




BWT-
840001194

TacticID Mobile パワーバンク

TacticID Mobile用のパワーバンク（バッテリーパック）。TacticID Mobileユニット、ならびに充電用TacticID Mobile電源アダプターと互換性があります。

HHX-PWB

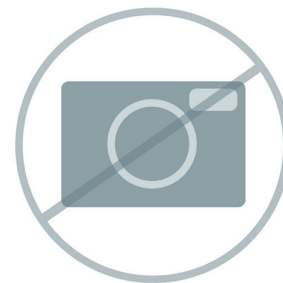


BWT-
840001223

TacticID Mobile 用 USB-C カーチャージャー

TacticID Mobile のための USB-C カーチャージャー。車内で迅速に充電するための専用の USB-C ケーブルを含みます。

モデル HHX-CCA

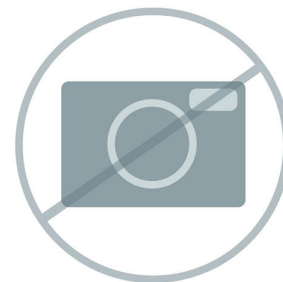

BWT-
840001252

TacticID Mobile Illicit and General Chemicals Library

TacticID Mobile 違法物質ライブラリには、薬物、TIC、TIM、前駆物質、一般化学薬品が含まれています。



BWT-
840001266

TacticID Mobile Comprehensive ラマンライブラリ

TacticID Mobile Metrohm Comprehensive ラマンライブラリは、29'000 件以上もの化学薬品、鉱物、有機化合物、溶媒、ポリマー、染料および顔料、TIC、TIM、無機化合物および有機金属系、パーソナルケア製品、違法物質のスペクトルのエントリをカバーしています。

TDL-XM-MCRL



BWT-
840001323

TacticID Mobile 鉱物ライブラリ

Metrohm 鉱物ライブラリ、TacticID Mobile 用。



BWT-
840001226 TacticID Mobile 爆発物ライブラリ

TacticID Mobile 用の爆発物ライブラリ。



BWT-
840001190 TacticID Mobile CWA ライブラリ

化学兵器 (CWA) ライブラリ、TacticID Mobile 用。



BWT-
840001294 TacticID Mobile MCRL - 有機物 & 有機金属

Metrohm 包括的ラマンライブラリ (MCRL) 無機物および有機金属、
TacticID Mobile 用。



BWT-
840001302 TacticID Mobile MCRL - パーソナルケア製品

Metrohm 包括的ラマンライブラリ (MCRL) パーソナルケア製品、
TacticID Mobile 用。



BWT-
840001306

TacticID Mobile MCRL - ポリマーおよびポリマー添加剤

Metrohm 包括的ラマンライブラリ (MCRL) ポリマーおよびポリマー添加剤、TacticID Mobile 用。



BWT-
840001310

TacticID Mobile MCRL - 染料、顔料、着色剤

Metrohm 包括的ラマンライブラリ (MCRL) 染料、顔料、着色剤、TacticID Mobile 用。



BWT-
840001298

TacticID Mobile MCRL - 有機物

Metrohm 包括的ラマンライブラリ (MCRL) 有機物、TacticID Mobile 用。



BWT-
840001319

TacticID Mobile MCRL 有機物 - ハロゲン化合物

Metrohm Comprehensive ラマンライブラリ (MCRL) 有機物 - TacticID Mobile 用ハロゲン化合物。



BWT-
840001320 TacticID Mobile MCRL 有機物 - 窒素含有基

Metrohm 包括的ラマンライブラリ (MCRL) 有機物 - 窒素含有基、
TacticID Mobile 用。



BWT-
840001321 TacticID Mobile MCRL 有機物 - 酸素含有基

Metrohm Comprehensive ラマンライブラリ (MCRL) 有機物 -
TacticID Mobile 用酸素含有基。



BWT-
840001322 TacticID Mobile MCRL 有機物 - 硫黄含有基

Metrohm 包括的ラマンライブラリ (MCRL) 有機物 - 硫黄含有基、
TacticID Mobile 用。




66079320 TacticID Mobile MCRL - 農薬

Metrohm 包括的ラマンライブラリ (MCRL) 農薬、TacticID Mobile
用。



66079330 TacticID Mobile MCRL - 生化学

Metrohm 包括的ラマンライブラリ (MCRL) 生化学、TacticID Mobile 用。

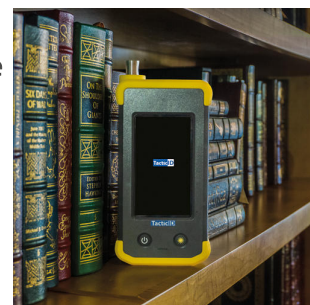

66079340 TacticID Mobile MCRL - API

Metrohm 包括的ラマンライブラリ (MCRL) 医薬品有効成分 (API)、TacticID Mobile 用。

