



797 VA Computrace 自動標準添加法CVS分析

MVA-12

MVA-12は、ルーチン分析におけるCVS（サイクリックボルタンメトリーストリッピング）法による電気めっき浴中の個々の有機添加物サンプルの手動測定用として一部自動化された分析システムです。サンプルチェンジャーを使用しなくてもオペレーションスタッフによる最小限の作業によって簡単に測定が可能です。797 VA コンピュートレース for CVSおよび補助溶液とサンプルの自動添加のための800 ドジーノ電動ビュレット 3つで構成されています。このシステムは、装置を構成する多くの付属品が含まれており、それにはVAコンピュートレースソフトウェアおよび電極（白金回転ディスク電極（RDE）、Ag/AgCl参照電極、白金補助電極）が含まれます。

納品範囲 MVA-12

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

3 PCS

2.800.0010

800 Dosino

800 Dosino 高機能電動ビュレットのドージングユニット用書き込み・読み取り用ハードウェア付き駆動部。固定されたケーブル付き（長さ150 cm）。



2 PCS

6.1608.050

Drying bottle / 100 mL / GL 45



1 PCS

6.1608.070

Eluent bottle / 2 L / GL 45



2 PCS

6.1618.060

Thread adapter GL 45 to GL 45



1 PCS

6.1805.020

FEP tubing / M6 / 52 cm



1 PCS

6.1805.120

FEP tubing / M6 / 100 cm



3 PCS

6.1805.530

FEP tubing / M6 / 2 m



1 PCS

6.1819.010

PTFE tube



1 PCS

6.2055.100

Bottle holder, double



2 PCS

6.3032.120

807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit、2 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



1 PCS

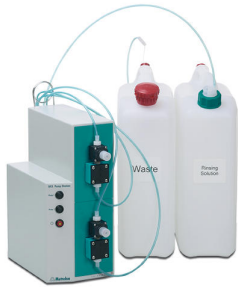
6.3032.250

807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit、50 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
2.843.0040	843 VA Membrane Pump Station コンパクトVAシステム	
	843ダイヤフラムポンプステーションには、リモート信号を介して797 VAコンピュートレースによって直接制御できる内蔵式ダイヤフラムポンプが2つ装備されています。このポンプは、797 VAコンピュートレースを接続した一部自動および完全自動のVAおよびCVSシステムの測定容器の洗浄および排出を自動で行います。電圧電流法のバージョンでは、測定容器の自動洗浄および自動排出のための付属品が完全装備されています。	
2.846.0010	846 Dosing Interface	
	ドージングおよびLQH作業のために、最高4つまで800 Dosino または805 Dosimatが接続できるUSB接続可能な制御ユニット。操作にはTouch Control、またはOMNISソフトウェア、tiamo™、MagIC Net、viva、あるいは797 VA Computraceがインストールされたパソコンとの接続が必要です。	
6.1204.170	3 mm platinum electrode tip for CVS	
6.1204.190	1 mm platinum electrode tip for CVS	