


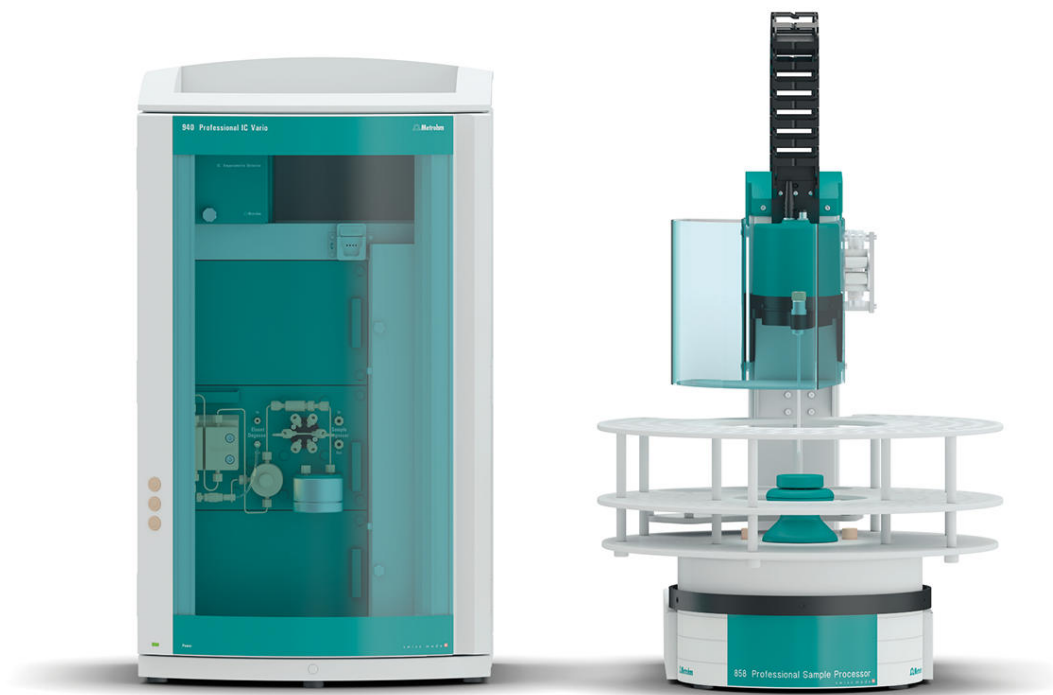

«ProfIC Vario 1 Amperometry» – アンペロメトリック検出器付き Professional IC Vario システム

ProfIC-Vario-01-Amperometry

アンペロメトリック検出を備えた Professional IC Vario システムは、糖、被酸化性陰イオン、ならびにその他の被酸化性および被還元性を持つ成分を完全自動測定することができます。


典型的な使用領域:

- 汎用的に使用可能な、被酸化性、または被還元性を持つ成分の分析
- 追加サンプル前処理のないサンプルスループットの高いルーチン分析
- パルスアンペロメトリー検出 (PAD) を伴う糖の分析
- 直接のアンペロメトリック検出 (DC) を伴うシアン化物および硫化物の微量分析
- その他の被酸化性、または被還元性陰イオンの分析
- 様々なポテンシャル形を有する有機成分の測定 (flexIPAD)

概略図

納品範囲 ProflC-Vario-01-Amperometry

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	2.940.1100	940 Professional IC Vario ONE
940 プロフェッショナル IC Vario ONEはサプレッション無しで使用するインテリジェントコンパクトIC装置です。この装置は任意の分離メソッドおよび検出メソッドによって使用することができます。 典型的な使用領域: - サプレッション無しの陰イオンおよび陽イオンの測定 - ポストカラムを使用する、または使用しないUV/VIS検出器による分析 - アンペロメトリック検出器による使用（例えば糖分析など） - MiPCTを伴う陽イオンのトレース分析		
1 PCS	2.850.9110	IC Amperometric Detector
インテリジェントIC装置のためのコンパクトかつインテリジェントなアンペロメトリック検出器。4つの測定モード（DC、PAD、flexIPAD、CV）による優れた選択性、卓越した信号・騒音比、非常に高速の測定待機機能が高精度の測定できます。		
1 PCS	2.858.0020	858 Professional Sample Processor – Pump
858 プロフェッショナルサンプルプロセッサ - ポンプは、500 μLから500 mLまでのサンプルを処理します。サンプルは内蔵式双方向性の2チャンネルのペリスタリックポンプまたは800 ドジーノ電動ビュレットによって転送されます。		

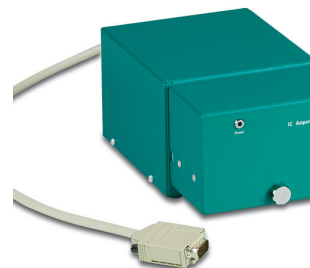

オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.2041.760	Sample rack 54 x 11 mL + 1 x 300 mL	
6.2041.440	サンプルラック、148 x 11 mL および 3 x 300 mL、(ポリ塩化ビニル製) 148 個のサンプル容器および3個のリンスボトルに適した 858 Professional Sample Processor、815 Robotic USB Sample Processor XLのためのサンプルラック。以下のサンプル容器およびリンスボトルを使用することができます: 6.2743.050、6.1608.080、6.1627.000、6.2743.040。 合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)	
6.2743.040	PP バイアル、2.5 mL、2000 個 2.5 mL。2000 個。IC Sample Processors 用。 ICサンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン (PP) 樹脂製です。製造および梱包は、無菌室およびクリーンルーム (DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7) の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。	
6.2743.050	サンプル容器 11 mL 2000 個。IC Sample Processors および VA Autosampler 用。 IC サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン (PP) 樹脂製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム (DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7) の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。	

6.2743.070 Stopper with perforation



6.5337.010 IC equipment Wall-Jet cell: Carb (Au, Pd)



6.1619.000 807 Dosing Unit 用乾燥管



6.1608.120 PP eluent bottle, 2 L



6.1602.200 Bottle cap 2 x M6, 1 x M8 to 6.1608.120



6.5330.130 ICアクセサリ: リキッドハンドリングステーション(左)

プロフェッショナルサンプルプロセッサのリキッドハンドリングステーションの設置のための付属品セット。洗浄水の供給はペリスタリックポンプもしくはドジーノ電動ビュレットによって行われます。



6.5337.000 IC equipment Wall-Jet cell: without electrodes



6.5000.200 付属品キット: IC Amperometric Detector

伝導性の低い溶液での測定のための IC Amperometric Detector のオプションとしての付属品セット。



6.6059.422 MagIC Net 4.2 Professional: 1ライセンス



6.6059.423 MagIC Net 4.2 Multi: 3 ライセンス

