


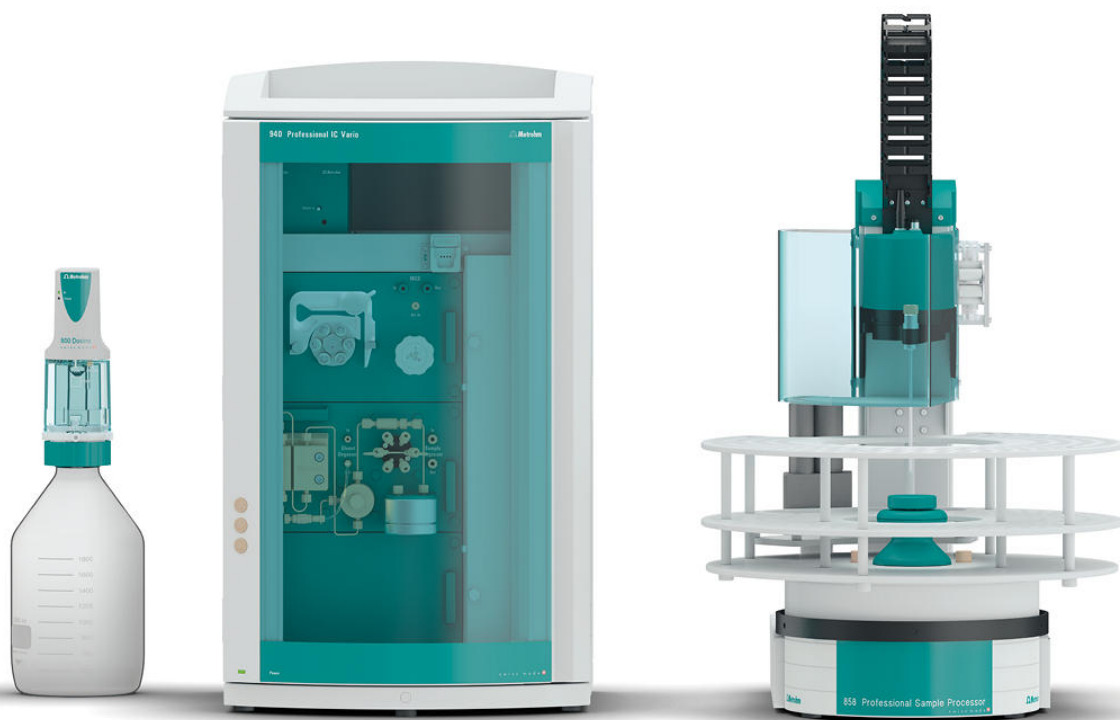

«ProfIC Vario 14 Anion» – Metrohmのピックアップ注入テクニック (MiPuT) を備えた Professional IC Vario システム

ProfIC-Vario-14-Anion

Metrohmのインテリジェントピックアップ注入テクニック (MiPuT)、連続サプレッション、電気伝導度検出を備えたProfessional IC Vario システムは、最小容量のサンプルから陰イオンまたは陽イオンを測定することができます。

典型的な使用領域:


- サンプルが少量しかない場合でも、あらゆる種類のサンプルに汎用的に適用可
- バイオ化学的プロセスの研究
- 環境サンプルの抽出物

概略図

設置マニュアル

納品範囲 ProfIC-Vario-14-Anion

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	2.940.1500	940 Professional IC Vario ONE/SeS/PP 940 プロフェッショナル IC Vario ONE/SeS/PP は連続サプレッションとサプレッサー再生のためのペリスタリックポンプを備えたインテリジェントIC装置です。この装置は任意の分離メソッドおよび検出メソッドによって使用することができます。 典型的な使用領域: - 連続サプレッションおよび電気伝導度検出器による陰イオンの測定 - 陰イオンのトレース分析 - 陰イオンのオンラインモニタリング
1 PCS	2.850.9010	IC Conductivity Detector インテリジェントIC装置のためのコンパクトかつインテリジェントな高出力電気伝導度検出器。優れた温度安定性、保護された検出器ブロック内の総合的な信号処理、最新版のDSP (Digital Signal Processing) が高精度の測定を保証します。稼動範囲がダイナミックなので測定範囲の変更は（自動のものも含めて）必要ありません。
1 PCS	2.858.0020	858 Professional Sample Processor – Pump 858 プロフェッショナルサンプルプロセッサ - ポンプは、500 μLから500 mLまでのサンプルを処理します。サンプルは内蔵式双方向性の2チャンネルのペリスタリックポンプまたは800 ドジーノ電動ビュレットによって転送されます。
1 PCS	2.800.0010	800 Dosino 800 Dosino 高機能電動ビュレットのドージングユニット用書き込み・読み取り用ハードウェア付き駆動部。固定されたケーブル付き（長さ150 cm）。

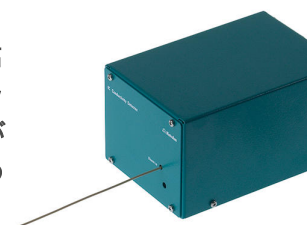

サンプルピックアップのドジーノ設置のための付属品セット (メトロームのインテリジェントピックアップインジェクション技術)。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2041.480	サンプルラック 159 x 2 mL および 3 x 300 mL、(ポリ塩化ビニル製) 159個のサンプル容器および3個のリンスボトルに適した 858 Professional Sample Processor のためのサンプルラック。以下のサンプル容器を使用することができます: 2 mL (エッペンドルフ)、6.1608.080、6.1627.000。 合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)
6.2842.000	MSM-HC Rotor A
6.2844.000	MSM-LC Rotor A
6.2832.000	MSM Rotor A



6.2842.020 アダプタスリーブ、MSM

アダプタスリーブを用いれば、MSM Rotor A と MSM-LC Rotor A のいずれも、ローターハウジングに取り付けることができます。



2.941.0010 941 Eluent Production Module

941 溶離液生成モジュールにより、溶離液の自動製造が可能となります。このモジュールは、手動で介入しなくても連続して処理することを可能にし、安定した保持時間を保証します。このモジュールはあらゆるメトロームのICデバイスと接続させることができ、MagIC Netによって制御されます。



6.2842.200 MSM-HC Rotor C



6.6059.422 MagIC Net 4.2 Professional: 1ライセンス



