


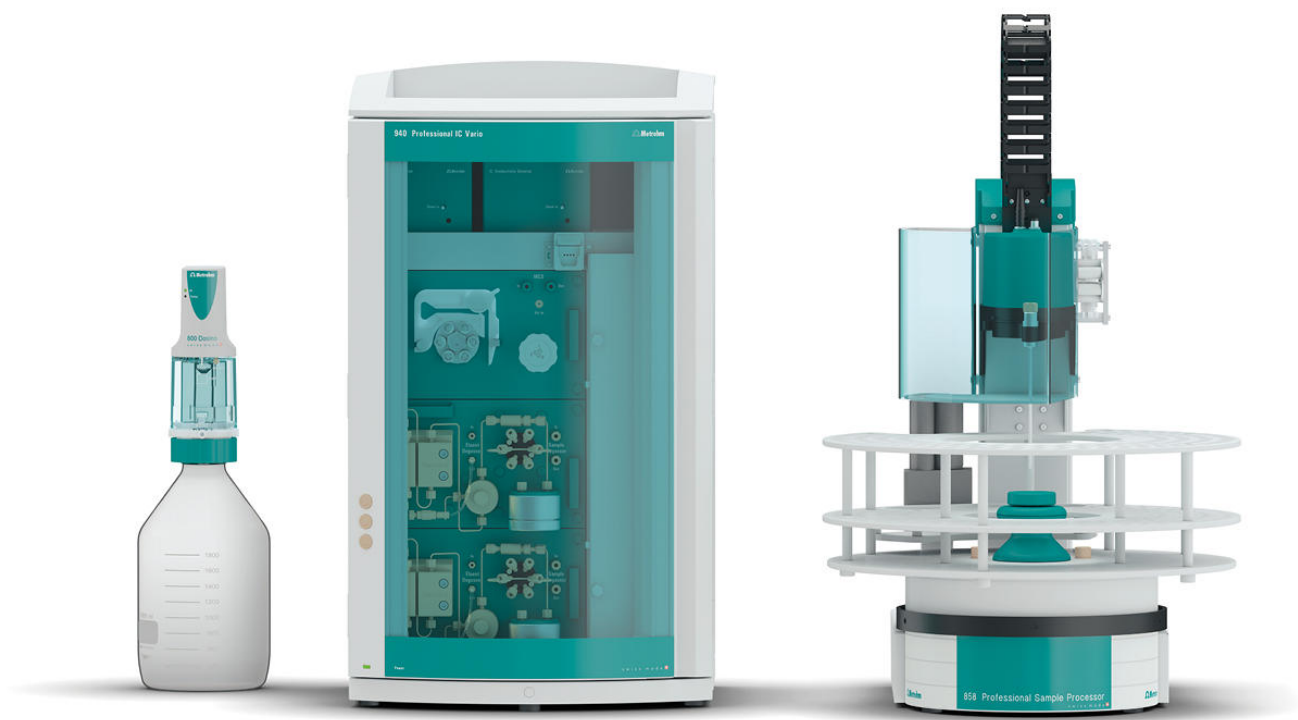

「ProfIC Vario 15 AnCat」 – Metrohmのインテリジェント可変注入テクニック (MiPT) を備えた Professional IC Vario システム

ProfIC-Vario-15-AnCat

Metrohmのインテリジェント可変注入テクニック、連続サプレッション、電気伝導度検出を備えた Professional IC Vario システムは、陰イオンと陽イオンを完全自動測定することができます。可変注入「Partial-Loop-Injektion」により、様々なサンプル量での作業を行うことが可能です。

典型的な使用領域:

- あらゆる種類のサンプルに汎用的に適用可
- 微量分析から排水分析まで
- サンプルシリーズ内で濃度差が大きいもの

概略図

設置マニュアル

納品範囲 ProFI-C-Vario-15-AnCat

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	2.940.2500	940 Professional IC Vario TWO/SeS/PP
940 プロフェッショナル IC Vario TWO/SeS/PP は連続サプレッション（1チャンネル）とサプレッサー再生のためのペリスタリックポンプを備えた2チャンネルタイプの-IC装置です。この装置は任意の分離メソッドおよび検出メソッドによって使用することができます。 典型的な使用領域: - 陰イオンおよび陽イオンの並行測定のための標準装置 - 陰イオンおよび陽イオンのためのトレース分析 - 陰イオンおよび陽イオンのオンラインモニタリング		
2 PCS	2.850.9010	IC Conductivity Detector
インテリジェントIC装置のためのコンパクトかつインテリジェントな高出力電気伝導度検出器。優れた温度安定性、保護された検出器ブロック内の総合的な信号処理、最新版のDSP (Digital Signal Processing) が高精度の測定を保証します。稼動範囲がダイナミックなので測定範囲の変更は（自動のものも含めて）必要ありません。		
1 PCS	2.858.0010	858 Professional Sample Processor
858 プロフェッショナルサンプルプロセッサは、500 μLから500 mLまでのサンプルを処理します。サンプルは850 プロフェッショナル IC システム のペリスタリックポンプまたは800 ドジーノ電動ビュレットを使用することによって転送されます。		



1 PCS

2.800.0010

800 Dosino

800 Dosino 高性能電動ビュレットのドージングユニット用書き込み・読み取り用ハードウェア付き駆動部。固定されたケーブル付き（長さ150 cm）。



1 PCS

6.5330.180

ICアクセサリ: MiPT

パーシャルループインジェクションのドジーノ設置のための付属品セット。



1 PCS

6.1825.290

PEEK sample loop 250 µL



1 PCS

6.1841.000

PEEK transfer capillary 2 mL, 5 m



1 PCS

6.2744.080


M6 thread / UNF 10/32 adapter



1 PCS

6.2744.290

T connector 3 × UNF 10/32 with holder

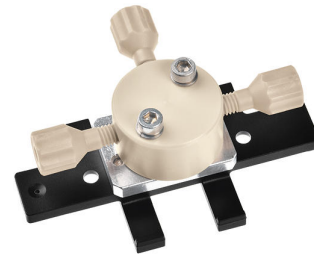

オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.2041.760	Sample rack 54 x 11 mL + 1 x 300 mL	
6.2041.440	サンプルラック、148 x 11 mL および 3 x 300 mL、(ポリ塩化ビニル製) 148 個のサンプル容器および3個のリンスボトルに適した 858 Professional Sample Processor、815 Robotic USB Sample Processor XLのためのサンプルラック。以下のサンプル容器およびリンスボトルを使用することができます: 6.2743.050、6.1608.080、6.1627.000、6.2743.040。 合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)	
6.2743.040	PP バイアル、2.5 mL、2000 個 2.5 mL。2000 個。IC Sample Processors 用。 ICサンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン (PP) 樹脂製です。製造および梱包は、無菌室およびクリーンルーム (DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7) の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。	
6.2743.050	サンプル容器 11 mL 2000 個。IC Sample Processors および VA Autosampler 用。 IC サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン (PP) 樹脂製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム (DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7) の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。	



6.1050.420 Metrosep C 4 - 150/4.0

Metrosep C 4 - 150/4.0は、短時間で高い分離性能を示す、マイクロボア分離カラムの陽イオン分析における汎用的な標準カラムです。
Metrosep C 4 - 150/4.0は、水性溶媒中のアルカリ金属およびアルカリ土類金属の分析に理想的な分離カラムです。



6.1050.500 Metrosep C 4 Guard/4.0

Metrosep C 4 Guard/4.0 は C 4 カラム素材を含み、シリカゲルを基材とする全ての Metrosep 陽イオンカラムを保護します。粒子状物質や汚れを確実に抑え、その結果分析用分離カラムの耐用期間が格段に長くなります。手頃な値段もさらなるプラスポイントの1つです。
Metrosep C 4 Guard/4.0 は «On Column Guard System» に則して機能し、それぞれの分離カラムにほぼデッドボリュームなしで直接取り付けすることができます。



6.2842.000 MSM-HC Rotor A





アダプタスリーブを用いれば、MSM Rotor A と MSM-LC Rotor A のいずれも、ローターハウジングに取り付けることができます。



941 溶離液生成モジュールにより、溶離液の自動製造が可能となります。このモジュールは、手動で介入しなくても連続して処理することを可能にし、安定した保持時間を保証します。このモジュールはあらゆるメトロームのICデバイスと接続させることができ、MagIC Netによって制御されます。



6.5330.090 ICアクセサリ: 溶離剤生成モジュールの追加溶離剤

溶離液生成モジュールの付属品セット 溶離剤拡張のための全てのパーツを含みます。レベルセンサーは用途に応じてご注文ください。



2.800.0010 800 Dosino

800 Dosino 高機能電動ビュレットのドージングユニット用書き込み・読み取り用ハードウェア付き駆動部。固定されたケーブル付き（長さ150 cm）。



6.2769.110 EMPTY sensor for level sensor for 2 L bottles



6.6059.422 MagIC Net 4.2 Professional: 1ライセンス



