



蠕动泵模块（2 通道）

2.1016.0010

用于安装到 OMNIS Sample Robots Pick&Place 模块支架中的模块。此工作站配备一台冲洗和抽液泵。可用于清洁 Pick&Place 模块中的传感器并在分析完成之后、重新将样品杯放回样品盘之前将其清空。

Scope of delivery 2.1016.0010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.1016.0030	蠕动泵模块（2 通道）

用于安装在 OMNIS Sample Robots Pick&Place 支架模块中的模块。该工作站配备有一台冲洗泵和一台抽液泵。可用于清洁 Pick&Place 取放模块中的传感器并在分析完成后、重新将样品杯放回样品盘之前将其清空。



1 PCS

6.01543.100

自动抽吸尖管

抽吸尖管，用于自动 OMNIS 滴定法。



2 PCS

6.1621.000

容器，10升

用在自动系统中作为冲洗液或废液桶。



2 PCS

6.1621.100

10升的桶的盖子

10升的桶的盖子。可对充满液体的桶方便、安全地进行运输



1 PCS

6.01803.000


硅管 8/12 2.5 m

硅管用于连接 Pick&Place 取放模块及泵模块的排放口，并可将溢出的溶液安全地导入废液罐中。



3 PCS 6.01805.000 FEP 管路连接 / M6 / 66.5 cm

带遮光罩和弯折保护。

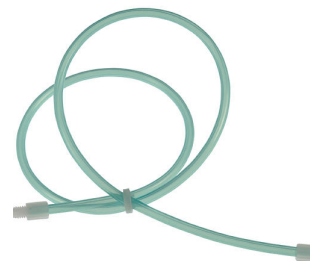

1 PCS 6.01805.010 PTFE（聚四氟乙烯）管路连接 / M8 / 66.5 cm

带遮光罩和弯折保护。



2 PCS 6.1828.000 PVDF 螺纹接套

用于容器 6.1621.000。



3 PCS 6.2740.020 冲洗喷嘴

用于均匀喷洒冲洗液。



1 PCS

6.2709.070 导向套管 (Guiding sleeve)

用于624, 673, 674样品转换器及6.2021.020与6.2021.030电极架上使用的6.1543.XXX tips



1 PCS

6.05001.010 “蠕动”泵模块附件组 (2 通道)

此附件组含有“蠕动”泵模块上冲洗和抽吸泵软管连接所需的所有组件。除了带 Luer 接头的预装配软管之外还包括每种各两个压紧夹和泵管。



1 PCS

6.01804.500 排出管的软管适配器

Pick&Place 取放模块上排出管的软管适配器和 OMNIS Sample Robot Pick&Place 中的泵模块。



Optional accessories

Order no.	Description
6.05800.030	升级蠕动泵模块 该套件包含用于将一个蠕动泵模块（2 通道）在 OMNIS Sample Robot Pick&Place 里升级为蠕动泵模块（4 通道）所需的所有组件。除了所需的泵以外，包含了所有所需的管和容器，以便分别装备另一台冲洗和抽液泵。 
6.05700.010	OMNIS 泵模块耗材套件（2 通道） 每两根泵软管和所属的压力夹钳，用作 OMNIS 泵模块内的备件。使用一个耗材套件可以重新装配泵模块的两个蠕动泵。 
6.05001.010	“蠕动”泵模块附件组（2 通道） 此附件组含有“蠕动”泵模块上冲洗和抽吸泵软管连接所需的所有组件。除了带 Luer 接头的预装配软管之外还包括每种各两个压紧夹和泵管。 
6.05800.080	升级蠕动泵模块 该套件包含用于将一个“蠕动”泵模块（2 通道）在 OMNIS Sample Robot Pick&Place 里升级为“蠕动”泵模块（4 通道）所需的所有组件。除了所需的泵以外，包含了所有所需的管和液罐，以便分别装备另一台冲洗和抽液泵。与 OMNIS Software 版本 2.13.2、2.17 或以上兼容。 