



OMNIS Workstation Module (1T/2P)

2.1024.0020

用于安装到 OMNIS Sample Robot WSM 中的模块。该模块包含一个用于自动处理样品容器的工作站和两台用于自动清洁（冲洗和抽吸）样品容器和传感器的泵。该工作站可置放分析用的样品杯。两次分析之间会将所使用的传感器在工作站的存储杯中进行清洁或置放。如果分析时需要搅拌，则必须为该工作站安装独立的棒式搅拌器或磁力搅拌器。

Scope of delivery 2.1024.0020

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.1024.0020	OMNIS Workstation Module (1T/2P)

用于安装到 OMNIS Sample Robot WSM 中的模块。该模块包含 1 个用于自动处理样品容器的工作站和 2 台用于自动清洁（冲洗和抽吸）样品容器和传感器的泵。该工作站可置放分析用的样品杯。两次分析之间会将所使用的传感器在工作站的存储杯中进行清洁或置放。如果分析时需要搅拌，则必须为该工作站安装独立的棒式搅拌器或磁力搅拌器。



1 PCS

6.01543.100 自动抽吸尖管

抽吸尖管，用于自动 OMNIS 滴定法。



1 PCS

6.01804.500 排出管的软管适配器


Pick&Place 取放模块上排出管的软管适配器和 OMNIS Sample Robot Pick&Place 中的泵模块。



3 PCS

6.01805.000 FEP 管路连接 / M6 / 66.5 cm

带遮光罩和弯折保护。

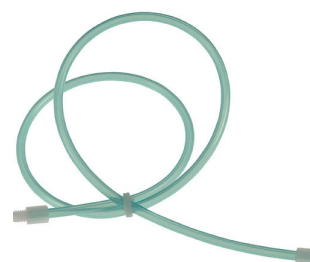

1 PCS

6.01805.010 PTFE（聚四氟乙烯）管路连接 / M8 / 66.5 cm

带遮光罩和弯折保护。



1 PCS

6.02705.000

软管和电缆槽

用于整理敷设 Pick&Place 取放模块和滴定仪之间的软管和电缆



1 PCS

6.05001.110

附件包 WSM (1T/2P)

此附件包含有 OMNIS Workstation Module (1T/2P) 泵模块上冲洗和抽液泵管路安装所需的所有组件。除了带 Luer 接头的预装配软管之外还包括每种各 2 个压紧夹和泵管。另外还有 1 套可以将 Luer 式接头方便地安装到套件中的工具。



2 PCS

6.1621.000

容器, 10升

用在自动系统中作为冲洗液或废液桶。



2 PCS

6.1621.100

10升的桶的盖子

10升的桶的盖子。可对充满液体的桶方便、安全地进行运输



1 PCS

6.2709.070

导向套管 (Guiding sleeve)

用于624, 673, 674样品转换器及6.2021.020与6.2021.030电极架上使用的6.1543.XXX tips



3 PCS

6.2740.020

冲洗喷嘴

用于均匀喷洒冲洗液。




Optional accessories

Order no.	Description	
6.01403.000	滴定头 6xNS14/ 3xNS9 (P&P)	
	具有 6 NS14 和 3 NS 9 开孔的滴定头，可用于 OMNIS Sample Robot Pick&Place 的 Pick&Place 取放模块中	
6.01403.010	滴定头 4xM10 (P&P)	
	具有 4 M10 开孔的滴定头，可用于 OMNIS Sample Robot Pick&Place 的 Pick&Place 取放模块中	
6.01403.020	滴定头 4xM10，用于卡尔·费休滴定法（P&P）	
	具有 4 M10 开孔的滴定头，可用于具有 4 M10 螺旋接头和塞子的 OMNIS Sample Robot Pick&Place 的卡尔·费休滴定法。	
6.01403.030	滴定头 3 个 NS14/ 4 个 6.4mm (P&P)	
	具有 3 个 NS14 和 4 个 6.4 mm 开孔的滴定头，可用于 OMNIS Sample Robot Pick&Place（配备 2 个收回的加液器尖管）的 Pick&Place 取放模块中的 120 mL 样品杯。已准备好装备冲洗和抽吸管。	

6.01403.040 滴定头 2xNS14 (P&P)

带有 2 个 NS14 开口的滴定头，用于 OMNIS Sample Robot Pick&Place 取放模块，以及三个剂量提示装置。准备装配冲洗喷嘴。抽吸软管已经被放入滴定头中。

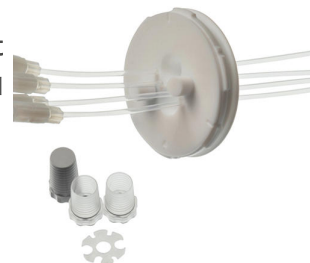

6.01403.050 KFT 滴定法用滴定头，带加强型滴定管头 (P&P)

OMNIS Sample Robot Pick&Place 的 Pick&Place 取放模块中用于卡尔·费休滴定法的滴定头。该滴定头除了 2 个加强版防扩散滴管头外，还提供了供使用一个均质匀浆仪 (Polytron 1300D) 或棒式搅拌器的开孔。



6.01403.060 滴定头 3 个 NS14/4 个 6.4mm，用于 200 mL 一次性样品杯 (P&P)

具有 3 NS14 和 4x 6.4 mm 开孔的滴定头，可用于 OMNIS Sample Robot Pick&Place (配备 2 个收回的加液器尖管) 的 Pick&Place 取放模块中的 200 mL PP 一次性样品杯 (6.1459.310) 或 150 mL 玻璃烧杯 (高形状，无喷口)。已准备好装备冲洗和抽吸管。



6.01404.020 样品杯200 mL 的烧杯适配器

烧杯适配器，可将 200 mL 样品杯在 Pick&Place 取放模块的滑台中居中定位。



6.01404.030 烧杯适配器，用于 OMNIS 120 mL 样品杯

烧杯适配器，可将 120 mL 样品杯在 Pick&Place 取放模块的滑台中居中定位



6.01404.040 烧杯适配器，用于 OMNIS 75 mL 样品杯

烧杯适配器，可将 75 mL 样品杯在 Pick&Place 取放模块的滑台中居中定位



6.01404.050 烧杯适配器，用于 150 mL 样品杯

烧杯适配器，可将 150 mL 样品杯在 Pick&Place 取放模块的滑台中居中定位。



2.1006.0010 OMNIS Rod Stirrer Sample Robot

棒式搅拌器，可直接连接至 OMNIS Sample Robot，带有固定安装的电缆（2.5米）。



6.05800.540 升级 Pick&Place 取放模块 WSM

该套件包含为现有 OMNIS Workstation Module (1T/0P) 或 (1T/2P) 扩展第二个工作站所需的所有组件。通过扩展，可使样品吞吐量加倍。



6.05800.560 升级搅拌器 WSM

该套件包含为 OMNIS Workstation Module 的工作站配备磁力搅拌器所需的所有组件。



6.05800.570 升级蠕动泵模块 WSM

该套件包含为 OMNIS Workstation Module 升级 2 台泵所需的所有组件。套件既可在从 0 扩展为 2 台泵时，也可以在从 2 台泵扩展为 4 台泵时使用，可以有效地清洁传感器和样品容器。除了所需的泵以外，包含了所有所需的管和液罐，以便分别装备 1 台冲洗和抽液泵。



6.02700.020 WSM 连接板

该连接板在 1 个 Sample Robot WSM M 或 L 上连接 2 个 OMNIS Workstation Module，为其赋予额外的稳定性。



6.05700.010 OMNIS 泵模块耗材套件 (2 通道)

每两根泵软管和所属的压力夹钳，用作 OMNIS 泵模块内的备件。使用一个耗材套件可以重新装配泵模块的两个蠕动泵。



6.05001.110 附件包 WSM (1T/2P)

此附件包含有 OMNIS Workstation Module (1T/2P) 泵模块上冲洗和抽液泵管路安装所需的所有组件。除了带 Luer 接头的预装配软管之外还包括每种各 2 个压紧夹和泵管。另外还有 1 套可以将 Luer 式接头方便地安装到套件中的工具。



6.01462.010 滴定头适配器

该适配器可在带螺旋式滴定头的自动进样器上使用 Sample Processor Generation (814/815/855) 的滴定头。

