



Power Pack Heavy Metals（手册）

2.797.3010

通过伏安法测定热电厂内各类水-蒸汽回路中关键重金属的浓度的基本套件。该系统由一台 797 VA Computrace 和两台 800 Dosino 组成，可全自动完成对各样品的测定。在手动进样后，无需使用者操作，可通过两台 800 Dosino 加液单元自动添加辅助溶液和标准溶液。

Scope of delivery 2.797.3010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.797.0010	797 VA Computrace 用于痕量分析

797 VA Computrace 是一台现代化的伏安法测量台，通过一个 USB 端口连接到计算机上。随附的计算机软件用来控制测量、采集测量数据并对其进行评估。清晰明了的程序结构，使其操作前所未有的方便。内置带恒电流仪的恒电位仪，确保灵敏度极高且噪声极低。

用于分析痕量和成分构成的伏安系统。全套附件包括 VA Computrace 软件和用于整个测量系统的所有电极：多模式电极 pro (MME pro)、Ag/AgCl 参比电极和 Pt (铂) 辅助电极。



1 PCS 6.6053.030 797 VA Computrace 软件 CD 1.3

用于 797 VA Computrace 的控制和评估软件。用于操作系统 Windows[®] 2000、Windows[®] XP Professional、Windows[®] Vista (32 位) 和 Windows[®] 7 (32 位)。



1 PCS 6.1204.200 VA Stand 工作站的搅拌器

VA Stand 工作站的搅拌器，全套，非金属



1 PCS 6.1226.030 滴汞毛细管（非硅烷化），用于MME

非硅烷化的滴汞毛细管（10根），包括两只硅烷密封圈



1 PCS 6.1226.050 滴汞毛细管（硅烷化），用于MME


硅烷化滴汞毛细管（10根），包括两只硅烷密封圈



1 PCS

6.1244.020 驱动皮带

用于VA Stand 工作站上的旋转圆盘电极与搅拌器（3片）。

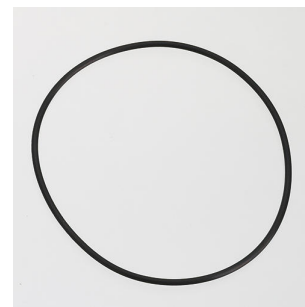

1 PCS

6.1245.010 塑料材质电解液容器

带隔膜的塑料电解液容器，用于双接点参比电极。



1 PCS

6.1247.020 用于MME的针

用于多功能汞电极（3件）。



1 PCS

6.1415.210 滴定杯 / 10至90毫升



7 PCS

6.1446.040

堵头螺丝 / M6



2 PCS

6.1546.030

活塞钳

用于 807 Dosing Unit 的活塞或者计量管单元 OMNIS。



1 PCS

6.1608.050

卡氏炉干燥瓶 / 100毫升 / GL 45



1 PCS

6.1608.090

试剂瓶 / 250毫升 / GL 45



2 PCS

6.1618.060

螺纹转接头 / GL 45 转 GL 45

螺纹转接头 (GL 45 转 GL 45) ; 主要用于带有升高法兰的试剂瓶



1 PCS

6.1801.080

用于氮气接口的软管。

用于伏安极谱仪的供气



1 PCS

6.1805.020

FEP管 / M6 / 52厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS

6.1805.120

FEP管 / M6 / 100厘米

带光照保护和扭折保护



4 PCS

6.1808.000

连接套筒, M6



1 PCS

6.1819.010

聚四氟乙烯管

作为 VA Stand 的洗气瓶的气体入口



1 PCS

6.1824.000

四路微量量管

带有 4 个螺纹 M6。用于 VA 伏安法测量台。



1 PCS

6.2013.010

定位环

用于直径为 10 mm 的支架杆。



1 PCS

6.2016.050

支撑杆 / 300毫米



1 PCS

6.2021.020

电极架

电极架，可用于4只电极与2只滴定头



1 PCS

6.2055.100

试剂瓶固定器，双瓶

试剂瓶固定器，用于2只1升的试剂瓶。用于6.5617.000吸液设备



1 PCS

6.2151.020

电缆，USB A - USB B，1.8米

USB连接电缆



1 PCS

6.2161.010

插入式电源单元, 欧盟 230V/6V DC

电源, 用于827型 pH lab



1 PCS

6.2308.020

电解液, 3 mol/L KCl (250 mL)

电解液c (KCl) = 3 mol/L, 250 mL (用于Ag/AgCl参比系统)



1 PCS

6.2406.000

汞滴俘获器

银丝 (用于通过汞齐作用俘获汞滴)



1 PCS

6.2621.070

内六角扳手, 5 mm, 用于 IC Sample Processor



1 PCS

6.2703.000

滴定杯的托环



1 PCS

6.2709.080

塞子，用于移液开孔

用于694, 747 型 VA 主机 及伏安极谱仪



1 PCS

6.2711.030

用于充满 MME 的承接盘

用于 884 Professional VA、797 VA Computrace、757 VA Computrace 以及 647, 663, 694, 747 VA Stands



1 PCS

6.2711.040

盘子，用于VA Computrace 伏安极谱仪



1 PCS 6.2739.000 扳手

用于拧紧连接器



1 PCS 6.2816.020 注射器，10毫升，带Luer接头。

用于许多种 IC 及 VA 应用



1 PCS 6.2816.030 带 Luer 式接头的针头

用于在多模式电极中加注水银的针头和用于在卡尔·费休滴定法中添加样品的针头。



1 PCS 6.3032.120 807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit，带内置的数据芯片，2 mL 玻璃计量筒和遮光罩，可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



1 PCS

6.3032.150

807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 5 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



1 PCS

6.1246.120

Multi-Mode-Electrode pro多模式电极专业版

用于伏安法的汞电极。可作为 DME、SMDE 或 HMDE 使用。

