



831 KF Coulometer, 配备有隔膜的发生电极

2.831.0010

价格实惠的库仑法卡氏水分测定仪，配备有滴定杯和发生电极、带隔膜，用于水分测定，可达至微量范围。

因其性能可靠、有带背光的图形显示、多语种对话以及简单操作，此电量计在许多实验室中已经无可或缺。清晰地显示出重要滴定参数，并明确地以曲线形式（ μg 水对应时间）表明滴定过程。

建议的测量范围：10 μg - 200 mg 绝对水量

Scope of delivery 2.831.0010

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------



可安装在一根直径为10毫米的立架杆（stand rod）上；不带底板（或固定器），不带立架杆（stand rod）；不带电源适配器，带固定连接电缆。



指示电极，用于库仑法卡尔费休滴定。



带隔膜的发生电极，用于电量式卡尔·费休滴定法，标准磨口 29/22。
该发生电极特别适用于：

- 绝对水份含量很低的样品 < 50 ppm
- 油样中电量式水份测定
- 使用酮试剂的应用
- 使用了导电性差的试剂的应用（添加氯仿、二甲苯 >10%）



1 PCS 6.1403.030 至库仑法滴定杯的 KF 吸附管

用于 KF 库仑法卡氏水分测定仪。



1 PCS 6.1437.000 SGJ 塞子, SGJ 14



1 PCS 6.1446.060 塞子 / B-14/15 / M10



2 PCS 6.1448.020 垫片, 16毫米, 5片
每套5件。



1 PCS

6.1464.320

卡氏滴定杯 / 80至250毫升 / 库仑法

Für 756 und 831 KF-Coulometer



1 PCS

6.1903.030

搅拌棒 / 25 mm

带磁芯的搅拌棒，以 PTFE（聚四氟乙烯）材料包裹，长 25 mm。



1 PCS

6.2001.050

测定台（support stand），不带支撑杆

用于756，831型卡尔费休库仑水份测定仪及728型 Swing-out 式磁力搅拌器



1 PCS

6.2013.010

定位环

用于直径为 10 mm 的支架杆。



1 PCS

6.2016.030

支撑杆 / 250毫米



1 PCS

6.2047.020

滴定杯固定器

滴定杯固定器，用于库仑滴定池。用于756，831 KF库仑水分测定仪



1 PCS

6.2104.020

1米的电极电缆，F

用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。



1 PCS

6.2104.120

1米的电极电缆，H

带H型插头。用于发生电极与卡尔费休库仑水分测试仪之间的连接。



1 PCS

6.2130.090

831的键盘

831型卡尔费休库仑水份测定仪的键盘



1 PCS

6.2701.040

螺纹密封件 GL 18, 带孔

材质为 PBT。带用于隔垫 6.1448.020 的孔。用于无隔膜滴定杯 6.5405.000 和滴定管 6.1464.32X 及 6.1465.320。



3 PCS

6.2713.000

PTFE 套环 NS14

用于与标准磨口 NS 14 的无润滑油磨口连接。



1 PCS

6.2713.010

PTFE 套环 NS29

用于与标准磨口 SGJ 29 的无润滑油磨口连接的套环。



1 PCS

6.2713.020

PTFE 套环 NS19

用于与标准磨口 NS 19 的无润滑油磨口连接。



1 PCS

6.2730.030

塞子

全套带有接头和 O 型圈。用于滴定杯上部部件 6.1414.030。用于 KF 仪器、VA 测量台、VA Computrace 和 IC 稀释。



1 PCS

6.2738.000

漏斗

用于 KF 库伦法卡氏水分测定仪。



1 PCS

6.2811.000

分子筛

分子筛。瓶装250克。孔径：0.3 纳米。用于 Rancimats 及卡尔费休测试仪。



2 PCS

6.2816.030

带 Luer 式接头的针头

用于在多模式电极中加注水银的针头和用于在卡尔·费休滴定法中添加样品的针头。



2 PCS

6.2816.090

注射器 5 mL

用 PP 制成的 5 mL 注射器，带 Luer 式接头。




Optional accessories

Order no.	Description
2.860.0010	860 KF Thermoprep卡氏炉 860 卡氏炉是为卡尔费休滴定中加热制备样品而设计的。许多物质因为不溶解，与卡尔费休试剂反应，水分释放 缓慢或需要加热到 很高温度，所以不能直接使用卡氏滴定仪测定。把样品装在密封的样品杯中，而后把样品放在炉子里。随后样品即可被任一卡氏滴定仪分析。 
6.1464.323	KF 滴定杯 / 80 - 250 mL / 电量 / 棕色玻璃 
6.1465.320	带两个侧孔的卡氏滴定杯 / 80至250毫升 / 库仑法 用于756与831型库仑水份测定仪 
6.5406.000	电量分析的 KF 装备，包括带隔膜的发生电极 全套附件，用于 KF 库仑法卡氏水分测定仪。 

6.5406.010 电量分析的 KF 装备，包括无隔膜的发生电极

全套附件，用于 KF 库仑法卡氏水分测定仪。

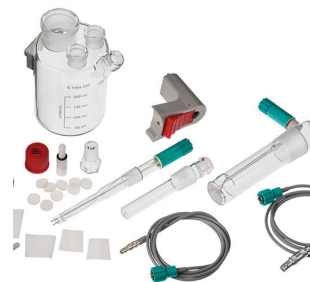

6.1439.010 KF 输送吸管

用于电量滴定杯的 KF 输送吸管，包括 M8 螺纹套管接头 6.1811.010。

