



Salt Titrino plus

2.848.2010

用于 Salt Titrino plus 为您提供用于分析不同样品中氯化物的完整工具包。除详细描述测量方法外，您还会获得用于滴定的整套附件。在设备包中含有滴定仪、磁力搅拌器以及一个 Ag-Titrode、一个用于硝酸银沉淀滴定的免维护电极。

Scope of delivery 2.848.2010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.848.0010	848 Titrino plus

紧凑型滴定仪，用于

- 通过自动等当点识别进行动态等当点滴定 (DET)
- 通过自动等当点识别进行等量等当点滴定 (MET)
- 终点设定滴定 (SET)



1 PCS

1.801.0010

801 Stirrer

无三角支架的磁力搅拌器，补充用于 Titrino plus、Dosimat plus、Titrando、Sample Processor、805 Dosimat 和 780/781 pH Meter。带有固定安装的、用于 MSB（万通串行总线接口）的线缆。



1 PCS

6.1903.020

搅拌子 / 16 毫米

带磁芯的搅拌子，带PTFE外涂层，长度：16 毫米



1 PCS

6.1903.030

搅拌棒 / 25 mm

带磁芯的搅拌棒，以 PTFE（聚四氟乙烯）材料包裹，长 25 mm。



1 PCS

6.2001.060

测定台（support stand），不带支撑杆

用于将一台801，804或803型搅拌器连接到一台Titrando或805型Dosimat数字计量加液器上。



1 PCS

6.2013.010

定位环

用于直径为 10 mm 的支架杆。



1 PCS

6.2016.070

支撑杆 / 400毫米



1 PCS

6.2021.020

电极架

电极架，可用于4只电极与2只滴定头



1 PCS

6.2104.020

1米的电极电缆，F

用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。



1 PCS

6.2147.000

数字 USB 键盘

数字 USB 键盘，用于 Titrino plus、Dosimat plus、862 Compact Titrosampler、869 Compact Sample Changer、863 Compact Autosampler 和 899 Coulometer。带两个集成的 USB 接口。



1 PCS

6.2151.100

USB适配器，MINI (OTG) / USB A

用于连接的USB仪器。



1 PCS

6.2621.070

内六角扳手，5 mm，用于 IC Sample Processor



1 PCS

6.2621.130

六角扳手 (Hexagon key) ， 2毫米

2 mm.



1 PCS 6.2723.310 Titrino Plus 的保护罩盖

显示屏和键盘的保护罩盖，用于 Titrino plus 系列的所有仪器。

适用于：848 Titrino plus、862 Compact Titrosampler、863 Compact Autosampler、865 Dosimat plus、869 Compact Sample Changer、870 KF Titrino plus、876 Dosimat plus、877 Titrino plus、899 Coulometer。



1 PCS 6.2739.010 扳手

用于交换单元



1 PCS 6.3026.220 20毫升的交换单元

交换单元内置数据芯片，20毫升玻璃计量管和避光保护壳。 PCTFE /PTFE平面旋塞阀（stopcock），FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶



1 PCS 6.6061.010 Titrino plus 所用的存有方法的记忆棒

包括可直接输入 Titrino plus 的食品 PAC、葡萄酒 PAC、油 PAC的方法。



带pH玻璃膜的复合银环电极

该免维护电极适用于 pH 值恒定的沉积滴定（硝酸银滴定剂），例如：

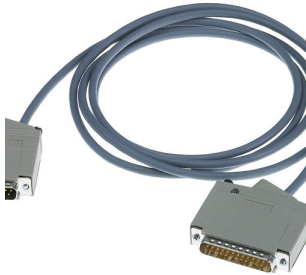
- 氯化物、溴化物、碘化物
- 硫化物
- 硫化氢
- 硫醇
- 氰化物



该电极存放在蒸馏水中。

根据具体应用，建议使用带涂层的银 Titrode（AgBr、AgCl 或 Ag₂S 涂层），其可以相应订购。

Optional accessories

Order no.	Description	
6.2141.230	远程连接集成型样品处理系统/集成型自动样品处理系统 和 Titrino plus - /泵单元的电缆。 远程连接集成型样品处理系统/集成型 自动样品处理系统 和 Titrino plus 和/或 泵单元的电缆。	
6.2141.240	远程电缆 Dosimat plus - 集成型样品处理系统/Titrino plus 远程连接 Dosimat plus 和集成型样品处理系统和/或 Titrino plus 的电缆，使用 6.2141.260 电缆。	
6.2141.250	远程电缆 集成型样品处理系统 - Titrino C远程连接集成型样品处理系统和Titrinos的带25-针远程插座的电缆。	
6.2141.260	远程线缆控制的集成型样品处理系统- Dosimat plus and Titrino plus 远程连接集成型样品处理系统与 Dosimat plus 和 其他设备(例如 Titrino plus or 泵单元)的电缆。	

6.2151.120 USB 电缆，1.8 米
用于连接的USB仪器。



6.3026.110 1毫升的交换单元

智能型加液单元，配有1毫升的玻璃计量管和光保护。 PCTFE/PTFE平面旋塞阀（stopcock）， FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶



6.3026.150 5毫升的交换单元

交换单元内置数据芯片，5毫升玻璃计量管和避光保护壳。 PCTFE/PTFE平面旋塞阀（stopcock）， FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶



6.3026.210 10毫升的交换单元

交换单元内置数据芯片，10毫升玻璃计量管和避光保护壳。 PCTFE/PTFE平面旋塞阀（stopcock）， FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶



6.3026.250 交换单元 50 mL

带内置芯片的交换单元，带 50 mL 玻璃计量管及遮光罩。PCTFE/PTFE 平头旋塞、FEP 管路连接、防扩散滴管头和由棕色玻璃制成的标准试剂瓶。



2.142.0100 热敏打印机 Custom Q3X

带 USB 接口的一体型打印机，用于

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (电缆 6.2151.140)
- Eco Dosimat / 滴定仪
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



纸宽 60 mm (40 个字符)。包括 USB 电缆 6.2151.120。
