



Oil Titrino plus

2.848.3010

Oil Titrino plus 为您提供用于测定石油产品酸碱值的完整套件。除详细描述测量方法外，您还会获得用于滴定的整套附件。在设备包中含有滴定仪、棒式搅拌器以及一个 Solvotrode easyClean、用于非水溶液滴定的特殊 pH 玻璃电极。

Scope of delivery 2.848.3010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.848.0010	848 Titrino plus

紧凑型滴定仪，用于

- 通过自动等当点识别进行动态等当点滴定 (DET)
- 通过自动等当点识别进行等量等当点滴定 (MET)
- 终点设定滴定 (SET)



1 PCS

1.802.0010

802型杆式搅拌器，用于727型 滴定台

杆式搅拌器，带分开的6.2137.000速度控制器及6.1909.010螺旋桨搅拌器。



1 PCS

1.804.0010

804型滴定台，不带立杆

滴定台及802型杆式搅拌器的控制器。如果与802型杆式搅拌器联用，则可为您在磁力搅拌器之外提供了另一选择。不含配件。



1 PCS

6.0229.010

Solvotrode easyClean (1.2 m 固定电缆)

带灵活的 easyClean 隔膜的组合 pH 电极和固定电缆 (1.2 m) 用于所有非水性酸/碱滴定。

玻璃膜针对导电性差的溶液进行了优化，并且由于易于清洁的 easyClean 隔膜，该电极也适用于非常脏的样品（例如：旧油）。电极可与非水参比电解质（氯化锂或四乙基溴化铵）一起使用。储存在相应的参比电解质中。

物品编号为 6.0229.020 的 Solvotrode easyClean 同样有 2.0 m 固定电缆长度的版本可供选购。



1 PCS

6.1909.010

搅拌螺旋桨 / 87 毫米

螺旋桨搅拌器，从SGJ的低边算起长度为： 96 毫米。用于测量杯，用于722型，802型棒式搅拌器



1 PCS

6.2001.060 测定台 (support stand)，不带支撑杆

用于将一台801，804或803型搅拌器连接到一台Titrande或805型Dosimat数字计量加液器上。



1 PCS

6.2013.010 定位环

用于直径为 10 mm 的支架杆。



1 PCS

6.2016.070 支撑杆 / 400毫米



1 PCS

6.2021.020 电极架

电极架，可用于4只电极与2只滴定头



1 PCS

6.2147.000

数字 USB 键盘

数字 USB 键盘，用于 Titrino plus、Dosimat plus、862 Compact Titr sampler、869 Compact Sample Changer、863 Compact Autosampler 和 899 Coulometer。带两个集成的 USB 接口。



1 PCS

6.2151.100

USB适配器，MINI (OTG) / USB A

用于连接的USB仪器。



1 PCS

6.2320.000

TEABr, 0.4 mol/L, 溶解于乙二醇 (250 毫升)

电解液 TEABr (溴化四乙基铵, 溶解于乙二醇), $c(\text{TEABr}) = 0.4 \text{ mol/L}$, 250毫升



1 PCS

6.2621.070

内六角扳手，5 mm，用于 IC Sample Processor



1 PCS 6.2621.130 六角扳手 (Hexagon key) , 2毫米
2 mm.



1 PCS 6.2723.310 Titrino Plus 的保护罩盖

显示屏和键盘的保护罩盖, 用于 Titrino plus 系列的所有仪器。

适用于: 848 Titrino plus、862 Compact Titrosampler、863 Compact Autosampler、865 Dosimat plus、869 Compact Sample Changer、870 KF Titrino plus、876 Dosimat plus、877 Titrino plus、899 Coulometer。



1 PCS 6.2739.010 扳手
用于交换单元



1 PCS 6.3026.220 20毫升的交换单元

交换单元内置数据芯片, 20毫升玻璃计量管和避光保护壳。 PCTFE /PTFE平面旋塞阀 (stopcock) , FEP连接管, 防扩散滴定头, 及标准琥珀色玻璃试剂瓶



包括可直接输入 Titrino plus 的食品 PAC、葡萄酒 PAC、油 PAC 的方法。




Optional accessories

Order no.	Description	
6.0229.100	Solvotrode 适用于所有非水酸/碱滴定的组合 pH 电极。玻璃膜针对导电性差的溶液进行了优化，并且由于灵活的套结，该电极也适用于非常脏的样品。此电极可与非水参比电解质（氯化锂或四乙基溴化铵）一起使用。储存在相应的参比电解质中。	
6.2104.020	1米的电极电缆，F 用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。	
6.2141.230	远程连接集成型样品处理系统/集成型自动样品处理系统 和 Titrino plus - /泵单元的电缆。 远程连接集成型样品处理系统/集成型 自动样品处理系统 和 Titrino plus 和/或 泵单元的电缆。	
6.2141.240	远程电缆 Dosimat plus - 集成型样品处理系统/Titrino plus 远程连接 Dosimat plus 和集成型样品处理系统和/或 Titrino plus 的电缆，使用 6.2141.260 电缆。	

6.2141.250 远程电缆 集成型样品处理系统 - Titrino

C远程连接集成型样品处理系统和Titrinos的带25-针远程插座的电缆。

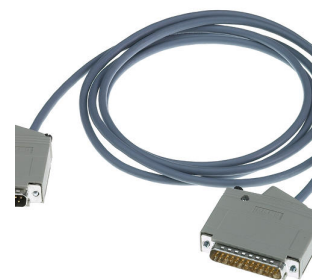

6.2141.260 远程线缆控制的集成型样品处理系统- Dosimat plus and Titrino plus

远程连接集成型样品处理系统与 Dosimat plus 和 其他设备(例如 Titrino plus or 泵单元)的电缆。



6.2151.120 USB 电缆, 1.8 米

用于连接的USB仪器。



6.3026.110 1毫升的交换单元

智能型加液单元, 配有1毫升的玻璃计量管和光保护。PCTFE/PTFE平面旋塞阀 (stopcock), FEP连接管, 防扩散滴定头, 及标准琥珀色玻璃试剂瓶



6.3026.150 5毫升的交换单元

交换单元内置数据芯片，5毫升玻璃计量管和避光保护壳。 PCTFE/PTFE平面旋塞阀（stopcock），FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶



6.3026.210 10毫升的交换单元

交换单元内置数据芯片，10毫升玻璃计量管和避光保护壳。 PCTFE/PTFE平面旋塞阀（stopcock），FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶



6.3026.250 交换单元 50 mL

带内置芯片的交换单元，带 50 mL 玻璃计量管及遮光罩。PCTFE/PTFE平头旋塞、FEP 管路连接、防扩散滴管头和由棕色玻璃制成的标准试剂瓶。



带 USB 接口的一体式打印机，用于

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (电缆 6.2151.140)
- Eco Dosimat / 滴定仪
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



纸宽 60 mm (40 个字符)。包括 USB 电缆 6.2151.120。
