



851 Titrando, 配备 Touch Control 和带隔膜的发生电极

2.851.0020

库仑法卡氏水分测定仪包括带隔膜的发生电极和、Touch Control 和 801 Stirrer。

对于痕量区域（10 μg 至 10 mg 绝对水）的水份测定来说，电量分析法是用于液态、固态和气态中的水份测定理想方法。此外，电量分析法是一种绝对方法，因此无需进行滴定度测定。

使用 851 Titrando 可简便快捷地进行电量滴定。

建议的测量范围：10 μg - 200 mg 绝对水量

使用 OMNIS-Software、tiamo-软件或 Touch Control。如果需要，满足 GMP/GLP 和 FDA 要求，比如 21 CFR 第 11 部分

Scope of delivery 2.851.0020

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.851.0010

851 Titrando

对于痕量区域（10 µg 至 10 mg 绝对水）的水份测定来说，电量分析法是用于液态、固态和气态中的水份测定理想方法。此外，电量分析法是一种绝对方法，无需进行滴定度测定。

使用 851 Titrando 可简便快捷地进行电量滴定。

建议的测量范围：10 µg - 200 mg 绝对水量



1 PCS

1.801.0010

801 Stirrer

无三角支架的磁力搅拌器，补充用于 Titrino plus、Dosimat plus、Titrande、Sample Processor、805 Dosimat 和 780/781 pH Meter。带有固定安装的、用于 MSB（万通串行总线接口）的线缆。




1 PCS

1.900.0010

900 Touch Control

Titrande、USB 样品处理器、856 Conductivity Module、867 pH Module 和 846 Dosing Interface 的操作单元。触摸灵敏、高度清晰的彩色屏幕以及可用于直接存取方法的收藏功能，都使操作能简单直观地完成。带有可直接连接到互联网上的以太网接口和用于连接 USB 打印机或 U 盘的 USB 接口。

对话框语言：德语、英语、中文、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、韩语、波兰语和意大利语。

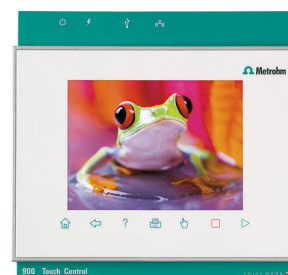

1 PCS

6.0341.100

用于库仑法分析的双铂丝电极

指示电极，用于库仑法卡尔费休滴定。



1 PCS

6.0344.100

带隔膜的发生电极

带隔膜的发生电极，用于电量式卡尔·费休滴定法，标准磨口 29/22。
该发生电极特别适用于：

- 绝对水份含量很低的样品 < 50 ppm
- 油样中电量式水份测定
- 使用酮试剂的应用
- 使用了导电性差的试剂的应用（添加氯仿、二甲苯 >10%）



1 PCS

6.1403.030

至库仑法滴定杯的 KF 吸附管

用于 KF 库仑法卡氏水分测定仪。



1 PCS

6.1437.000

SGJ 塞子, SGJ 14



1 PCS

6.1446.060

塞子 / B-14/15 / M10



2 PCS 6.1448.020 垫片，16毫米，5片
每套5件。



1 PCS 6.1464.320 卡氏滴定杯 / 80至250毫升 / 库仑法
Für 756 und 831 KF-Coulometer




1 PCS 6.1903.030 搅拌棒 / 25 mm

带磁芯的搅拌棒，以 PTFE（聚四氟乙烯）材料包裹，长 25 mm。



1 PCS 6.2001.060 测定台（support stand），不带支撑杆
用于将一台801，804或803型搅拌器连接到一台Titrande或805型
Dosimat数字计量加液器上。

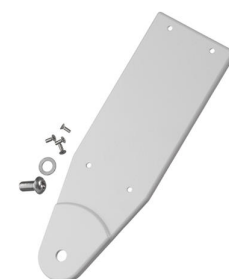

1 PCS

6.2013.010

定位环

用于直径为 10 mm 的支架杆。



1 PCS

6.2016.030

支撑杆 / 250毫米



2 PCS

6.2043.005

瓶固定夹

交换单元中试剂瓶的止动弹簧。



1 PCS

6.2047.020

滴定杯固定器

滴定杯固定器，用于库仑滴定池。用于756，831 KF库仑水分测定仪



1 PCS

6.2104.020

1米的电极电缆，F

用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。



1 PCS

6.2104.120

1米的电极电缆，H

带H型插头。用于发生电极与卡尔费休库仑水分测试仪之间的连接。



1 PCS

6.2701.040

螺纹密封件 GL 18，带孔

材质为 PBT。带用于隔垫 6.1448.020 的孔。用于无隔膜滴定杯 6.5405.000 和滴定管 6.1464.32X 及 6.1465.320。



3 PCS

6.2713.000

PTFE 套环 NS14

用于与标准磨口 NS 14 的无润滑油磨口连接。



1 PCS

6.2713.010

PTFE 套环 NS29

用于与标准磨口 SGJ 29 的无润滑油磨口连接的套环。



1 PCS

6.2713.020

PTFE 套环 NS19

用于与标准磨口 NS 19 的无润滑油磨口连接。



1 PCS

6.2730.030

塞子

全套带有接头和 O 型圈。用于滴定杯上部部件 6.1414.030。用于 KF 仪器、VA 测量台、VA Computrace 和 IC 稀释。



1 PCS

6.2738.000

漏斗

用于 KF 库仑法卡氏水分测定仪。



2 PCS

6.2816.030

带 Luer 式接头的针头

用于在多模式电极中加注水银的针头和用于在卡尔·费休滴定法中添加样品的针头。



2 PCS

6.2816.090

注射器 5 mL

用 PP 制成的 5 mL 注射器，带 Luer 式接头。



1 PCS

6.6064.010

U 盘，用于 900 Touch Control



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2103.130	2毫米插头 / 4毫米插座的红色适配器 用于将B类插头（4毫米）与780, 781 pH/离子计以及所有型号的Titrandos的2毫米插座相连。	
6.2103.140	2毫米插头 / B类4毫米插座的黑色适配器 用于将B类插头（4毫米）与离子计以及所有型号的Titrandos的2毫米插座相连。	
6.2811.000	分子筛 分子筛。瓶装250克。孔径：0.3 纳米。用于 Rancimats 及卡尔费休测试仪。	
6.2811.010	分子筛（美国） 分子筛。瓶装，每个 250 g。孔径大小：0.3 nm。无水份指示器。用于 Rancimats 和卡尔·费休仪器。 本产品供居住在美国的所有用户使用。根据 OSHA 危险通信标准（29 CFR 1910.1200），其材料被划分为危险。	