



Robotic Chloride Analyzer

2.855.1010

氯化物测定的完整套件包括全自动氯化物滴定所需要的所有元件，它所占空间非常小、所需时间非常短。仪器、附件、软件和应用知识全部包括在内。

Scope of delivery 2.855.1010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.772.0110	772 Pump Unit
		可直接连接在样品处理器上的蠕动泵。



1 PCS

1.802.0010

802型杆式搅拌器，用于727型 滴定台

杆式搅拌器，带分开的6.2137.000速度控制器及6.1909.010螺旋桨搅拌器。



1 PCS

1.855.0010

855 Robotic Titrator «Basic» (1T/1P)

基础型号，可扩展至适用客户特定的自动滴定系统。节省空间的 Robotic Sample Processor XL，带内置 Titrando、一个带 Swing Head 的工作站和一个内置隔膜泵。可选择连接一台外部蠕动泵或隔膜泵，用于抽吸滴定溶液（选装）。方法编程可通过便捷的 Touch Control 或滴定软件 ti amo™ 进行。



2 PCS

6.1236.020

套管，SGJ 14/12 毫米

套管，SGJ 14/12 毫米，带O型圈



1 PCS

6.1458.040

大的滴定头，3 x SGJ 14

大的滴定头，用于120毫升的滴定杯。带3个SGJ 14的开孔和4个6.4毫米的开孔，包括2个加液头。适用于冲洗和吸液设备。



1 PCS

6.1459.300

塑料材质的样品杯 (PP) 120 mL, 250 个

塑料材质的样品杯 (聚丙烯, PP) 120 mL, 适用于样品架
6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、
6.2068.020、6.2068.030 和 6.9920.141, 250 个



1 PCS

6.1462.170

机器人臂, 带滴定头固定器, 以及传感器, 用于786
型摇摆头, 向右摆动

带滴定杯传感器的滴定头固定器, 用于786型摇摆头



1 PCS

6.1543.170

抽吸尖管/螺纹 M8

用于样品处理器的抽吸尖管。



1 PCS

6.1546.030

活塞钳

用于 807 Dosing Unit 的活塞或者计量管单元 OMNIS。



2 PCS 6.1608.023 试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45

通向交换单元。MSM的再生溶液瓶。



2 PCS 6.1621.000 容器, 10升

用在自动系统中作为冲洗液或废液桶。



3 PCS 6.1805.060 FEP管 / M6 / 60厘米

带光照保护和扭折保护



2 PCS 6.1805.120 FEP管 / M6 / 100厘米

带光照保护和扭折保护




1 PCS

6.1805.510

PTFE (聚四氟乙烯) 管 / M8 / 60 cm

带弯折保护。

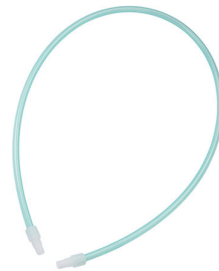

2 PCS

6.1812.000

PTFE (聚四氟乙烯) 管 4 mm / 6 mm / 4 m

用于冲洗，用在样品转换器和772型泵单元上



2 PCS

6.1820.050

适配器，M6 / 管接头

用于蠕动泵的泵管 6.1826.100。



1 PCS

6.1826.100

泵管 6.4 mm / 1 m

作为 772 Pump Unit 泵单元和 843 Pump Station (蠕动泵) 中所用泵管的替代品。



2 PCS 6.1828.000 PVDF 螺纹接套

用于容器 6.1621.000。



1 PCS 6.1909.050 搅拌螺旋桨 / 102 毫米

802型杆式螺旋桨搅拌器的搅拌头，用于样品转盘上容积为120毫升的样品杯（6.1459.300）



1 PCS 6.2001.120 855 右侧的瓶架

用于安装在 855 Robotic Titrosampler 工作塔右侧的瓶架。



1 PCS 6.2041.840 样品架，59 x 120 mL，（聚氯乙烯）

与 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler «Basic» 适配的样品架，用于 59 个样品杯。可使用以下样品杯：6.1459.300、6.1459.307。

塑料：聚氯乙烯 (PVC)



1 PCS

6.2053.000

电缆固定夹

电缆夹，用于固定电缆与连接管




1 PCS

6.2061.010

试剂瓶固定器，用于Dosino

试剂瓶固定器，最多可用于两只安装在1升试剂瓶上的Dosino。

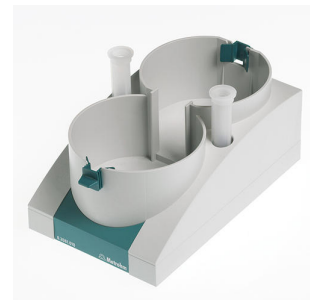

1 PCS

6.2104.020

1米的电极电缆，F

用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。



1 PCS

6.2151.000

电缆 USB A – Mini-DIN 插口 8 针

控制器电缆。



1 PCS

6.2621.030

六角扳手 (Hexagon key) , 4毫米



1 PCS

6.2621.070

内六角扳手, 5 mm, 用于 IC Sample Processor



1 PCS

6.2621.130

六角扳手 (Hexagon key) , 2毫米
2 mm.



1 PCS

6.2621.140

六角扳手 (Hexagon key) , 2.5毫米



1 PCS

6.2711.070

液滴盘，用于789/815/855

液滴盘，用于789，815以及855机器人样品处理系统XL



3 PCS

6.2740.020

冲洗喷嘴

用于均匀喷洒冲洗液。



1 PCS

6.2751.100

安全盖板

用于样品处理器（带 786 Swing Head）的安全盖板。



1 PCS

6.3032.150

807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit，带内置的数据芯片，5 mL 玻璃计量筒和遮光罩，可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



1 PCS

6.3032.220

807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 20 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



2 PCS

1.800.0030

800 Dosino (电缆长度 1.5 m)

以用于智能配液单元的读写硬件来驱动。配有固定安装的电缆 (长度 1.5 m)。



1 PCS

6.00430.100

Ag Titrode

带pH玻璃膜的复合银环电极

该免维护电极适用于 pH 值恒定的沉积滴定 (硝酸银滴定剂), 例如:

- 氯化物、溴化物、碘化物
- 硫化物
- 硫化氢
- 硫醇
- 氰化物



该电极存放在蒸馏水中。

根据具体应用, 建议使用带涂层的银 Titrode (AgBr、AgCl 或 Ag₂S 涂层), 其可以相应订购。

Optional accessories

Order no.	Description	
2.849.0010	849型 Level Control液位控制器 样品处理系统的附加设备，用于通过远程接口监控冲洗桶或废液桶液位。该设备可防止泵在液体流光时还在干转，或防止桶中液体溢出，适用于水性溶液，溶剂和悬浮液。	
6.2148.010	远程盒，MSB 另外的远程接口，用于连接可通过远程线控制的装置。带有永久连接的电缆。	
6.2840.000	水浴装置，用于机器人样品处理器和Robotic Titrosampler. 带水浴的样品盘，用于机器人样品处理器和Titrosampler.	

需要许可授权的计算机程序，用于控制复杂的 OMNIS 分析系统。

- 以样品为导向的操作过程，带有大量模板
- 图形方法编辑器，带大量模板
- 清晰明了且专业的样品列表
- 管理仪器设备、工作系统、传感器、溶液
- 对话框语言：德语、英语、中文



允许单机版 OMNIS 软件在一台 Windows™ 计算机上运行。

特性：

- 该许可证已含有一份 OMNIS 设备许可证。
- 须通过万通许可授权平台进行激活。

