



Robotic Fluoride Analyzer

2.855.2020

氟化物测定的完整套件包括全自动氟化物测定所需要的所有元件，它所占空间非常小、所需时间非常短。仪器、附件、软件和应用知识全部包括在内。

Scope of delivery 2.855.2020

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.802.0010	802型杆式搅拌器，用于727型 滴定台 杆式搅拌器，带分开的6.2137.000速度控制器及6.1909.010螺旋桨搅拌器。



1 PCS

1.855.0020

855 Robotic Titrator «Basic» (1T/2P)

基础型号，可扩展至适用客户特定的自动滴定系统。节省空间的 Robotic Sample Processor XL，带内置 Titrando、一个带摆头的工作站和两个内置隔膜泵。方法编程可通过便捷的 Touch Control 或滴定软件 tiemo™ 进行。



1 PCS

6.0502.150

离子电极, F

具有晶体膜的氟化物选择性电极。

这种 ISE 必须搭配参比电极使用，并且适用于：

- F⁻ 的离子测量 (10⁻⁶ mol/L 直至饱和)
- 小样品体积的离子测量 (最小浸没深度为 1 mm)
- 滴定

得益于 EP 材质的坚固/不易破碎的塑料杆，该传感器可以承受较高的机械载荷。



1 PCS

6.0750.100

LL ISE 参比电极

带双结系统的银/氯化银参比电极。

该参比电极特别适用于：

- 自动化应用
- 离子测量
- 表面活性剂滴定

对污染不敏感的磨光隔膜提供了稳定和具有重现性的电解质流出。此外，参比电解质确保了更好的信号稳定性。c(KCl) = 3 mol/L 的传感器作为中间电解质交付，但是可以根据具体用途自由对其进行选择和更换。



2 PCS

6.1236.020

套管, SGJ 14/12 毫米

套管, SGJ 14/12 毫米, 带O型圈



1 PCS

6.1458.040 大的滴定头, 3 x SGJ 14

大的滴定头, 用于120毫升的滴定杯。带3个SGJ 14的开孔和4个6.4毫米的开孔, 包括2个加液头。适用于冲洗和吸液设备。



1 PCS

6.1462.170 机器人臂, 带滴定头固定器, 以及传感器, 用于786型摇摆头, 向右摆动

带滴定杯传感器的滴定头固定器, 用于786型摇摆头



1 PCS

6.1543.170 抽吸尖管/螺纹 M8

用于样品处理器的抽吸尖管。



1 PCS

6.1546.030 活塞钳

用于 807 Dosing Unit 的活塞或者计量管单元 OMNIS。



2 PCS 6.1608.023 试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45

通向交换单元。MSM的再生溶液瓶。



2 PCS 6.1621.000 容器, 10升

用在自动系统中作为冲洗液或废液桶。



3 PCS 6.1805.060 FEP管 / M6 / 60厘米

带光照保护和扭折保护



2 PCS 6.1805.120 FEP管 / M6 / 100厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1805.510 PTFE（聚四氟乙烯）管 / M8 / 60 cm

带弯折保护。



1 PCS 6.1812.000 PTFE（聚四氟乙烯）管 4 mm / 6 mm / 4 m

用于冲洗，用在样品转换器和772型泵单元上



2 PCS 6.1828.000 PVDF 螺纹接套

用于容器 6.1621.000。



1 PCS 6.2001.120 855 右侧的瓶架

用于安装在 855 Robotic Titrosampler 工作塔右侧的瓶架。



1 PCS

6.2053.000

电缆固定夹

电缆夹，用于固定电缆与连接管




1 PCS

6.2061.010

试剂瓶固定器，用于Dosino

试剂瓶固定器，最多可用于两只安装在1升试剂瓶上的Dosino。

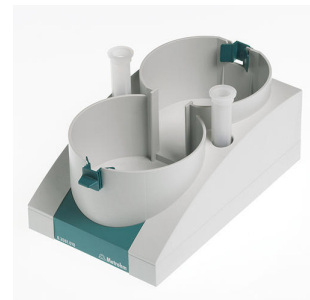

1 PCS

6.2104.020

1米的电极电缆，F

用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。



1 PCS

6.2106.020

电缆（Strand） / 1米/ 2x B

电极电缆，带2xB型插座（4毫米），用于连接带B型插入连接头的电极



1 PCS 6.2151.000 电缆 USB A – Mini-DIN 插口 8 针

控制器电缆。



1 PCS 6.2308.050 电解液, 3 mol/L KCl (50 mL)
电解液c (KCl) = 3 mol/L, 50 mL (用于Ag/AgCl参比系统)



1 PCS 6.2621.030 六角扳手 (Hexagon key), 4毫米



1 PCS 6.2621.070 内六角扳手, 5 mm, 用于 IC Sample Processor



1 PCS 6.2621.130 六角扳手 (Hexagon key) , 2毫米
2 mm.



1 PCS 6.2621.140 六角扳手 (Hexagon key) , 2.5毫米




3 PCS 6.2740.020 冲洗喷嘴

用于均匀喷洒冲洗液。



1 PCS 6.2751.100 安全盖板

用于样品处理器 (带 786 Swing Head) 的安全盖板。

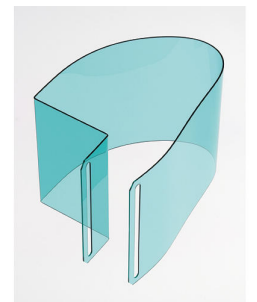

1 PCS 6.3032.220 807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 20 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



1 PCS 6.3032.250 807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 50 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



1 PCS 6.1459.300 塑料材质的样品杯 (PP) 120 mL, 250 个

塑料材质的样品杯 (聚丙烯, PP) 120 mL, 适用于样品架 6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、6.2068.020、6.2068.030 和 6.9920.141, 250 个



1 PCS 6.1909.050 搅拌螺旋桨 / 102 毫米

802型杆式螺旋桨搅拌器的搅拌头, 用于样品转盘上容积为120毫升的样品杯 (6.1459.300)



1 PCS

6.2041.840

样品架, 59 x 120 mL, (聚氯乙烯)

与 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler «Basic» 适配的样品架, 用于 59 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1459.300、6.1459.307。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



2 PCS

1.800.0030

800 Dosino (电缆长度 1.5 m)

以用于智能配液单元的读写硬件来驱动。配有固定安装的电缆 (长度 1.5 m)。



Optional accessories

Order no.	Description	
2.849.0010	849型 Level Control液位控制器 样品处理系统的附加设备，用于通过远程接口监控冲洗桶或废液桶液位。该设备可防止泵在液体流光时还在干转，或防止桶中液体溢出，适用于水性溶液，溶剂和悬浮液。	
6.2148.010	远程盒，MSB 另外的远程接口，用于连接可通过远程线控制的装置。带有永久连接的电缆。	
6.2840.000	水浴装置，用于机器人样品处理器和Robotic Titrosampler. 带水浴的样品盘，用于机器人样品处理器和Titrosampler.	

需要许可授权的计算机程序，用于控制复杂的 OMNIS 分析系统。

- 以样品为导向的操作过程，带有大量模板
- 图形方法编辑器，带大量模板
- 清晰明了且专业的样品列表
- 管理仪器设备、工作系统、传感器、溶液
- 对话框语言：德语、英语、中文



允许单机版 OMNIS 软件在一台 Windows™ 计算机上运行。

特性：

- 该许可证已含有一份 OMNIS 设备许可证。
- 须通过万通许可授权平台进行激活。

