



862 Salt Compact Titrosampler

2.862.2010

862 Salt Compact Titrosampler 是在不同样品中进行全自动电位分析的正确选择。这一滴定仪和自动进样器合为一体的组合仪器，可在狭窄空间中通过自动等当点识别以及终点设定滴定（SET）来自动进行动态等当点滴定（DET）和等量等当点滴定（MET）。862 Salt Compact Titrosampler 配有大量附件，可立即投入使用。

在总共 12 个位置处可全自动地进行不同滴定，以及清洁并存放电极。通过实时显示的大屏幕，可直接观察滴定曲线以及样品系列的当前状态。紧急样品可随时优先进行分析。

Scope of delivery 2.862.2010

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.862.0010

862 Compact Titrosampler

862 Compact Titrosampler – 滴定仪和自动进样器合为一体 – 是一套完整的自动化滴定台，仅占用普通分析天平大小的空间。

它是一台在狭窄空间中使用的小巧紧凑的经济型滴定仪，用于通过自动等当点识别以及终点设定滴定（SET）来自动进行动态等当点滴定（DET）和等量等当点滴定（MET）。

可在总共 12 个位置处全自动进行不同滴定，以及清洁并存放电极。

通过实时显示的大屏幕，可直接观察滴定曲线以及样品系列的当前状态。

紧急样品可随时优先进行分析。



2 PCS

6.1446.000

SGJ 塞子 / B-14/ (15)



1 PCS

6.1459.300

塑料材质的样品杯 (PP) 120 mL, 250 个

塑料材质的样品杯（聚丙烯，PP）120 mL，适用于样品架
6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、
6.2068.020、6.2068.030 和 6.9920.141，250 个



1 PCS

6.1546.030

活塞钳

用于 807 Dosing Unit 的活塞或者计量管单元 OMNIS。



1 PCS

6.1608.023

试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45

通向交换单元。MSM的再生溶液瓶。



1 PCS

6.1815.010

螺旋带 (Spiral band), 0.5 米

用于将不同的电缆或管路束在一起



1 PCS

6.1909.050

搅拌螺旋桨 / 102 毫米

802型杆式螺旋桨搅拌器的搅拌头，用于样品转盘上容积为120毫升的样品杯 (6.1459.300)



1 PCS

6.2104.020

1米的电极电缆, F

用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪 (F型插座)。



1 PCS

6.2147.000

数字 USB 键盘

数字 USB 键盘，用于 Titrino plus、Dosimat plus、862 Compact Titrosampler、869 Compact Sample Changer、863 Compact Autosampler 和 899 Coulometer。带两个集成的 USB 接口。



1 PCS

6.2151.100

USB适配器，MINI (OTG) / USB A

用于连接的USB仪器。



1 PCS

6.2621.130

六角扳手 (Hexagon key) , 2毫米

2 mm.



1 PCS

6.2621.140

六角扳手 (Hexagon key) , 2.5毫米



1 PCS 6.2723.310 Titrino Plus 的保护罩盖

显示屏和键盘的保护罩盖，用于 Titrino plus 系列的所有仪器。

适用于：848 Titrino plus、862 Compact Titrosampler、863 Compact Autosampler、865 Dosimat plus、869 Compact Sample Changer、870 KF Titrino plus、876 Dosimat plus、877 Titrino plus、899 Coulometer。



1 PCS 6.3032.220 807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit，带内置的数据芯片，20 mL 玻璃计量筒和遮光罩，可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



1 PCS 6.6061.010 Titrino plus 所用的存有方法的记忆棒

包括可直接输入 Titrino plus 的食品 PAC、葡萄酒 PAC、油 PAC 的方法。



1 PCS 1.802.0020 802型杆式搅拌器，用于样品处理系统

杆式搅拌器，用于样品转换器及样品处理器。

杆式搅拌器，用于样品转换器及样品处理器。带6.1909.020螺旋桨搅拌头，104毫米，带固定电缆。



1 PCS

1.800.0040

800 Dosino (电缆长度 0.65 m)

以用于智能配液单元的读写硬件来驱动。配有固定安装的电缆（长度 0.65 m）。



1 PCS

6.00430.100

Ag Titrode

带pH玻璃膜的复合银环电极

该免维护电极适用于 pH 值恒定的沉积滴定（硝酸银滴定剂），例如：

- 氯化物、溴化物、碘化物
- 硫化物
- 硫化氢
- 硫醇
- 氰化物



该电极存放在蒸馏水中。

根据具体应用，建议使用带涂层的银 Titrode (AgBr、AgCl 或 Ag₂S 涂层)，其可以相应订购。

Optional accessories

Order no.	Description	
6.2136.010	远程电缆 (9p) - Dosimat (2xSt B) 用于 870 Titrino Plus 和 862 Compact Titr sampler	
2.843.0130	Compact Sample Changer 的 843 Pump Station (蠕动泵式) – rinse /aspirate 843 Pump Station (蠕动泵式) 带两个内置的蠕动泵，可直接由 869 紧凑型自动进样器借助远程控制信号控制这两个泵。冲洗/抽吸变型中包含了用于自动清空滴定杯和清洗滴定装备的完整配件。此附件设计用于与 869 Compact Sample Changer 一起使用。	

通用配液器用于实验室中的滴定和配液作业。包括用于手动配液控制的按钮线缆和交换单元 20 mL 6.3026.220。Dosimat plus 的 USB 接口上可连接多种设备，通过 USB 集线器甚至可同时连接多台设备（键盘、鼠标、USB 一体型打印机或 USB-DIN-A4 打印机、用于备份方法和数据的 USB 存储卡）。通过选装的 USB/RS232-Adapterbox 6.2148.030 可连接实验室电子秤并通过计算机进行控制。



Dosimat plus 拥有四种加液模式：

DOS (Dosing) – 按下按键即可加液

此型号适用于颜色指示剂指示的手动滴定。可以根据加液容量自动计算结果，并打印出结果报告。

XDOS (扩展加液) – 可控加液

- 固定体积的加液：需预先设定加液体积和速率。
- 时间控制加液：需预先设定体积和时间。
- 根据加液速率加液：需预先设定加液速率和时间。

如果需要无间断的连续加液，则可将 865 Dosimat plus 与一台 805 Dosimat 前后串联使用。

CNT D (Content dosing) – 制备标准溶液和其它溶液。

根据初始物质（固体或储存液）的样品量及预先设定的目标浓度，可自动计算需要配制的溶剂体积。

LQT (Liquid transfer) – 液体的移液和稀释。

通用配液器可用于手动滴定和加液应用。包括用于手动配液控制的按钮线缆和交换单元 20 mL。Dosimat plus 的 USB 接口上可连接多种设备，通过 USB 集线器甚至可同时连接多台设备（键盘、鼠标、USB 一体型打印机或 USB-DIN-A4 打印机、用于备份方法和数据的 USB 存储卡）。通过选装的 USB/RS232-Adapterbox 6.2148.030 可连接实验室电子秤并通过计算机进行控制。Dosimat plus 有两种加液模式可提供下列应用：



DOS (Dosing) – 按下按键即可加液

此型号适用于颜色指示剂指示的手动滴定。可以根据加液容量自动计算结果，并打印出结果报告。

XDOS (扩展加液) – 可控加液

- 固定体积的加液：需预先设定加液体积和速率。
- 时间控制加液：需预先设定体积和时间。
- 根据加液速率加液：需预先设定加液速率和时间。

数码计量瓶顶加液器支架的固定板

将数码计量瓶顶加液器支架灵活安装在 862 Compact Titrosampler 多位滴定仪上的固定板。归功于可自由选择安装高度，可快速简便的连接不同生产厂家的试剂瓶。



远程连接集成型样品处理系统/集成型自动样品处理系统 和 Titrino plus - /泵单元的电缆。

远程连接集成型样品处理系统/集成型 自动样品处理系统 和 Titrino plus 和/或 泵单元的电缆。



6.2141.240 远程电缆 Dosimat plus - 集成型样品处理系统/Titrino plus

远程连接 Dosimat plus 和集成型样品处理系统和/或 Titrino plus 的电缆，使用 6.2141.260 电缆。



6.3032.150 807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit，带内置的数据芯片，5 mL 玻璃计量筒和遮光罩，可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



6.3032.210 807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit，带内置的数据芯片，10 mL 玻璃计量筒和遮光罩，可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。




6.3032.250 807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit，带内置的数据芯片，50 mL 玻璃计量筒和遮光罩，可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



6.5621.000 用于冲洗/抽吸 869 紧凑型自动进样器或 862 多位滴定仪的设备

869 紧凑型自动进样器或 862 多位滴定仪与一台用于冲洗/抽吸的泵组合使用。

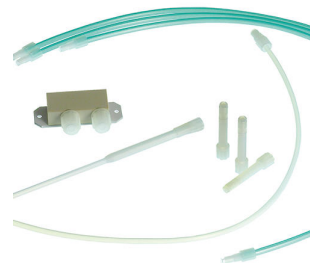

2.142.0100 热敏打印机 Custom Q3X

带 USB 接口的一体型打印机，用于

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (电缆 6.2151.140)
- Eco Dosimat / 滴定仪
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



纸宽 60 mm (40 个字符)。包括 USB 电缆 6.2151.120。

6.2103.130 2毫米插头 / 4毫米插座的红色适配器

用于将B类插头（4毫米）与780，781 pH/离子计以及所有型号的 Titrandos 的2毫米插座相连。



6.2103.140

2毫米插头 / B类4毫米插座的黑色适配器

用于将B类插头（4毫米）与 离子计以及所有型号的Titrando的2毫米插座相连。

