



871Bioscan

2.871.0010

脉冲安培检测器，用于对糖类，糖醇和糖酸，多聚糖以及其它可氧化物质进行高灵敏测定。871 Bioscan 扩展了瑞士万通模块离子色谱规划，包括离子色谱应用领域中的碳水化合物分析。871 Bioscan 的核心是带有内置进样阀和色谱柱加热装置的脉冲安培检测器。其控制是通过 Metrodata IC Net 软件。除了碳水化合物，871 Bioscan 还可用来测定可氧化的无机酸阴离子。有不同材料的测定池，例如金、银、铂或玻璃化碳。

Scope of delivery 2.871.0010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.871.0010	871Bioscan
脉冲安培检测器，用于对糖类，糖醇和糖酸，多聚糖以及其它可氧化物质进行高灵敏测定。871 Bioscan 扩展了瑞士万通模块离子色谱规划，包括离子色谱应用领域中的碳水化合物的分析。871 Bioscan 的核心是带有内置进样阀和色谱柱加热装置的脉冲安培检测器。其控制是通过 Metrodata IC Net 软件。除了碳水化合物，871 Bioscan 还可用来测定可氧化的无机酸阴离子。有不同材料的测定池，例如金、银、铂或玻璃化碳。		



1 PCS

6.2156.010 Bioscan的记录仪电缆

Bioscan 记录仪的模拟信号电缆，用于转换后的信号（在离子色谱系统中非必配）。



1 PCS

6.1816.060 用于UV/VIS型一体化IC及Bioscan的排液管


排液管，用于排放漏出的液体



1 PCS

6.1825.210 PEEK样品环，20 µL

用于进样阀，带2只PEEK压力螺丝

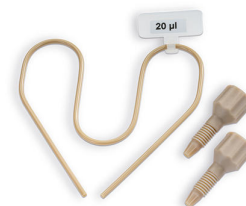

1 PCS

6.1831.010 PEEK 毛细管，内径0.25 毫米 / 3 米

用于所有IC 元件。



1 PCS

6.2620.150 脉冲吸收器 (非金属)

用于所有离子色谱仪



2 PCS

6.2744.010 压力螺丝5x

带UNF 10/32连接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析 (连接PEEK毛细管)



1 PCS

6.2744.014 压力螺丝2x

带UNF 10/32连接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析 (PEEK毛细管连接管)



1 PCS

6.2744.040 2x UNF 10/32连接器

用于连接1/16英寸的毛细管。用在IC分析仪上



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1254.070	Bioscan的银流动池 Bioscan的流动池，电极材料：银	
6.1254.130	铂 Variocell，用于Bioscan 铂测量池，带可更换式工作电极。	
6.1254.140	银 Variocell，用于 Bioscan 银测量池，带可更换式工作电极。	
6.1254.230	铂工作电极，用于Variocell 铂工作电极，用于6.1254.1X0 Variocell	

6.2744.130 压力螺丝，用于Bioscan测量池
用于连接1/16英寸的毛细管。



6.1803.030 PTFE 毛细管，内径 0.5 毫米 / 3 米
毛细管，用于在线渗析，用在渗析单元、渗析式IC样品处理器、IC液体处理渗析单元上

