



874 Oven Sample Processor 专用样品瓶

2.874.0130

874 Oven Sample Processor 用于在卡尔·费休滴定中自动进行热化样品前处理。炉式方法特别适合于那些在较高温度下方可析出水份的样品、以及难溶样品或与 KF 试剂起反应的样品。

此设备可根据客户特有样品杯进行适配。请您联系万通办事处以获得更多信息。

Scope of delivery 2.874.0130

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.874.0010	874 Oven Sample Processor

874 Oven Sample Processor 用于在卡尔·费休滴定中自动进行热化样品前处理。炉式方法特别适合于那些在较高温度下方可析出水份的样品、以及难溶样品或与 KF 试剂起反应的样品。



1 PCS

6.1446.170 加热管堵头

用于KF库仑测定滴定杯，与可加热式6.1830.000，6.1830.010，6.1830.020连接管相连



2 PCS

6.1602.145 干燥瓶盖

带螺纹 GL 45 的螺纹密封件，用于干燥瓶 6.1608.050。



2 PCS

6.1608.050 卡氏炉干燥瓶 / 100毫升 / GL 45



2 PCS

6.1805.010 FEP管 / M6 / 13厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1805.050 FEP管 / M6 / 18厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1805.470 FEP管 / M6 / 44厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1808.040 螺纹转接头 M6 外部 / M8 内部

螺纹 M6 外部，M8 内部。



1 PCS 6.1808.050 软管适配器 Olive / M8 外部

1 个外螺纹 M8 和 1 个 Olive 式软管适配器。例如用于交换单元的恒温器外罩和恒温测量设备。



2 PCS

6.1821.040 过滤管

过滤管，用于768卡氏炉，832 KF-Thermoprep，743 Rancimat上的6.1608.050干燥瓶。



1 PCS

6.1830.030 加热管

加热管，带 M6 螺纹，用于 860 KF Thermoprep、885 Compact Oven Sample Processor 和 874 USB Oven Sample Processor。



1 PCS

6.2013.010 定位环

用于直径为 10 mm 的支架杆。



1 PCS

6.2053.000 电缆固定夹

电缆夹，用于固定电缆与连接管



1 PCS

6.2063.020

样品瓶适配器

用于 6 mL 样品瓶（6.2419.000）的样品瓶适配器, 用于 874



1 PCS

6.2151.000

电缆 USB A – Mini-DIN 插口 8 针

控制器电缆。



1 PCS

6.2621.100

内六角扳手，3 mm，用于 IC Sample Processor



1 PCS

6.2621.130

六角扳手（Hexagon key），2毫米

2 mm.



1 PCS

6.2621.140

六角扳手 (Hexagon key) , 2.5毫米



1 PCS

6.2627.010

炉芯

与 874 USB Oven Sample Processor 一起使用。



1 PCS

6.2724.010

灰尘过滤器

灰尘过滤器, 用于617, 679, 743 Rancimat, 用于卡氏炉



1 PCS

6.2739.000

扳手

用于拧紧连接器



1 PCS

6.2751.140

安全盖板

用于 874 USB Oven Sample Processor 的安全盖板，PMMA 制。



1 PCS

6.2816.070

穿刺针

与卡尔·费休炉一同使用。



1 PCS

6.2816.080

出口针

与832 KF Thermoprep一起使用。



Optional accessories

Order no.	Description
2.851.0010	851 Titrando卡尔费休水分测定仪，配备有带隔膜的发生电极 库伦法卡尔费休水分测定仪包括带隔膜的发生电极和 801 搅拌器。 对于痕量水分（10 µg-10 mg 绝对水量）的测定来说，库伦分析法是用于液体、固体和气体中水分测定的理想方法。此外，库伦分析法是一种绝对方法，因此无需进行滴定度测定。 使用 851 Titrando 可简便快捷地进行库伦法滴定。 建议的测量范围：10 µg-200 mg绝对水量 使用 OMNIS软件、tiamo软件或触摸屏控制。如果需要，可满足 GMP、GLP 和 FDA 要求，比如 21 CFR Part 11。
2.851.0110	851 Titrando卡尔费休水分测定仪，配备无隔膜的发生电极 库伦法卡尔费休水分测定仪包括无隔膜的发生电极。 对于痕量水分（10 µg-10 mg 绝对水量）的测定来说，库伦分析法是用于液体、固体和气体中水分测定的适宜方法。此外，库伦分析法是一种绝对方法，因此无需进行滴定度测定。 使用 851 Titrando 可简便快捷地进行库伦法滴定。 建议的测量范围：10 µg-200 mg绝对水量 使用 OMNIS软件、tiamo软件或触摸屏控制。如果需要，可满足 GMP、GLP 和 FDA 要求，比如 21 CFR Part 11。



2.852.0050 852 Titrando, 配备有带隔膜的发生电极

库仑法卡氏水份测定仪包括带隔膜的发生电极、801 Stirrer 和整套容量滴定杯。

对于痕量区域（10 µg 至 10 mg 绝对水）的水份测定来说，电量分析法是用于液态、固态和气态中的水份测定适宜方法。此外，电量分析法是一种绝对方法，因此无需进行滴定度测定。

建议的电量分析测量范围：10 µg - 200 mg 绝对水量

除电量滴定外，852 Titrando 还可以进行卡尔·费休容量滴定。

使用 OMNIS-Software、tiamo-软件或 Touch Control。如果需要，满足 GMP/GLP 和 FDA 要求，比如 21 CFR 第 11 部分。



2.852.0150 852 Titrando卡尔费休水分测定仪, 配备无隔膜的发生电极

库仑法卡尔费休水分测定仪包括无隔膜的发生电极和整套容量法滴定杯。

对于痕量水分（10 µg-10 mg 绝对水量）的测定来说，库仑分析法是用于液体、固体和气体中水分测定的适宜方法。此外，库仑分析法是一种绝对方法，因此无需进行滴定度测定。

建议的测量范围：10 µg-200 mg绝对水量

除库仑法滴定外，852 Titrando 还可进行容量法卡尔费休滴定。

使用 OMNIS软件、tiamo软件或触摸屏控制。如果需要，可满足 GMP、GLP 和 FDA 要求，比如 21 CFR Part 11。



2.800.0010 800 Dosino多思 驱动头

800 Dosino 驱动头，带有可用于智能型加液单元的读/写硬件设备。带固定电缆。



2.801.0010

801 Stirrer

无三角支架的磁力搅拌器，补充用于 Titrino plus、Dosimat plus、Titrande、Sample Processor、805 Dosimat 和 780/781 pH Meter。带有固定安装的、用于 MSB（万通串行总线接口）的线缆。



6.2041.730

样品架, 25 x 2-30 mL, (Al)

与 874 Oven Sample Processor 适配的样品架，用于 25 个样品容器。可使用以下样品容器（16 到 32.4 mm 直径）。

材料：铝 (Al)



6.2041.720

样品架, 36 x 6 mL, (Al)

与 874 Oven Sample Processor" 适配的样品架，用于 36 个样品容器。可使用以下样品容器：6.2419.000。

材料：铝 (Al)



6.3032.120

807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit，带内置的数据芯片，2 mL 玻璃计量筒和遮光罩，可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



6.3032.150 807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 5 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



6.3032.210 807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 10 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



6.3032.220 807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 20 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。




6.3032.250 807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 50 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



- 6.5618.000 测试设备，用于检查774卡氏炉的温度。
测试设备，用于检查774卡氏炉的温度（仅用于计量认证）。

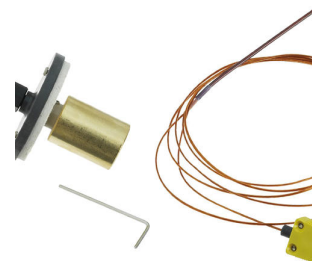

-
- 6.2049.040 带 Luer-Lock 的针架
- 带 Luer-Lock 的针架（58 mm），用于 860、874、和 885 卡尔·费休炉。



-
- 6.2049.050 带 Luer-Lock 的针架
- 带 Luer-Lock 的针架（73 mm），用于 860、874、和 885 卡尔·费休炉。



-
- 6.2811.000 分子筛
- 分子筛。瓶装250克。孔径：0.3 纳米。用于 Rancimats 及卡尔费休测试仪。



6.2811.010

分子筛（美国）

分子筛。瓶装，每个 250 g。孔径大小：0.3 nm。无水份指示器。用于 Rancimats 和卡尔·费休仪器。

本产品供居住在美国的所有用户使用。根据 OSHA 危险通信标准（29 CFR 1910.1200），其材料被划分为危险。

