


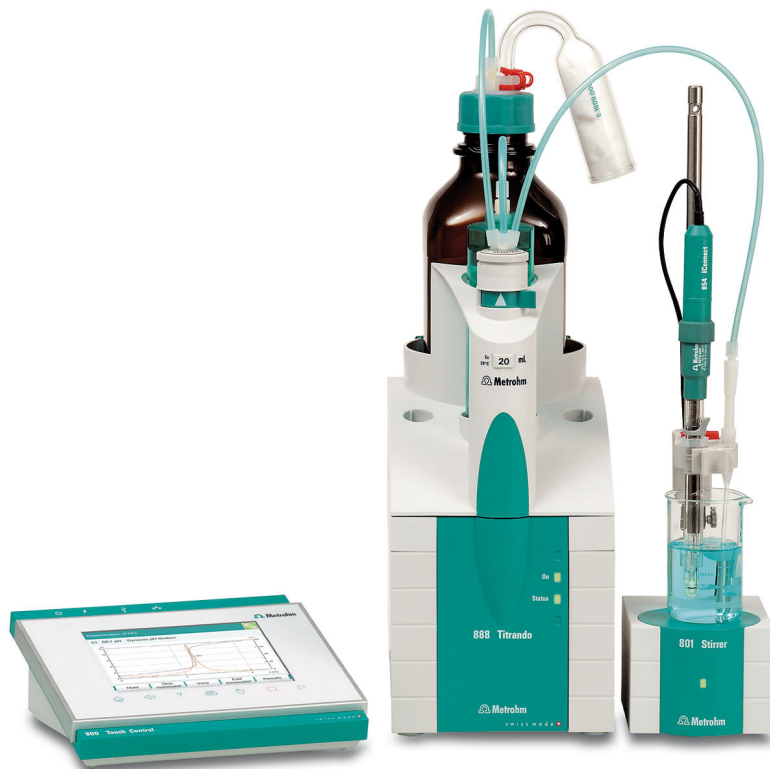

# 888 Titrando

2.888.0010

带内置滴定管驱动的高端滴定仪

- 无附件
- 用 900 Touch Control 或 OMNIS Software 操作
- 动态 (DET)、等量 (MET)、终点滴定 (SET) 和卡尔·费休容量滴定 (KFT, 仅当使用 OMNIS 软件操作时)
- 四个 MSB 接口
- 一个电流分隔的测量接口 (也可用于智能电极 "iTrodes")
- USB 接口


Scope of delivery 2.888.0010

| Qt. | Order no. | Description |
|-----|-----------|-------------|
|-----|-----------|-------------|

1 PCS

1.888.0010

Titrande

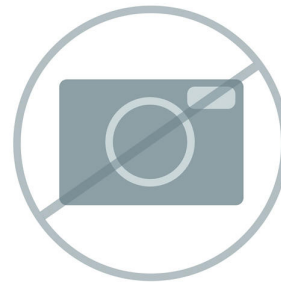

---

1 PCS

6.2739.010


扳手

用于交换单元



## Optional accessories

| Order no.  | Description                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2168.000 | <p>迷你 USB 适配器电缆，25 cm</p> <p>迷你 USB 适配器电缆，用于将一个 854 iConnect 连接到 867 pH Module、901...907 Titrandos 和 916 Ti-Touch 上，25 cm。适配器电缆作为应力消除装置保持插入在仪器中，并且 854 iConnect 仅通过适配器电缆插入和拔出。</p>                                                                              |
| 6.2103.130 | <p>2毫米插头 / 4毫米插座的红色适配器</p> <p>用于将B类插头（4毫米）与780，781 pH/离子计以及所有型号的Titrandos的2毫米插座相连。</p>                                                                                                                                                                          |
| 6.2103.140 | <p>2毫米插头 / B类4毫米插座的黑色适配器</p> <p>用于将B类插头（4毫米）与离子计以及所有型号的Titrandos的2毫米插座相连。</p>                                                                                                                                                                                   |
| 2.900.0010 | <p>900 Touch Control</p> <p>Titrandos、USB 样品处理器、856 Conductivity Module、867 pH Module 和 846 Dosing Interface 的操作单元。触摸灵敏、高度清晰的彩色屏幕以及可用于直接存取方法的收藏功能，都使操作能简单直观地完成。带有可直接连接到互联网上的以太网接口和用于连接 USB 打印机或U盘的USB接口。</p> <p>对话框语言：德语、英语、中文、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、韩语、波兰语和意大利语。</p> |

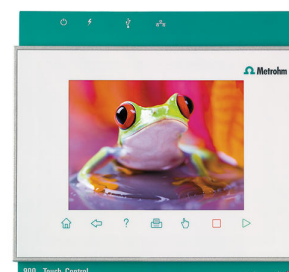

允许单机版 OMNIS 软件在一台 Windows™ 计算机上运行。

特性：

- 该许可证已含有一份 OMNIS 设备许可证。
- 须通过万通许可授权平台进行激活。



2.801.0040

801 Stirrer, 带三脚支架

磁力搅拌器包括底盘、支架杆和电极座，可用于 Titrino plus、Dosimat plus、Titrande、Sample Processor、805 Dosimat 和 780/781 pH Meter 以及 856 和 867 测量模块。带有固定安装的、用于 MSB（万通串行总线接口）的线缆。



2.804.0040

804 滴定台，带立架

滴定台及802杆式螺旋桨搅拌器的控制器，如果与802型杆式螺旋桨搅拌器联用，则可为您在磁力搅拌器之外提供另一选择。Ti Stand工作台带有底板、支撑杆与电极固定器。



2.802.0040

802 Stirrer, 适用于 804 Ti Stand

棒式搅拌器包括搅拌螺旋桨 6.1909.010。



## 2.142.0100 热敏打印机 Custom Q3X

带 USB 接口的一体型打印机，用于

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (电缆 6.2151.140)
- Eco Dosimat / 滴定仪
- 862 Compact Titr sampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



纸宽 60 mm (40 个字符)。包括 USB 电缆 6.2151.120。

---

## 6.2151.000 电缆 USB A – Mini-DIN 插口 8 针

控制器电缆。



---

## 6.3026.110 1毫升的交换单元

智能型加液单元，配有1毫升的玻璃计量管和光保护。PCTFE/PTFE平面旋塞阀 (stopcock)，FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶



#### 6.3026.150 5毫升的交换单元

交换单元内置数据芯片，5毫升玻璃计量管和避光保护壳。 PCTFE/PTFE平面旋塞阀（stopcock），FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶



---

#### 6.3026.210 10毫升的交换单元

交换单元内置数据芯片，10毫升玻璃计量管和避光保护壳。 PCTFE/PTFE平面旋塞阀（stopcock），FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶



---

#### 6.3026.220 20毫升的交换单元

交换单元内置数据芯片，20毫升玻璃计量管和避光保护壳。 PCTFE/PTFE平面旋塞阀（stopcock），FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶



---

#### 6.3026.250 交换单元 50 mL

带内置芯片的交换单元，带 50 mL 玻璃计量管及遮光罩。PCTFE/PTFE平头旋塞、FEP 管路连接、防扩散滴管头和由棕色玻璃制成的标准试剂瓶。

