


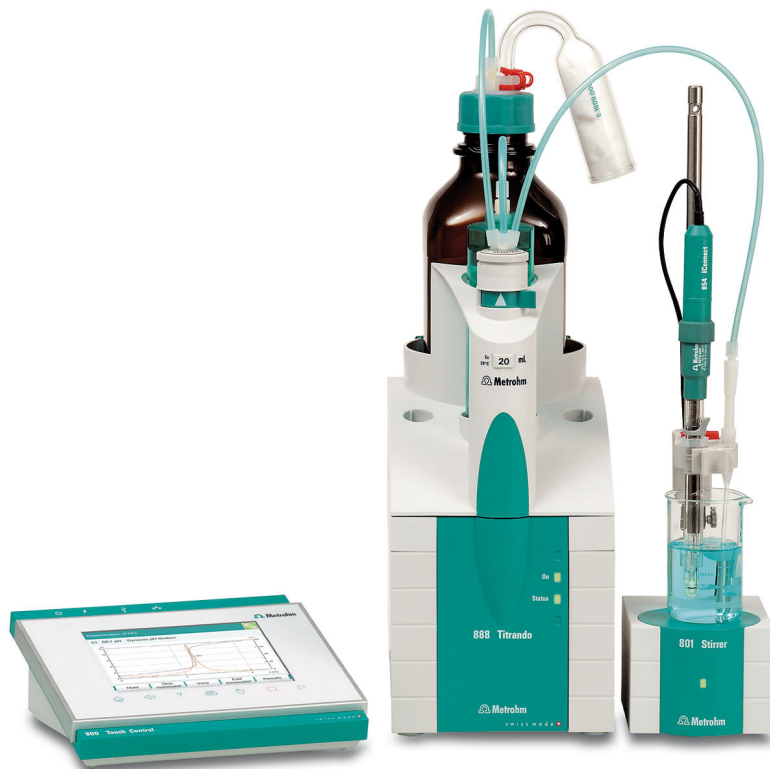

888 Titrando, 带 Touch Control

2.888.0110

带内置滴定管驱动的电位滴定仪

- 包括 900 Touch Control、磁力搅拌器 801 Stirrer、交换单元 20 mL 和组合式 pH 玻璃电极 «Ecotrode plus»
- 动态等当点滴定 (DET)、等量等当点滴定 (MET) 和终点设定滴定 (SET)
- 四个 MSB 接口
- 一个电流分隔的测量接口 (也可用于智能电极 «iTrodes»)
- USB 接口

Scope of delivery 2.888.0110

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------




无三角支架的磁力搅拌器，补充用于 Titrino plus、Dosimat plus、Titrando、Sample Processor、805 Dosimat 和 780/781 pH Meter。带有固定安装的、用于 MSB（万通串行总线接口）的线缆。



Titrando、USB 样品处理器、856 Conductivity Module、867 pH Module 和 846 Dosing Interface 的操作单元。触摸灵敏、高度清晰的彩色屏幕以及可用于直接存取方法的收藏功能，都使操作能简单直观地完成。带有可直接连接到互联网上的以太网接口和用于连接 USB 打印机或 U 盘的 USB 接口。

对话框语言：德语、英语、中文、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、韩语、波兰语和意大利语。

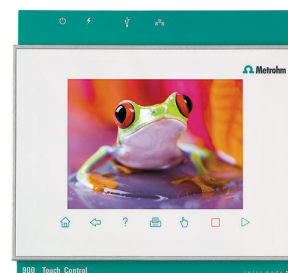

适用于含水的酸/碱滴定的组合 pH 电极。固定磨口隔膜对污染不敏感。参比电解质：c (KCl) = 3 mol/L，储存在储存溶液中。



1 PCS

6.1903.020 搅拌子 / 16 毫米

带磁芯的搅拌子，带PTFE外涂层，长度： 16 毫米



1 PCS

6.1903.030 搅拌棒 / 25 mm


带磁芯的搅拌棒，以 PTFE（聚四氟乙烯）材料包裹，长 25 mm。



1 PCS

6.2001.060 测定台（support stand），不带支撑杆

用于将一台801，804或803型搅拌器连接到一台Titrande或805型 Dosimat数字计量加液器上。

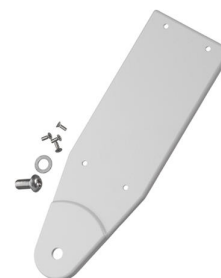

1 PCS

6.2013.010 定位环

用于直径为 10 mm 的支架杆。



1 PCS

6.2016.070

支撑杆 / 400毫米



1 PCS

6.2021.020

电极架

电极架，可用于4只电极与2只滴定头



1 PCS

6.2104.020

1米的电极电缆，F

用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。



1 PCS

6.2621.070

内六角扳手，5 mm，用于 IC Sample Processor



1 PCS 6.2621.130 六角扳手 (Hexagon key) , 2毫米
2 mm.



1 PCS 6.2739.010 扳手
用于交换单元



1 PCS 6.3026.220 20毫升的交换单元

交换单元内置数据芯片, 20毫升玻璃计量管和避光保护壳。 PCTFE /PTFE平面旋塞阀 (stopcock) , FEP连接管, 防扩散滴定头, 及标准琥珀色玻璃试剂瓶



1 PCS 6.6064.010 U 盘, 用于 900 Touch Control



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2148.020	RS-232/USB Box	
	可为 Titrando、USB 样品处理器、Dosing Interface、Titrosampler 增加两个 RS-232 接口，用于连接例如天平、计算机、LIMS。需要电缆 6.2151.030。	
2.800.0010	800 Dosino多思 驱动头	
	800 Dosino 驱动头，带有可用于智能型加液单元的读/写硬件设备。带固定电缆。	
2.802.0040	802 Stirrer, 适用于 804 Ti Stand	
	棒式搅拌器包括搅拌螺旋桨 6.1909.010。	
2.804.0040	804滴定台，带立架	
	滴定台及802杆式螺旋桨搅拌器的控制器，如果与802型杆式螺旋桨搅拌器联用，则可为您在磁力搅拌器之外提供另一选择。Ti Stand工作台带有底板、支撑杆与电极固定器。	

2.805.0010

805 Dosimat

加液设备，用于Titrando和样品处理器，带可用于智能交换单元的读/写硬件设备。带有永久连接的电缆。不带交换单元。



2.854.0010

854 iConnect

854 iConnect - 智能电极 «iTrodes» 专用电极电缆和测量放大器（电缆长度 150 cm）。



6.0277.300

iAquatrode Plus, 带 Pt1000

集成了传感器数据存储芯片和 Pt1000 温度传感器的用于在离子含量低的含水介质（例如，饮用水、工艺用水）中进行 pH 测量/滴定的数字组合 pH 电极。这种电极在这些样品中显示出非常快的反应时间。

固定磨口隔膜对污染不敏感。

当使用 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol / L}$ 作为中间电解质时，建议在储存溶液中储存。

中间电解质可以用不含氯离子的电解质（例如，硝酸钾 $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ (6.2310.010)）代替。存储在用过的电解质中。

iTrodes 可用于 Titrando, Ti-Touch 或 913/914 米。



6.0278.300 iUnitrode, 带 Pt1000

集成了传感器数据存储芯片和 Pt1000 温度传感器的智能组合 pH 电极。
该电极特别适用于：

- 用于较难的、粘性或碱性样品中的 pH 测量和滴定
- 温度升高的时候
- 长时测量的时候

固定磨口隔膜对污染不敏感。

参比电解质：c (KCl) = 3 mol/L，储存在储存溶液中。

替代方法：T>80° C 时的测量用参比电解质：Idrolyt，储存在 Idrolyt 中。

iTrodes 可用于 Titrando, Ti-Touch 或 913/914 米。



6.0279.300 iSolvotrode

集成了传感器数据存储芯片的智能组合 pH 电极适用于所有非水性酸/碱滴定。

玻璃膜针对导电性差的溶液进行了优化，并且由于灵活的磨口隔膜，该电极也适用于非常脏的样品。电极可与非水参比电解质（氯化锂或四乙基溴化铵）一起使用。储存在相应的参比电解质中。

iTrodes 可用于 Titrando, Ti-Touch 或 913/914 米。



6.0471.300 iPt Titrode

带 pH 玻璃膜且集成了传感器数据存储芯片的智能组合式铂环形电极，用作参比电极。

该免维护电极适用于 pH 值恒定的氧化还原滴定，例如：

- 碘量法
- 重铬酸钾法
- 铈量法
- 高锰酸盐滴定法

该电极存放在蒸馏水中。


iTrodes 可以在 Titrando、Ti-Touch 或 913/914 Metern 上使用。



- 6.2104.600 用于插头 U/插头 F 2x2 mm B 的电极电缆，1m
用于通过万通插头 U 将电极连接在万通设备上（插座 F）。



- 6.2141.320 用于连接集成型样品处理系统和MSB口的远程控制盒的电缆
用于连接869集成型样品处理系统和远程MSB盒(6.2148.010)和的电缆（9针）。

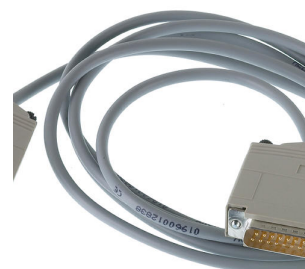

- 6.2148.010 远程盒，MSB
另外的远程接口，用于连接可通过远程线控制的装置。带有永久连接的电缆。



- 6.3026.110 1毫升的交换单元
智能型加液单元，配有1毫升的玻璃计量管和光保护。PCTFE/PTFE平面旋塞阀（stopcock），FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶



6.3026.150 5毫升的交换单元

交换单元内置数据芯片，5毫升玻璃计量管和避光保护壳。PCTFE/PTFE平面旋塞阀（stopcock），FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶



6.3026.210 10毫升的交换单元

交换单元内置数据芯片，10毫升玻璃计量管和避光保护壳。PCTFE/PTFE平面旋塞阀（stopcock），FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶



6.3026.250 交换单元 50 mL

带内置芯片的交换单元，带 50 mL 玻璃计量管及遮光罩。PCTFE/PTFE平头旋塞、FEP 管路连接、防扩散滴管头和由棕色玻璃制成的标准试剂瓶。



6.3032.120 807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit，带内置的数据芯片，2 mL 玻璃计量筒和遮光罩，可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



6.3032.150 807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 5 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



6.3032.210 807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 10 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



6.3032.220 807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 20 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



6.3032.250 807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 50 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



6.2103.130 2毫米插头 / 4毫米插座的红色适配器

用于将B类插头（4毫米）与780，781 pH/离子计以及所有型号的Titrandos的2毫米插座相连。



6.2103.140 2毫米插头 / B类4毫米插座的黑色适配器

用于将B类插头（4毫米）与离子计以及所有型号的Titrandos的2毫米插座相连。

