



899 Coulometer, 配备有无隔膜的发生电极和 885 Compact Oven SC

2.899.3110

此滴定系统由一台 899 Coulometer 和一台 885 Compact Oven Sample Changer 组成。可在最小空间内自动进行样品前加热处理及其后的水份测定。

由此可分析那些不适用于直接式卡尔费休滴定法的样品。用密封样品瓶将样品送入 885 Compact Oven Sample Changer 的炉内。样品将会加热，其中的水份会蒸发，并导入滴定杯中。然后可通过 899 Coulometer 测定样品中的水份含量。

Scope of delivery 2.899.3110

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.899.0010

899 Coulometer



1 PCS

1.885.0010

885 Compact Oven Sample Changer

885 Compact Oven Sample Changer 用于在卡尔·费休滴定中进行热化样品准备。样品在炉中被加热到 250° C。此时水会蒸发，并经干燥的载气被运送到进行分析的滴定杯中。



1 PCS

6.0341.100

用于库仑法分析的双铂丝电极

指示电极，用于库仑法卡尔费休滴定。



1 PCS

6.0345.100

无隔膜的发生电极

不带隔膜的发生电极，用于库仑法卡尔费休滴定，标准磨口 29/22。该发生电极适用于样品易溶于酒精的大多数应用。



1 PCS

6.1403.030

至库仑法滴定杯的 KF 吸附管

用于 KF 库仑法卡氏水分测定仪。



1 PCS

6.1437.000

SGJ 塞子, SGJ 14



1 PCS

6.1446.170

加热管堵头

用于KF库仑测定滴定杯, 与可加热式6.1830.000, 6.1830.010, 6.1830.020连接管相连



2 PCS

6.1448.020

垫片, 16毫米, 5片

每套5件。



1 PCS

6.1448.067

带隔垫的转锁, 100 个

带隔垫的转锁, 适用于 8 mL 样品瓶, 6.2420.007, 100 个



1 PCS

6.1464.320

卡氏滴定杯 / 80至250毫升 / 库仑法

Für 756 und 831 KF-Coulometer



2 PCS

6.1602.145

干燥瓶盖

带螺纹 GL 45 的螺纹密封件, 用于干燥瓶 6.1608.050。



2 PCS

6.1608.050

卡氏炉干燥瓶 / 100毫升 / GL 45



1 PCS 6.1805.010 FEP管 / M6 / 13厘米
带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1805.060 FEP管 / M6 / 60厘米
带光照保护和扭折保护



2 PCS 6.1805.080 FEP管 / M6 / 25厘米
带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1808.040 螺纹转接头 M6 外部 / M8 内部
螺纹 M6 外部，M8 内部。



1 PCS

6.1808.050 软管适配器 Olive / M8 外部

1 个外螺纹 M8 和 1 个 Olive 式软管适配器。例如用于交换单元的恒温器外罩和恒温测量设备。



2 PCS

6.1821.040 过滤管

过滤管，用于768卡氏炉，832 KF-Thermoprep，743 Rancimat上的6.1608.050干燥瓶。



1 PCS

6.1830.030 加热管

加热管，带 M6 螺纹，用于 860 KF Thermoprep、885 Compact Oven Sample Processor 和 874 USB Oven Sample Processor。



1 PCS

6.1903.030 搅拌棒 / 25 mm

带磁芯的搅拌棒，以 PTFE（聚四氟乙烯）材料包裹，长 25 mm。



2 PCS

6.2043.005

瓶固定夹

交换单元中试剂瓶的止动弹簧。



1 PCS

6.2049.050

带 Luer-Lock 的针架

带 Luer-Lock 的针架（73 mm），用于 860、874、和 885 卡尔·费休炉。



1 PCS

6.2104.020

1米的电极电缆，F

用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。



1 PCS

6.2104.120

1米的电极电缆，H

带H型插头。用于发生电极与卡尔费休库仑水分测试仪之间的连接。



1 PCS

6.2141.390

远程电缆 885 – 899

远程电缆用于将一台 885 Compact Oven Sample Changer 连接至 899 Coulometer。



2 PCS

6.2151.100

USB适配器, MINI (OTG) / USB A

用于连接的USB仪器。



1 PCS

6.2151.120

USB 电缆, 1.8 米

用于连接的USB仪器。



1 PCS

6.2164.010

桌式电源 100 - 240 V/24 V 直流

用于 915 KF Ti-Touch、916 Ti-Touch、917 Coulometer 和 所有 Eco Titrator/Eco Dosimat 的桌式电源。



1 PCS

6.2420.007

带螺纹的 8 mL 样品瓶，100 个

带螺纹的 8 mL 样品瓶，适用于转锁 6.1448.067，100 个



1 PCS

6.2621.140

六角扳手（Hexagon key），2.5毫米



1 PCS

6.2701.040

螺纹密封件 GL 18，带孔

材质为 PBT。带用于隔垫 6.1448.020 的孔。用于无隔膜滴定杯 6.5405.000 和滴定管 6.1464.32X 及 6.1465.320。



3 PCS

6.2713.000

PTFE 套环 NS14

用于与标准磨口 NS 14 的无润滑油磨口连接。



1 PCS

6.2713.010

PTFE 套环 NS29

用于与标准磨口 SGJ 29 的无润滑油磨口连接的套环。



1 PCS

6.2713.020

PTFE 套环 NS19

用于与标准磨口 NS 19 的无润滑油磨口连接。



1 PCS

6.2723.310

Titrimo Plus 的保护罩盖

显示屏和键盘的保护罩盖，用于 Titrimo plus 系列的所有仪器。

适用于：848 Titrimo plus、862 Compact Titrosampler、863 Compact Autosampler、865 Dosimat plus、869 Compact Sample Changer、870 KF Titrimo plus、876 Dosimat plus、877 Titrimo plus、899 Coulometer。



1 PCS

6.2724.010

灰尘过滤器

灰尘过滤器，用于617，679，743 Rancimat，用于卡氏炉



1 PCS

6.2738.000

漏斗

用于 KF 库仑法卡氏水分测定仪。



1 PCS

6.2739.000

扳手

用于拧紧连接器



1 PCS

6.2811.000

分子筛

分子筛。瓶装250克。孔径：0.3 纳米。用于 Rancimats 及卡尔费休测试仪。



2 PCS

6.2816.030

带 Luer 式接头的针头

用于在多模式电极中加注水银的针头和用于在卡尔·费休滴定法中添加样品的针头。



1 PCS

6.2816.070 穿刺针

与卡尔·费休炉一同使用。



1 PCS

6.2816.080 出口针

与832 KF Thermoprep一起使用。



2 PCS

6.2816.090 注射器 5 mL

用 PP 制成的 5 mL 注射器，带 Luer 式接头。



4 PCS

6.9001.050 热敏纸，用于 Custom Neos-N / Q3X

热敏纸 60 mm / 25 m，用于 Custom Neos-N / Q3X。
新：正确存放下可确保 25 年可读性。

1 卷



1 PCS

6.2147.000

数字 USB 键盘

数字 USB 键盘，用于 Titrino plus、Dosimat plus、862 Compact Titr sampler、869 Compact Sample Changer、863 Compact Autosampler 和 899 Coulometer。带两个集成的 USB 接口。



1 PCS

6.2047.040

899/917 滴定杯架

用于 899 Coulometer 和 917 Ti-Touch 的电量滴定杯的滴定杯架



1 PCS

1.142.0100

热敏打印机 Custom Q3X

带 USB 接口的一体式打印机，用于

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter
- Eco Dosimat / 滴定仪




纸宽 60 mm（40 个字符）。包括 USB 电缆 6.2151.120。

Optional accessories

Order no.	Description	
2.801.0010	801 Stirrer 无三角支架的磁力搅拌器，补充用于 Titrino plus、Dosimat plus、Titrando、Sample Processor、805 Dosimat 和 780/781 pH Meter。带有固定安装的、用于 MSB（万通串行总线接口）的线缆。	
2.803.0010	803型滴定台，带搅拌器和泵 紧凑式滴定台，带磁力搅拌器和内置泵，用于添加溶剂及吸空滴定杯中的液体。适用于用Titrando进行卡尔费休滴定。MSB接口。 包括完备的配件，溶剂瓶，以及废液瓶。	
6.2148.030	RS-232/USB Box 可为 Titrino plus 自动电位滴定仪增加两个 RS-232 接口，用于连接例如天平、计算机（tiBase 软件）、LIMS。需要电缆 6.2151.030。	
6.5406.000	电量分析的 KF 装备，包括带隔膜的发生电极 全套附件，用于 KF 库仑法卡氏水分测定仪。	

6.5406.010 电量分析的 KF 装备，包括无隔膜的发生电极

全套附件，用于 KF 库仑法卡氏水分测定仪。

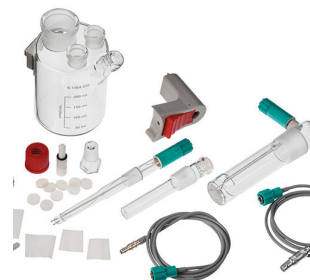

6.2164.500 用于 899 的 Power Box

可使用 Power Box 来运行 899 Coulometer，无需依赖供电系统。



6.2103.140 2毫米插头 / B类4毫米插座的黑色适配器

用于将B类插头（4毫米）与 离子计以及所有型号的Titrando的2毫米插座相连。



6.2103.130 2毫米插头 / 4毫米插座的红色适配器

用于将B类插头（4毫米）与780，781 pH/离子计以及所有型号的Titrando的2毫米插座相连。

