



902 Titrando

2.902.0010

用于通过一个测量接口终点设定滴定（SET）及酶和 pH-STAT 滴定（STAT）的电位滴定仪。

- 多达四套 800 Dosino 加液系统
- 带监控的加液功能，LQH 和串联加液
- 用于额外搅拌器或加液器系统的四个 MSB 接口
- 可以扩展额外的测量接口
- USB 接口
- 使用 OMNIS-Software、*tiamo*-软件或 Touch Control
- 如果需要，满足 GMP/GLP 和 FDA 要求，比如 21 CFR 第 11 部分

Scope of delivery 2.902.0010

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

用于智能型电极的高端滴定仪 – iTrode – 带有

- 多达四套 800 Dosino 加液系统
- 终点设定滴定 (SET)
- 酶和 pH-STAT 滴定 (STAT)
- 带监控的加液功能, LQH 灵快量化液体处理
- 四个 MSB 接口
- 一个电流分隔的测量接口
- USB 接口



交换单元中试剂瓶的止动弹簧。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2148.020	RS-232/USB Box	
	可为 Titrando、USB 样品处理器、Dosing Interface、Titrosampler 增加两个 RS-232 接口，用于连接例如天平、计算机、LIMS。需要电缆 6.2151.030。	
2.800.0010	800 Dosino多思 驱动头	
	800 Dosino 驱动头，带有可用于智能型加液单元的读/写硬件设备。带固定电缆。	
2.801.0040	801 Stirrer，带三脚支架	
	磁力搅拌器包括底盘、支架杆和电极座，可用于 Titrino plus、Dosimat plus、Titrandos、Sample Processor、805 Dosimat 和 780/781 pH Meter 以及 856 和 867 测量模块。带有固定安装的、用于 MSB（万通串行总线接口）的线缆。	
2.802.0040	802 Stirrer，适用于 804 Ti Stand	
	棒式搅拌器包括搅拌螺旋桨 6.1909.010。	

2.804.0040 804滴定台，带立架

滴定台及802杆式螺旋桨搅拌器的控制器，如果与802型杆式螺旋桨搅拌器联用，则可为您在磁力搅拌器之外提供另一选择。Ti Stand工作台带有底板、支撑杆与电极固定器。



2.805.0010 805 Dosimat

加液设备，用于Titrando和样品处理器，带可用于智能交换单元的读/写硬件设备。带有永久连接的电缆。不带交换单元。



2.846.0010 846 Dosing Interface

带 USB 功能的控制单元，用于连接多至四台 800 Dosino 或 805 Dosimat 进行加液和 Liquid Handling 作业。需要 Touch Control 或连至安装有 OMNIS Software、tiamo™、MagIC Net, viva 或 797 VA Computrace 的计算机进行操作。



6.2104.020 1米的电极电缆，F

用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。



- 6.2104.600 用于插头 U/插头 F 2x2 mm B 的电极电缆，1m
用于通过万通插头 U 将电极连接在万通设备上（插座 F）。



- 6.2148.010 远程盒，MSB
另外的远程接口，用于连接可通过远程线控制的装置。带有永久连接的电缆。



- 6.3026.110 1毫升的交换单元
智能型加液单元，配有1毫升的玻璃计量管和光保护。PCTFE/PTFE平面旋塞阀（stopcock），FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶



- 6.3026.150 5毫升的交换单元
交换单元内置数据芯片，5毫升玻璃计量管和避光保护壳。PCTFE/PTFE平面旋塞阀（stopcock），FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶



6.3026.210 10毫升的交换单元

交换单元内置数据芯片，10毫升玻璃计量管和避光保护壳。PCTFE/PTFE平面旋塞阀（stopcock），FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶



6.3026.220 20毫升的交换单元

交换单元内置数据芯片，20毫升玻璃计量管和避光保护壳。PCTFE/PTFE平面旋塞阀（stopcock），FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶



6.3026.250 交换单元 50 mL

带内置芯片的交换单元，带 50 mL 玻璃计量管及遮光罩。PCTFE/PTFE平头旋塞、FEP 管路连接、防扩散滴管头和由棕色玻璃制成的标准试剂瓶。



6.3032.120 807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit，带内置的数据芯片，2 mL 玻璃计量筒和遮光罩，可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



6.3032.150 807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 5 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



6.3032.210 807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 10 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



6.3032.220 807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 20 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



6.3032.250 807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 50 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



2.854.0010 854 iConnect


854 iConnect - 智能电极 «iTrodes» 专用电极电缆和测量放大器（电缆长度 150 cm）。



2.900.0010 900 Touch Control

Titrande、USB 样品处理器、856 Conductivity Module、867 pH Module 和 846 Dosing Interface 的操作单元。触摸灵敏、高度清晰的彩色屏幕以及可用于直接存取方法的收藏功能，都使操作能简单直观地完成。带有可直接连接到互联网上的以太网接口和用于连接 USB 打印机或 U 盘的 USB 接口。

对话框语言：德语、英语、中文、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、韩语、波兰语和意大利语。

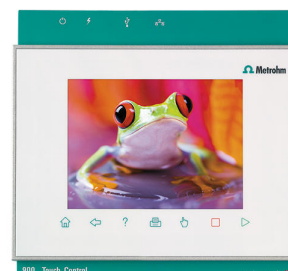

6.2168.000 迷你 USB 适配器电缆，25 cm

迷你 USB 适配器电缆，用于将一个 854 iConnect 连接到 867 pH Module、901...907 Titrande 和 916 Ti-Touch 上，25 cm。适配器电缆作为应力消除装置保持插入在仪器中，并且 854 iConnect 仅通过适配器电缆插入和拔出。



6.2103.140 2毫米插头 / B类4毫米插座的黑色适配器

用于将B类插头（4毫米）与 离子计以及所有型号的Titrande的2毫米插座相连。



6.2103.130

2毫米插头 / 4毫米插座的红色适配器

用于将B类插头（4毫米）与780，781 pH/离子计以及所有型号的Titrandos的2毫米插座相连。

