


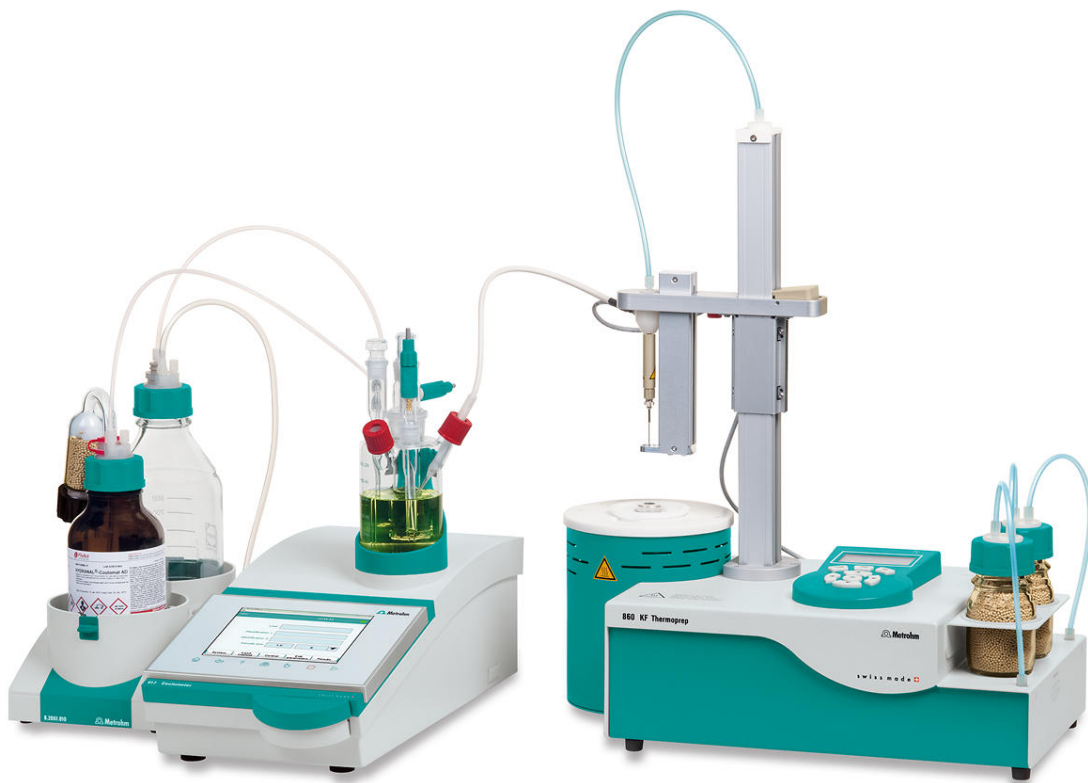

917 Coulometer, 配备有无隔膜的发生电极和 860 KF Thermoprep

2.917.1110

917 Coulometer 是一台根据卡尔·费休（Karl Fischer）方法进行电量水份测定的紧凑型滴定仪。917 Coulometer 中集成了“Reduced to the max” – 操作模块、搅拌器和泵，可快速更换试剂。这可大幅度节省实验室工作台上的使用面积。

新 917 Coulometer 同样符合 FDA 条例 21 CFR, 第 11 部分的要求。因此在审计时能确保您始终万无一失。

860 KF Thermoprep 用于热化样品前处理。许多物质不适合直接进行卡尔·费休滴定，因为其不溶解、或与 KF 试剂起反应、或其中所含水份仅能极慢析出或在高温情况下析出。样品将置于密封样品容器中放至炉中，并由 917 Coulometer 测定水份含量。

Scope of delivery 2.917.1110

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.917.0010

917 Coulometer

917 Coulometer 是一台根据卡尔·费休（Karl Fischer）方法进行电量水份测定的紧凑型滴定仪。917 Coulometer 中集成了“Reduced to the max” – 操作模块、搅拌器和泵，可快速更换试剂。这可大幅度节省实验室工作台上的使用面积。

建议的测量范围：10 µg – 200 mg 绝对水

电量分析法是用于痕量范围液态、固态和气态中的水份测定理想方法。此外，电量分析法是一种绝对方法，无需进行滴定度测定。



1 PCS

1.860.0010

860 KF Thermoprep

860 卡氏炉是为卡尔费休滴定中加热制备样品而设计的。许多物质因为不溶解，与卡尔费休试剂反应，水分释放 缓慢或需要加热到 很高温度，所以不能直接使用卡氏滴定仪测定。把样品装在密封的样品杯中，而后把样品放在炉子里。随后样品即可被任一卡氏滴定仪分析。



1 PCS

6.0341.100

用于库仑法分析的双铂丝电极

指示电极，用于库仑法卡尔费休滴定。



1 PCS

6.0345.100

无隔膜的发生电极

不带隔膜的发生电极，用于库仑法卡尔费休滴定，标准磨口 29/22。该发生电极适用于样品易溶于酒精的大多数应用。



1 PCS

6.1403.030

至库仑法滴定杯的 KF 吸附管

用于 KF 库仑法卡氏水分测定仪。



1 PCS

6.1437.000

SGJ 塞子, SGJ 14



1 PCS

6.1439.010

KF 输送吸管

用于电量滴定杯的 KF 输送吸管, 包括 M8 螺纹套管接头 6.1811.010。



2 PCS

6.1446.040

堵头螺丝/ M6



1 PCS

6.1446.090

塞子 / B-14/15 / M8



2 PCS

6.1448.020

垫片, 16毫米, 5片

每套5件。




1 PCS

6.1448.057

铝隔膜盖/ 100片

包括密封铝箔。

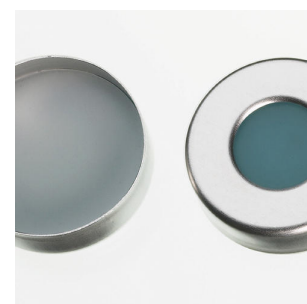

1 PCS

6.1465.320

带两个侧孔的卡氏滴定杯 / 80至250毫升 / 库仑法

用于756与831型库仑水份测定仪



2 PCS 6.1602.105 瓶盖 / GL 45 / 绿色

可用来从试剂瓶直接加液，带螺纹 GL 45。



2 PCS 6.1602.145 干燥瓶盖

带螺纹 GL 45 的螺纹密封件，用于干燥瓶 6.1608.050。



1 PCS 6.1608.023 试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45

通向交换单元。MSM的再生溶液瓶。



1 PCS 6.1608.030 试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45



2 PCS

6.1608.050

卡氏炉干燥瓶 / 100毫升 / GL 45



1 PCS

6.1609.010

吸收剂管，带管口

盖子，带管口。



1 PCS

6.1623.000

瓶盖的溢流保护

废液瓶瓶盖的溢流保护，在使用抽液泵时避免废液瓶溢流



1 PCS

6.1801.120

PVC 管 / 4 毫米 / 6 毫米 / 2 米



1 PCS 6.1805.010 FEP管 / M6 / 13厘米
带光照保护和扭折保护



2 PCS 6.1805.080 FEP管 / M6 / 25厘米
带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1805.100 FEP管 / M6 / 40厘米
带光照保护和扭折保护



2 PCS 6.1805.200 PTFE管 / M8 / 0.5 米



2 PCS

6.1808.050 软管适配器 Olive / M8 外部

1 个外螺纹 M8 和 1 个 Olive 式软管适配器。例如用于交换单元的恒温器外罩和恒温测量设备。



1 PCS

6.1819.030 管

用于带螺纹的M8开孔。用于6.1602.1XX试剂瓶的瓶附件以及6.1608.0XX试剂瓶



1 PCS

6.1819.050 管

用于带M8螺纹的开孔，用在6.1602.10X试剂瓶瓶附件（带6.1608.030吸液瓶）上。用于703与803 Ti Stand滴定台,681泵单元及679 Rancimat



2 PCS

6.1821.040 过滤管

过滤管，用于768卡氏炉，832 KF-Thermoprep，743 Rancimat上的6.1608.050干燥瓶。



1 PCS

6.1830.030

加热管

加热管，带 M6 螺纹，用于 860 KF Thermoprep、885 Compact Oven Sample Processor 和 874 USB Oven Sample Processor。



1 PCS

6.1903.030

搅拌棒 / 25 mm

带磁芯的搅拌棒，以 PTFE（聚四氟乙烯）材料包裹，长 25 mm。



1 PCS

6.2023.020

SGJ 14/15 的夹子

SGJ 14/16 的夹子



1 PCS

6.2047.040

899/917 滴定杯架

用于 899 Coulometer 和 917 Ti-Touch 的电量滴定杯的滴定杯架



1 PCS

6.2048.030

Guidance rod

Guidance rod for 860 KF Thermoprep.



1 PCS

6.2049.040

带 Luer-Lock 的针架

带 Luer-Lock 的针架（58 mm），用于 860、874、和 885 卡尔·费休炉。



1 PCS

6.2060.010

电缆固定器

使用 860 KF Thermoprep.



1 PCS

6.2063.010

6.2419.007 样品杯 (6 mL)作为样品容器



1 PCS

6.2104.020

1米的电极电缆，F

用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。



1 PCS

6.2104.120

1米的电极电缆，H

带H型插头。用于发生电极与卡尔费休库仑水分测试仪之间的连接。



1 PCS

6.2164.010

桌式电源 100 - 240 V/24 V 直流

用于 915 KF Ti-Touch、916 Ti-Touch、917 Coulometer 和 所有 Eco Titrator/Eco Dosimat 的桌式电源。



1 PCS

6.2419.007

样品瓶 6 mL，100 件

样品瓶，用于最多 6 mL 样品，适用于隔垫 6.1448.057，100 件



1 PCS

6.2621.110

弯边钳

弯边钳，用于密封6 毫升的样品瓶。与774卡氏炉样品处理系统一起使用。



1 PCS

6.2621.120

六角扳手（Hexagon key），1.5毫米



1 PCS

6.2627.000

炉 插入

与860 KF Thermoprep共同使用。



2 PCS

6.2701.040

螺纹密封件 GL 18，带孔

材质为 PBT。带用于隔垫 6.1448.020 的孔。用于无隔膜滴定杯 6.5405.000 和滴定管 6.1464.32X 及 6.1465.320。



3 PCS

6.2713.000

PTFE 套环 NS14

用于与标准磨口 NS 14 的无润滑油磨口连接。



1 PCS

6.2713.010

PTFE 套环 NS29

用于与标准磨口 SGJ 29 的无润滑油磨口连接的套环。



1 PCS

6.2713.020

PTFE 套环 NS19

用于与标准磨口 NS 19 的无润滑油磨口连接。



1 PCS

6.2724.010

灰尘过滤器

灰尘过滤器，用于617，679，743 Rancimat，用于卡氏炉



1 PCS

6.2738.000

漏斗

用于 KF 库仑法卡氏水分测定仪。



1 PCS

6.2739.000

扳手

用于拧紧连接器



2 PCS

6.2816.030

带 Luer 式接头的针头

用于在多模式电极中加注水银的针头和用于在卡尔·费休滴定法中添加样品的针头。



1 PCS

6.2816.070

穿刺针

与卡尔·费休炉一同使用。



1 PCS

6.2816.080

出口针

与832 KF Thermoprep一起使用。



2 PCS

6.2816.090

注射器 5 mL

用 PP 制成的 5 mL 注射器，带 Luer 式接头。



1 PCS

6.6066.000

USB flash drive for Ti-Touch

USB flash drive for 915 KF Ti-Touch and 916 Ti-Touch.



1 PCS

6.1808.040

螺纹转接头 M6 外部 / M8 内部

螺纹 M6 外部，M8 内部。



1 PCS

6.2723.300

900 Touch Control 的保护盖

900 Touch Control 的保护盖



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2723.300	900 Touch Control 的保护盖 900 Touch Control 的保护盖	
2.142.0100	热敏打印机 Custom Q3X 带 USB 接口的一体型打印机，用于 • 900 Touch Control • 915 KF Ti-Touch • 916 Ti-Touch • 917 Coulometer • 877 / 848 Titrino plus • 865 / 876 Dosimat plus • 91X Meter (电缆 6.2151.140) • Eco Dosimat / 滴定仪 • 862 Compact Titrosampler • 870 KF Titrino plus • 899 Coulometer 纸宽 60 mm（40 个字符）。包括 USB 电缆 6.2151.120。	

紧凑型点阵式打印机，带 USB 和 RS 232 接口，用于

- 900 Touch Control (+)
- 915 KF Ti-Touch (+)
- 916 Ti-Touch (+)
- 917 Coulometer (+)
- 91X Meter (+)
- Eco Dosimat / Titrator (+)
- 877 / 848 Titrino plus (额外需要 6.2151.100)
- 865 / 876 Dosimat plus (额外需要 6.2151.100)
- 862 Compact Titrosampler (额外需要 6.2151.100)
- 870 KF Titrino plus (额外需要 6.2151.100)
- 899 Coulometer (额外需要 6.2151.100)



(+) 电缆包含在标准配置中

6.2811.000

分子筛

分子筛。瓶装250克。孔径：0.3 纳米。用于 Rancimats 及卡尔费休测试仪。



6.2811.010

分子筛（美国）

分子筛。瓶装，每个 250 g。孔径大小：0.3 nm。无水份指示器。用于 Rancimats 和卡尔·费休仪器。

本产品供居住在美国的所有用户使用。根据 OSHA 危险通信标准（29 CFR 1910.1200），其材料被划分为危险。

