



920 Absorber Module

2.920.0010

920 Absorber Module 将燃烧模块与离子色谱连接在一起。920 Absorber Module 使被分析物质的气态化合物导入离子色谱仪。它负责整个 LQH 过程。除了 Combustion IC 之外，它也可用于气体分析。

Scope of delivery 2.920.0010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.920.0010	920 Absorber Module

920 Absorber Module 将燃烧模块与离子色谱连接在一起。920 Absorber Module 使被分析物质的气态化合物导入离子色谱仪。它负责整个 LQH 过程。除了 Combustion IC 之外，它也可用于气体分析。



2 PCS 6.1819.100 FEP 吸管，用于 2 L 瓶

带 M6 接口的瓶盖吸管。用于淋洗液制备。



2 PCS 1.800.0040 800 Dosino（电缆长度 0.65 m）

以用于智能配液单元的读写硬件来驱动。配有固定安装的电缆（长度 0.65 m）。



1 PCS 6.1014.000 Metrosep A Trap 1 - 100/4.0

高容量的阴离子柱，用于清洗淋洗液流。即便是高质量级别的试剂，例如 «Ultrapur» 或 «puriss» 仍可能有极少阴离子杂质。Metrosep A Trap 1 - 100/4.0 能确保拦住这些杂质。

此柱主要用于梯度应用中。



1 PCS 6.1014.200 Metrosep I Trap 1 - 100/4.0（捕获柱）

Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 捕获柱用于清除水溶剂中的离子杂质，即阳离子和阴离子杂质。建议将其用于清洁输送水，尤其用于 «MISP»，即 «Metrohm Inline Sample Preparation»（英蓝技术）。通过使用 Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 保护柱可大幅降低输送水对系统空白值的影响。



2 PCS

6.1546.030

活塞钳

用于 807 Dosing Unit 的活塞或者计量管单元 OMNIS。



1 PCS

6.1602.150

瓶盖 / GL 45 - 3 x UNF 10/32

用于 1/16 英寸毛细管接口连接。应用在 MSM 助溶剂以及万通在线渗析中。



2 PCS

6.1602.160

淋洗液和试剂用瓶盖 GL 45

用于淋洗液瓶、试剂瓶和冲洗瓶，带有可用于吸附管及吸液管的接口。



1 PCS

6.1608.050

卡氏炉干燥瓶 / 100毫升 / GL 45



2 PCS

6.1608.070

淋洗液瓶 / 2升 / GL 45



2 PCS

6.1609.000

干燥管, 大尺寸, 弯曲型

用于填充吸收剂材料。




2 PCS

6.1618.020

S 40螺纹口连接到GL45接口的螺纹转换器

将带S40螺纹的试剂瓶（Merck等厂家生产）连接到GL45接口的转换器

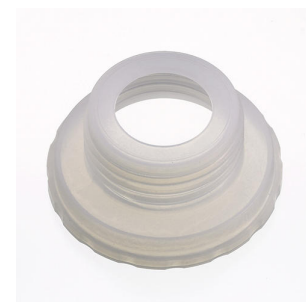

3 PCS

6.1803.030

PTFE 毛细管, 内径 0.5 毫米 / 3 米


毛细管, 用于在线渗析, 用在渗析单元、渗析式IC样品处理器、IC液体处理渗析单元上



1 PCS

6.1803.130 毛细管1/8英寸 / 1/16英寸（内径） / 1.5米

从淋洗液元件到淋洗液合成器的连接毛细管

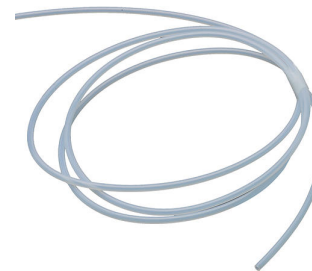

4 PCS

6.1803.160 PTFE（聚四氟乙烯）毛细管 0.75 mm 内直径 / 3 m

PTFE（聚四氟乙烯）毛细管，供 920 Absorber Module 中使用。



2 PCS

6.1805.010 FEP管 / M6 / 13厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS

6.1808.060 T形接头 / M6 内部

3 个螺纹 M6 内部。



1 PCS

6.1808.280

807 Dosing Unit 端口 4 的适配器，M6 内部

用于使用 807 Dosing Unit 端口 4 的适配器，用于与一根 FEP 软管 / M6 相连。



2 PCS

6.1816.080

硅管 6 mm 内直径 / 2 m

至 «Waste Collector»（废水收集器）的排出管。



1 PCS

6.1825.290

PEEK 样品环 250 µL

用于 «Metrohm intelligent Partial Loop Technique»（MiPT，万通部分装液法进样技术）和用于 PILS（particle into liquied sampler，气体样品液化器）。带 2 个 PEEK（聚醚醚酮）压力螺丝。



1 PCS

6.1831.040

PEEK 毛细管，内径0.5 毫米，15厘米

用于在线渗析。用于IC渗析单元，IC样品处理器，IC液体处理渗析单元



2 PCS 6.1805.030 FEP管 / M6 / 150厘米

带光照保护和扭折保护



2 PCS 6.2023.020 SGJ 14/15 的夹子

SGJ 14/16 的夹子



2 PCS 6.2057.230 至吸收剂模块的 Dosino 支架

用来将 Dosino 固定在吸收剂模块上的支架。



1 PCS 6.2151.020 电缆, USB A - USB B, 1.8米

USB连接电缆



1 PCS

6.2251.000 用于毛细管的标记套管

用于标记毛细管的彩色热缩套管部件。每三个一种颜色，共五种颜色。



1 PCS

6.2421.000 用于吸收剂模块的吸收剂管

用于吸收燃烧模块中的燃烧气体的吸收剂管。



1 PCS

6.2621.080 毛细管切管器

用于轻松切割塑料毛细管的切割工具，1/16" 和 1/8"，包括 5 把备用刀片。



3 PCS

6.2744.010 压力螺丝5x

带UNF 10/32连接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析（连接PEEK毛细管）



3 PCS

6.2744.080

螺纹 M6 / UNF 10/32 适配器

带 M6 外螺纹。用于离子色谱仪器。



4 PCS

6.2744.090

压力螺丝（长）

较长的版本。带UNF 10/32连接口。2件。用于PEEK泵头的备件。用于IC仪器



1 PCS

6.2744.170

压力螺丝，PEEK UNF 1/4-28，3只

对淋洗液合成器的淋洗液元件的连接毛细管进行固定



1 PCS

6.2744.200

转接器，外UNF 10/32 / 内M6

将1/16英寸的PEEK毛细管与转移软管（M6）相连。



8 PCS

6.2744.220 堵头螺丝, 10/32, 长


用于专业型IC分析仪用于对脱气装置和MCS上未用的端口进行密封。



2 PCS

6.2744.350 PEEK (聚醚醚酮) 压力螺丝 14 mm, 3 个

带有 UNF 10/32 接口。用于连接吸收剂模块中的 PEEK (聚醚醚酮) 毛细管。

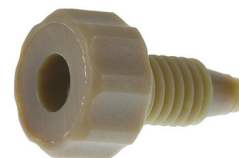

1 PCS

6.2766.000 用于吸收剂管的支架

用来将吸收剂管固定在吸收剂模块中的支架。



1 PCS

6.2766.010 用于进口阀的支架

用于至吸收剂模块的进口阀的支架。



1 PCS

6.2824.170

进口阀 PEEK

940、930、925、883、882、881 和 850 设备 IC 泵头入口侧不含金属的止回阀。



1 PCS

6.3032.150

807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 5 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



1 PCS

6.3032.210

807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 10 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



Optional accessories

Order no.	Description
6.5336.000	离子色谱渗析装备：Waste Collector（废物收集器） 用于最多五条废物毛细管的废物收集器。 
