



MIRA M-3 Basic Package

2.924.0010

瑞士万通快速拉曼分析仪 (MIRA) M-3 是一款性能强大的手持式拉曼光谱仪，可用于各种材料的快速无损测定和验证，例如药物有效成分和赋形剂。Mira M-3 小而坚固，具有高效的摄谱仪设计结构，配备了万通独一无二的逐格扫描技术 (ORS)。Mira M-3 符合 FDA 联邦法规 21 章第 11 款 的规定。

Basic Package包含一个小管套筒，在试验程序中与 1 级激光器一起，可通过玻璃小管直接分析样本。

Scope of delivery 2.924.0010

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.924.0010

Mira M-3 Basic Package

万通快速拉曼分析仪 (MIRA) M-3 是一款性能强大的手持式拉曼光谱仪，可用于各种材料的快速无损测定和验证，例如药物有效成分和赋形剂。M-3 小而坚固，具有高效的摄谱仪设计结构，配备了万通独一无二的逐格扫描技术 (ORS)。Mira M-3 符合 FDA 联邦法规 21 章第 11 款 的规定。

Basic Package 包含一个小管套筒，在试验程序中与 1 级激光器一起，可通过玻璃小管直接分析样本。



1 PCS

6.021.08010

USB mini - USB A 电缆, 1.5 m



1 PCS

6.02707.000

Mira M-3 便携箱

用于 Mira M-3 和所有附件的防护箱



1 PCS

6.06071.010

MIRA Cal 药学 U 盘

这一操作方法简单的软件主要用于数据的下载分析、打印报告、创建光谱库和操作过程以及遵守 FDA 联邦法规 21 章第 11 款的规定。



1 PCS 6.06071.040 校正/验证用附件 (CVA)

ASTM 标准的 50:50 (v:v) 甲苯/乙腈，用于校正 Mira M-3-/P 光谱仪的波数轴，以及用于按照 EP 2.2.48 验证波数的聚苯乙烯。



1 PCS 6.06073.000 拉曼 USP 光谱库

MIRA M-3 / P 的 USP 库包含 500 多种经过认证的二级 USP 标准（有关药用原料药和赋形剂）。



1 PCS 6.07501.010 ASTM 校正标准件

50:50 (v:v) 用于校准 MIRA/MISA 系统波数轴的甲苯/乙腈 ASTM 标准。3B 类操作。



1 PCS 6.07502.000 样品瓶附件

Mira M-3/P/DS 样品瓶附件套筒。适用于 15 x 26 mm 的玻璃小管。



1 PCS 6.2133.020 锂电池 AA 1.5V / 2900 mAh

4 个 1.5 V AA 锂电池。



1 PCS 6.2151.110 USB 电缆, 1.8 米

用于连接仪器。



1 PCS 6.7430.060 超细纤维清洁布

屏幕和镜头清洁布



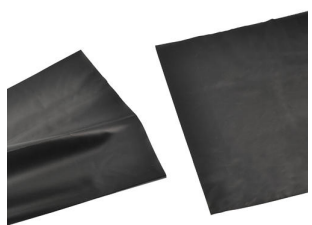
1 PCS 6.7502.010 MIRA 用玻璃小管, 144 件

用于 MIRA 系统的玻璃小管。15 mm x 26 mm。

在供货范围内已包含 144 个玻璃小管。



Optional accessories

Order no.	Description	
	药片支架	
	Mira M-3/P/DS 药片支架套筒，用于不同尺寸和形状药片的分析。	
6.07506.010	通用附件	
	通用套件是一个可在三个不同位置使用的通用型尖端。位置 3 将用于直接接触。位置 2 将用于薄塑料袋，焦点距离适配器末端大约 1.0 mm。位置 1 将用于通过试瓶聚焦，焦点距离金属尖端大约 8 mm。以 3B 级投入使用。	
6.07506.050	探针保护套	
	一次性保护套由极薄的 LDPE 制成，用于防止探针在用于多个容器的时候发生交叉污染。量：250 件。	
6.07507.000	Mira 采样遮光布	
	光学遮光布用于在日光条件下进行取样	

MIRA PowerPack 套件中包含了 MIRA PowerPack 可充电外接电池，配有 USB-C 插口的充电器，以及带有 USB-C 插头的充电电缆。为 MIRA 系统设计，该套件能够将使用时长提升至超过 8 小时。

