



# MIRA M-3 Advanced Package

2.924.0020

瑞士万通快速拉曼分析仪 (MIRA) M-3 是一款性能强大的手持式拉曼光谱仪，可用于各种材料的快速无损测定和验证，例如药物有效成分和赋形剂。Mira M-3 小而坚固，具有高效的摄谱仪设计结构，配备了万通独一无二的逐格扫描技术 (ORS)。Mira M-3 符合 FDA 联邦法规 21 章第 11 款的规定。

Advanced Package 包含一个附加透镜，可用它直接分析材料或者在材料容器中分析（3b 级激光器），还有一个小管支架套筒用于测量玻璃小管中的样本（1 级激光器）。

Scope of delivery 2.924.0020

| Qt. | Order no. | Description |
|-----|-----------|-------------|
|-----|-----------|-------------|

1 PCS

1.924.0020

Mira M-3 Advanced Package

万通快速拉曼分析仪 (MIRA) M-3 是一款性能强大的手持式拉曼光谱仪，可用于各种材料的快速无损测定和验证，例如药物有效成分和赋形剂。M-3 小而坚固，具有高效的摄谱仪设计结构，配备了万通独一无二的逐格扫描技术 (ORS)。Mira M-3 符合 FDA 联邦法规 21 章第 11 款的规定。

Advanced Package 包含一个附加透镜，可用它直接分析材料或者在材料容器中分析（3b 级激光器），还有一个小管支架套筒用于测量玻璃小管中的样本（1 级激光器）。



1 PCS

6.021.08010

USB mini - USB A 电缆, 1.5 m



1 PCS

6.02707.000

Mira M-3 便携箱

用于 Mira M-3 和所有附件的防护箱



1 PCS

6.06071.010

MIRA Cal 药学 U 盘

这一操作方法简单的软件主要用于数据的下载分析、打印报告、创建光谱库和操作过程以及遵守 FDA 联邦法规 21 章第 11 款的规定。



1 PCS

6.06071.040 校正/验证用附件 (CVA)

ASTM 标准的 50:50 (v:v) 甲苯/乙腈, 用于校正 Mira M-3-/P 光谱仪的波数轴, 以及用于按照 EP 2.2.48 验证波数的聚苯乙烯。



1 PCS

6.06073.000 拉曼 USP 光谱库

MIRA M-3 / P 的 USP 库包含 500 多种经过认证的二级 USP 标准 (有关药用原料药和赋形剂)。



1 PCS

6.07501.010 ASTM 校正标准件

50:50 (v:v) 用于校准 MIRA/MISA 系统波数轴的甲苯/乙腈 ASTM 标准。3B 类操作。



1 PCS

6.07502.000 样品瓶附件

Mira M-3/P/DS 样品瓶附件套筒。适用于 15 x 26 mm 的玻璃小管。



1 PCS

6.07505.000

附加透镜 (LWD)

Mira M-3/P/DS 高级套件包含一个适用于 7.6 mm 焦距长距离的附加透镜 (LWD)。3B 类操作。



---

1 PCS

6.07505.010

附加透镜 (SWD)

Mira M-3/P/DS 高级套件包含一个适用于 1.0 mm 焦距短距离的附加透镜 (SWD)。3B 类操作。



---

1 PCS

6.2133.020

锂电池 AA 1.5V / 2900 mAh

4 个 1.5 V AA 锂电池。



---

1 PCS

6.2151.110

USB 电缆, 1.8 米

用于连接仪器。



1 PCS

6.7430.060

超细纤维清洁布

屏幕和镜头清洁布



1 PCS

6.7502.010

MIRA 用玻璃小管, 144 件

用于 MIRA 系统的玻璃小管。15 mm x 26 mm。

在供货范围内已包含 144 个玻璃小管。



1 PCS

6.7560.010

Mira M-3/P/DS 用激光护目镜

使用 Mira 产品的时候, 应遵守必要的激光安全预防事项。这些安全护目镜面向的是激发波长为 785 nm 的激光, 其按照 EN 207 标准提供保护 (也对眼镜佩戴者适用)。由于该激光安全护目镜采用了轻量化结构方式和舒适型设计, 您工作时可以长时间佩戴, 不会出现任何问题。




## Optional accessories

| Order no.   | Description                                                                                                     |                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 药片支架                                                                                                            |                                                                                       |
|             | Mira M-3/P/DS 药片支架套筒，用于不同尺寸和形状药片的分析。                                                                            |    |
| 6.07505.020 | 附加透镜 (XLWD)                                                                                                     |                                                                                       |
|             | Mira M-3/P/DS 高级套件包含适用于 18 mm 焦距的超长距离用附加透镜 (XLWD)。以 3B 等级运行。                                                    |    |
| 6.07506.010 | 通用附件                                                                                                            |                                                                                       |
|             | 通用套件是一个可在三个不同位置使用的通用型尖端。位置 3 将用于直接接触。位置 2 将用于薄塑料袋，焦点距离适配器末端大约 1.0 mm。位置 1 将用于通过试瓶聚焦，焦点距离金属尖端大约 8 mm。以 3B 级投入使用。 |  |
| 6.07506.050 | 探针保护套                                                                                                           |                                                                                       |
|             | 一次性保护套由极薄的 LDPE 制成，用于防止探针在用于多个容器的时候发生交叉污染。量：250 件。                                                              |  |

6.07507.000 Mira 采样遮光布

光学遮光布用于在日光条件下进行取样

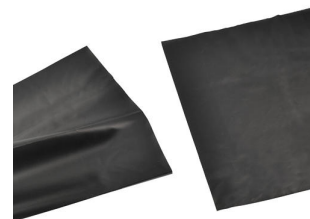

---

6.7560.200 MIRA PowerPack 套件

MIRA PowerPack 套件中包含了 MIRA PowerPack 可充电外接电池，配有 USB-C 插口的充电器，以及带有 USB-C 插头的充电电缆。为 MIRA 系统设计，该套件能够将使用时长提升至超过 8 小时。

